

# PHILIPS

## 音波震動牙刷

ExpertResults 7000

內建壓力感測器

3 種模式、3 種強度

2 x BrushSync 功能

旅行盒



HX7533/01



## 從使用第 1 天開始自然淨白牙齒。

牙菌斑清除效果提高達 10 倍\*

運用創新音波震動技術展現燦爛笑顏的 3 個理由。從第一天開始就能擁有更加潔白的牙齒與更健康的笑容。ExpertResults 7000 提供高達 10 倍的牙菌斑清除效果，並可減少多達 5 倍的牙齦出血情形\*，讓您每天找回亮白升級的加分笑靨。

### Proven to improve oral health

- 安全且溫和對您的牙齒敏感部位
- 從使用第 1 天即擁有自然淨白牙齒
- 減少牙齦出血，效果提高達 5 倍\*
- 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 10 倍

### Designed around you

- 讓您可輕鬆旅遊

### Innovative technology

- 壓力感測
- 飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
- 連接智慧型牙刷握把和智慧型刷頭
- 隨時得知何時該更換刷頭

### Optimize your brushing

- 刷頭會選取最佳模式與強度
- 3 種模式，3 種強度設定

# 焦點

## 自然潔白的牙齒



裝上 W DiamondClean 刷頭，從使用第 1 天即可去除表面牙垢，同時達到 2 倍以上的亮白效果，笑顏更燦爛。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，經臨床實證，只要一週就可以使牙齒變白。

## 和牙菌斑說再見



濃密高品質刷毛的牙菌斑全區域清除效果較手動牙刷提高達 10 倍。特殊曲線外型的強韌刷頭可輕易深入口腔後方清潔牙齒。

## 改善牙齦健康




濃密高品質刷毛提供更溫和的刷牙效果，可減少牙齦出血，效果提高達 5 倍，並在 2 週內讓牙齦健康改善效果較手動牙刷提高達 6 倍。

## 安全且溫和



我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，有助於預防齒縫蛀牙及改善牙齦健康，讓您享有安全且舒適的刷牙體驗。

## 監控您的刷牙力道

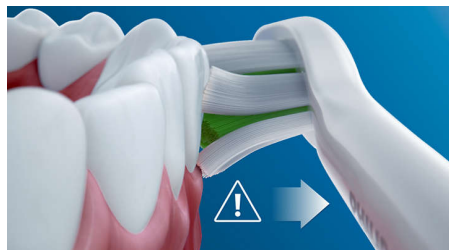

刷牙力道過大會損害牙齒和牙齦。為防止這種情況，內建的壓力感測器會發出輕柔的脈動聲，提醒您將力道放鬆。

## 以自己的方式刷牙



此牙刷可讓您自訂刷牙方式，有三種模式和三種強度可供選擇。「乾淨」模式是清潔效果更好的標準模式。「潔白」模式可完美去除齒垢。「牙齦保健」模式額外增加一分鐘降低功率的刷牙模式，可溫和按摩牙齦。三種強度讓您能夠切換「更高」和「更低」的順序，以調整從左到右的強度。

## BrushSync 技術



由微晶片啟用的技術，能偵測並同步智慧型刷頭與智慧型握把。智慧型握把和智慧型刷頭是強大的配對組合，可啟用智慧型模式配對和智慧型更換提醒。

## 模式與強度配對



不確定該使用哪種模式與強度等級嗎？不用擔心，BrushSync 模式配對功能會向智慧型握把傳達您正在使用的智慧型刷頭。因此，舉例來說，如果您按一下牙齦保健刷頭，牙刷會為您的牙齦判斷選取最佳模式與強度。您只需要按下電源按鈕即可。

## BrushSync 更換提醒



刷頭會隨著時間逐漸磨損。但是我們的 BrushSync 技術能追蹤刷頭的使用時間，以及您的刷牙力道。應該更換刷頭時，會透過握把上的指示燈並發出短嗶聲提示您。

# 規格

## 功率

電壓: 110-220 V

## 技術規格

電池續航力 (從電力充滿到沒電): 多達 2 週

電池: 充電式

電池類型: 鋰離子

## 設計與外型

色彩: 白銀

## 客戶服務

保固: 2 年有限保固

## 使用簡單

電量指示燈: 電池電量指示燈

握把相容性: 方便的一按即用刷頭

握把: 纖巧的人體工學設計

刷頭感應: 搭配最佳模式

刷牙時間: 多達 2 週

更換提醒: 永保最佳效果, 提醒圖示亮起

## 內附配件

充電器: 2

握把: 2 支 ExpertResults 7000

刷頭: 2 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭, 1 支 W DiamondClean

旅行盒: 2

## 清潔效能

速度: 每分鐘可刷 31000 次

對健康有益: 短短兩週改善牙齦健康, 有助於減少蛀牙

美白效果: 1 週內就能讓牙齒變得更潔白

計時器: 四分象限計時器與智慧型計時器

壓力回饋: 震動握把發出警示

## 模式

清潔: 實現優異的每日清潔效果

3 種強度: 低, 中, 高

牙齦保健: 溫和按摩牙齦

美白: 清除表面污垢

## BrushSync 模式配對

C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭: 搭

配「乾淨」模式

W DiamondClean: 搭配「潔白」模式

## 智慧型感應器技術

壓力感測器: 刷牙力道過強時警示

BrushSync 更換提醒: 隨時得知何時, 該更換刷頭

BrushSync 技術: 連接智慧型握把和, 智慧型刷頭

