

PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea Prestige

Con tecnología SenseIQ

Zonas de precisión, cuerpo, cara

Con sensor SmartSkin

Uso con y sin cable



BRI953/00



Disfruta de una piel suave y sin vello durante 6 meses*

3 accesorios inteligentes para unos resultados óptimos

Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro sistema IPL más eficaz. Diseñados para un cómodo tratamiento de depilación en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva del cuerpo y modifican los programas según la zona.

Máxima libertad, mínimas molestias

- Con sensor SmartSkin
- La aplicación Lumea IPL te acompaña a cada paso
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales

Piel suave por más tiempo con la tecnología IPL de Lumea


- Tecnología IPL profesional en casa, desarrollada junto con dermatólogos
- Uso con o sin cable
- Tratamiento eficaz y seguro comprobado
- Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel
- Tecnología SenseIQ para tratamientos de depilación personalizados

Tratamiento IPL profesional para las zonas del cuerpo

- Los accesorios inteligentes adaptan los programas a cada zona del cuerpo
- Accesorio de precisión para la zona del bikini y las axilas
- Accesorio para el cuerpo con diseño curvo
- Accesorio de precisión para la cara con filtro adicional


Destacados

Lumea evita que el vello vuelva a crecer *

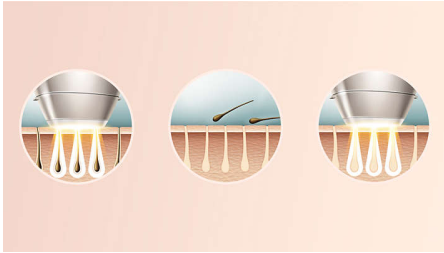


Las siglas IPL corresponden a Intense Pulse Light (luz pulsada intensa). Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que provoca que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer incluso en las zonas más sensibles. Philips Lumea se ha probado clínicamente y se ha desarrollado junto con dermatólogos para proporcionar un tratamiento fácil y efectivo desde la comodidad de tu propio hogar.

Efectividad demostrada

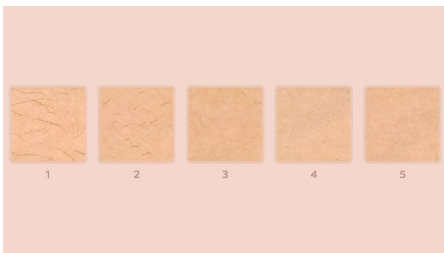

En estudios objetivos, se muestra hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos**. Realiza los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puedes disfrutar de seis meses de piel suave sin vello*.

Tipos de vello y piel adecuados

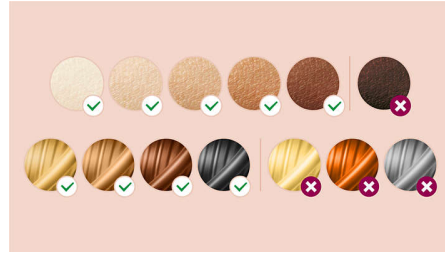

Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.

Tecnología SenseIQ



Detecta. El sensor SmartSkin de Lumea detecta tu tono de piel e indica el ajuste de luz más cómodo para ti. Se adapta. Los accesorios inteligentes adaptan los programas diseñados para cada zona del cuerpo. Te cuida. Se desarrolló en conjunto con dermatólogos y se inspiró en ti para lograr la eliminación del vello de forma suave y duradera, incluso en zonas sensibles***.

Tratamiento de las zonas del cuerpo



Tu cuerpo es único. Y su piel, sus curvas y sus contornos deben tratarse también de forma única. Los accesorios para todo el cuerpo de

Lumea tienen una forma que se amolda perfectamente a cada curva y adaptan los programas personalizados a cada zona del cuerpo. Las ventanas de tratamiento se han diseñado para maximizar el contacto con la piel y garantizar que la luz no se escape, lo que permite disfrutar de tratamientos suaves y eficaces incluso en zonas delicadas o sensibles.

Accesorio de precisión



El accesorio de precisión inteligente tiene un tamaño mediano con una ventana de 3 cm² para cubrir de forma precisa las zonas del bikini y las axilas. El diseño curvado sigue con precisión los contornos del cuerpo para maximizar el contacto con la piel. Cuando se coloca en el dispositivo, el accesorio adapta un programa personalizado para esas zonas del cuerpo.

Accesorio para el cuerpo



El accesorio inteligente para el cuerpo tiene nuestra ventana de tratamiento más grande, de 4,1 cm², por lo que es perfecta para tratar rápidamente zonas del cuerpo como las piernas, los brazos y la barriga. El diseño curvo sigue con precisión los contornos del cuerpo para maximizar el contacto con la piel. Coloca el accesorio y adaptará un programa personalizado específicamente para la zona del cuerpo. El 83 % de las mujeres están satisfechas con la reducción del vello en las piernas****.

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para el tratamiento corporal:

Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Forma: curva convexa, Tratamiento personalizado para el cuerpo

Accesorio para el tratamiento facial: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara

Accesorio para el tratamiento de precisión: Forma: curvada cóncava y precisa, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para las axilas, Tratamiento personalizado para la línea del bikini

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Línea alba

Zonas sensibles: Axilas, Bikini

Cara: Barbilla, Labio superior, Línea de la mandíbula

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 250.000 pulsos*****

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Axilas: 2,5 minutos

Zona del bikini: 2 min

Cara: 1,5 minutos

Medias piernas: 8,5 min.

