



Philips Sonicare
DiamondClean Smart
鑽白極淨智能鑽石音波
電動牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP
5 種模式 (清潔、亮白、護齦、
深層清潔、舌苔清潔)
4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感
應器
3 段強度



HX9924/12

更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙

全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌 *

飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動 62,000 次，同時溫和不刺激，達到天天微洗牙效果。DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙 APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善口腔照護。具備 5 種潔牙模式，以及 3 段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4 款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除 10 倍牙菌斑，同時提升 7 倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能 5 倍去除牙漬，3 天讓牙齒有感亮白！

Proven to improve oral health

- 牙菌斑清除效果高達 10 倍 *
- 2 週擁有 7 倍更健康的牙齦 *
- 5 倍去除牙漬，3 天有感亮白 *
- 清除舌苔，享受更持久的清新口氣

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- 帶您回到任何遺漏之處，確保 100% 的清潔範圍
- 「智能力道感應」避免潔牙力道過大
- 針對較麻煩的區域加強護理
- 「智能定位感應」引導您刷牙，避免遺漏的區域
- 「智能動作感應」引導刷牙動作，潔牙更輕鬆

PHILIPS
sonicare

焦點

和牙菌斑說再見



裝上 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭，體驗最深度的清潔效果。柔軟彈性的刷頭側緣，讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀，提供高達 4 倍以上的表面接觸 **，搭配音波流體潔力技術，即使是難以處理的部位，也能展現 10 倍牙菌斑清除效果 *。

愛護您的牙齦



裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣，精緻的超長刷毛設計，更貼合牙齦線，有效針對疾病易發生處進行清潔。柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果，防止磨損、牙齦萎縮、牙齦流血，經臨床實證可在 2 週內擁有 7 倍更健康的牙齦。*

快速美白牙齒



裝上 W3 Premium White 潔白刷頭，密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，輕鬆去除


表面齒垢，經臨床實證，只要 3 天，就能去除 5 倍牙漬 *，實現有感亮白，展現自信笑容！

TongueCare+ 潔舌刷




裝上 TongueCare+ 潔舌刷，特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深層清潔，溫和地清除舌頭上引起異味的食物殘渣、細菌和舌苔，給你潔淨口腔和清新迷人的氣息。

絕不漏掉任何地方

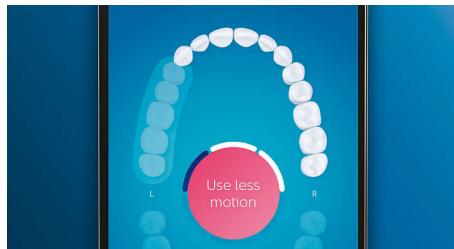

三大智能感應科技之一的「智能定位感應」，能智慧偵測口腔內所有區域，搭配專屬潔牙 APP，讓您知道何時已完成全口腔清潔，並即時指導需要再加強的部位，避免遺漏任何區域。

注重的區域及目標設定

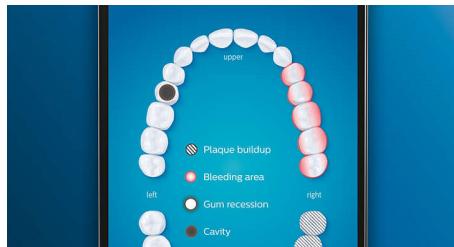

牙醫認為您有需要特別注意的麻煩區域嗎？我們可在手機應用程式內的 3D 口腔圖像中強調這些區塊，提醒您加強處理難刷的部位。

力道太強？



您或許不會注意到自己刷牙的力道是否過大，但 DiamondClean Smart 會為您把關。如果您刷牙太過用力，握把底部的環狀指示燈會開始閃爍，溫和地提醒您減輕力道，在此功能的協助下，10 人中有 7 人可以將牙刷得更完善，給予牙齒和牙齦更完整的保護。

遊刃有餘



不須您費力刷動，只需讓音波流體潔力和刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷動感應器，可溫和地提醒您減少 "左右橫刷" 次數。如此一來，不僅能擁有更好的刷牙技巧，更能溫柔又有效率地清潔口腔。

BrushSync 模式配對



不確定該使用哪種模式與強度等級嗎？不用擔心，當您更換刷頭時，刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達您正在使用的刷頭，刷柄即會自動轉換成最適當的潔牙模式與強度，提供你最佳潔牙效果。

規格

連線能力

- Bluetooth® 無線科技 : 已連線刷牙手機應用程式

功率

- 電壓 : 110-220 V

技術規格

- 電池 : 充電式
- 電池續航力 (從電力充滿到沒電) : 14 天 *****
- 電池類型 : 鋰離子

設計與外型

- 色彩 : 黑色

客戶服務

- 保固 : 2 年有限保固

相容性

- 與 Android 相容 : Android 手機, 具備藍牙 4.0 的平板電腦
- 與 iOS 相容 : iPad 第 3 代或更高版本, iPhone 4S 或更高版本, iOS7 或更高版本

使用簡單

- 電量指示燈 : 發光式圖示顯示電池壽命
- 握把相容性 : 方便的一按即用刷頭
- 顯示器 : 背光螢幕
- 握把 : 纖巧的人體工學設計
- 刷頭感應 : 搭配最佳模式
- 更換提醒 : 永保最佳效果, 提醒圖示亮起

內附配件

- 握把 : 1 支 DiamondClean Smart
- 刷頭 : 1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭, 1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭, 1 支 W3 Premium White 潔白刷頭, 1 支 TongueCare+ 潔舌刷

- 旅行盒 : USB 旅行充電盒
- 玻璃充電座 : 1

清潔效能

- 對健康有益 : 牙齦潔淨效果高達 7 倍 ****
- 速度 : 每分鐘可刷 62000 次
- 效能 : 牙菌斑清除效果提高達 10 倍 *
- 美白效果 : 減少高達 100% 的牙垢 ****
- 計時器 : BrushPacer 和智慧型計時器
- 壓力回饋 : 環狀指示燈亮紫燈, 震動握把發出警示
- TouchUp: 確保 100% 的範圍

模式

- 清潔 : 實現優異的每日清潔效果
- 3 種強度 : 高, 中, 低
- 深層清潔 +: 實現活力深層清潔
- 牙齦保健 : 特別注意臼齒
- TongueCare+: 持久的清新口氣
- 亮白 +: 清除表面牙垢

BrushSync 模式配對

- C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭 : 搭配「乾淨」模式
- G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭 : 搭配「牙齦保健」模式
- W3 Premium White 潔白刷頭 : 搭配「亮白 +」模式
- TongueCare+ 潔舌刷 : 搭配「舌頭護理」模式

智慧型感應器技術

- 壓力感測器 : 刷牙力道過強時警示
- 位置感應器 : 追蹤及改善範圍
- 刷動感應器 : 指引減少刷動
- 3D 口腔圖像 : 強調重點區域
- TouchUp: 顯示遺漏的區域
- 位置感應器 : 引導前往遺漏的區域



發行日期 2025-04-15

版本 : 3.2.6

EAN: 87 10103 80211 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 來自獨立市場研究公司，針對全球市場份額加總達 72% 的 10 個國家，向 1800 多位牙科專業人士調查之結果。

* * 出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異。

* * * 相較於 DiamondClean

* *** 使用「牙齦保健」模式 2 週後與手動牙刷比較

* **** 使用「亮白 +」模式 3 天與手動牙刷比較

* ***** 根據每天以標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算