

PHILIPS

AVENT

Protetor de mamilos

Projetado para contato com a pele

Protege mamilos doloridos

Pequeno (15mm)

2 unidades



SCF153/01



Ajuda a amamentar com conforto por mais tempo*

Permite a pega fácil do bebê e protege sua pele*

Os protetores de mamilos são desenvolvidos para ajudar na amamentação quando você ou o bebê tiverem alguma dificuldade. A proteção ultrafina do bico em forma de borboleta permite o contato do bebê com o seio e ajuda na proximidade enquanto você amamenta.

Estojo para manter a higiene

- Fácil de limpar no estojo higiênico de transporte

Fácil de fazer a pega correta para o bebê*

- Projetado para ajudar em dificuldades de pega do seio

Recursos do produto


- Projetado para o ajuste perfeito
- Projetado para permitir o contato da pele com o bebê

Quando usar uma proteção para mamilos

- Combinação de amamentação e mamadeira
- Os bebês podem mamar no seu próprio ritmo
- Feito para mamilos sensíveis, machucados ou doloridos


Destques

Exclusivo formato borboleta

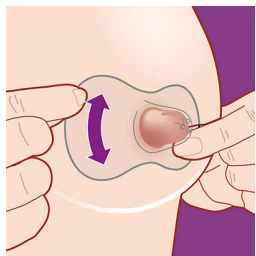


Nossos protetores de mamilo ultrafinos em forma de borboleta foram projetados para contato pele a pele para o bebê. Graças ao formato, não só o nariz fica em contato com o seio, mas também o queixo, assim permitindo que o bebê sinta o cheiro e toque a pele da mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro do mamilo para assegurar que o bebê possa pegar corretamente toda a aréola. Desfrute do vínculo com seu pequeno ao mesmo tempo em que protege os mamilos.

Projetado para suportar a pega do seio*

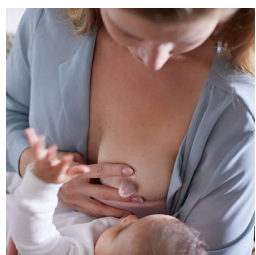

Projetamos nossos protetores de mamilo para ajudar os bebês com os dificuldades de pega precoce do seio e ajudá-la a amamentar por mais tempo*. Feito para mães com mamilos achatados e invertidos e bebês com técnica de sucção fraca ou anomalias orais, o protetor de mamilo pode proporcionar um molde de mamilo para a pega, mantendo e assegurando uma posição alongada durante as pausas de amamentação do bebê.

Protege os mamilos durante o aleitamento

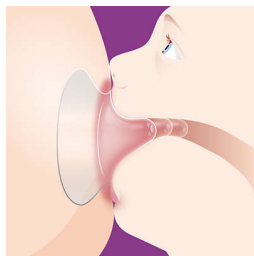

Os protetores de mamilo são projetados para proporcionar conforto e amamentações mais gentis para mamilos machucados, rachados ou doloridos. Eles podem ajudar a reduzir a fricção e o estiramento dos mamilos durante a amamentação, para que você possa amamentar o bebê confortavelmente.

Amamentação no ritmo do bebê




Se o fluxo de leite da mãe precisa ser controlado ou se o bebê não tem força, os protetores de mamilo também são de grande ajuda. Os três orifícios na ponta do protetor podem ajudar no fluxo do leite materno para o bebê, caso haja excesso de leite. Dessa forma, o bebê poderá mamar no seu próprio ritmo caso de a mãe esteja liberando leite em excesso.

Combinação de amamentação no peito e na mamadeira

O material de silicone ultrafino e macio do protetor de mamilos Philips Avent está mais próximo de nossas soluções de alimentação para bebês, ajudando na transição perfeita combinando a amamentação no peito e na mamadeira.

Dois tamanhos, para atender às suas necessidades

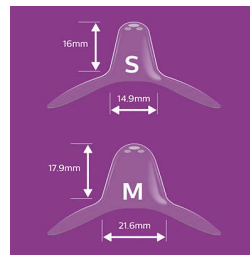

Os protetores de mamilo estão disponíveis em dois tamanhos para um melhor ajuste ao seio. Protetores pequenos se ajustam a mamilos de 12 mm de diâmetro e o médio, de até 21 mm. Para encontrar o tamanho certo, sente-se confortavelmente e coloque um dos anéis perfurados sobre o mamilo. Gire no sentido horário e guie o mamilo pelo túnel. Em seguida, estique a base do protetor em volta da aréola. Se houver 2 mm de espaço entre o mamilo e o silicone, o encaixe é o ideal. Dica: o tamanho é baseado no mamilo, não na aréola. Não tem certeza? Peça ajuda ao seu profissional de saúde.

Fácil de limpar a qualquer hora



É necessário limpar os protetores de mamilos antes de cada uso, o que leva menos de 10 minutos. Coloque-os em água fervida por cinco minutos ou use o estojo higiênico. Coloque ambos os protetores de mamilos bem enxaguados no estojo e acrescente 25 ml de água. Em seguida, coloque os protetores em um micro-ondas de 750 a 1.000 W por três minutos. Deixe-os esfriar por cinco minutos. Drene a água, e eles estarão prontos para uso. O prático estojo higiênico de transporte pode ser usado em qualquer lugar para guardar ou manter os protetores limpos.

Especificações

Design

Design em formato de borboleta

Material

Protetor de mamilos: Silicone livre de bisfenol-A*

O que está incluído

Protetor de mamilos 15mm: 2 pcs
Estojo higiênico de transporte: 1 pcs



* no caso de mamilos achatados ou invertidos, machucados, sensíveis, rachados ou doloridos e alguns bebês com dificuldades de pega do seio
* 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE
* Esta seção contém opiniões do consumidor sobre o produto. A Philips se dissocia do conteúdo inserido pelos consumidores nesta seção e, conseqüentemente, qualquer informação técnica e/ou conselho sobre o uso do produto nela incluído não se destina a ser uma informação oficial da Philips.