

Philips BlueTouch
Appstyret pude til
smertelindring

Innovativ blå LED-teknologi

Mod muskelsmerter i ryggen
iOS- og Android-kompatibel
Med strop til nederste del af ryggen



PR3743/00

Naturlig lindring af muskelsmerter i ryggen uden medicin

Klinisk dokumenteret* smertebehandling med blå lys

Philips BlueTouch benytter innovativ terapi med blå lys med dobbelt effekt. Det giver lindrende varme og stimulerer frigivelse af kvælstofilte i kroppen, hvilket øger blodtilstrømningen lokalt og fremmer kroppens naturlige helingsprocesser.

Øger blodtilstrømningen lokalt og giver smertelindring

- Bruger varmen og den naturlige helende effekt af blå lys
- Behandling uden medicin

Innovativ blå LED-lysteknologi

- Bruger blå LED-lys på en unik måde til forøgelse af den lokale blodgennemstrømning
- Ekstra beroligende varmeeffekt til lindring af rygsmerter
- Oplysninger om kontraindikationer i brugervejledningen

Brug op til 30 min. to gange om dagen til lindring i 1-2 uger

- Korte behandlingstider, tre intensitetsniveauer
- Test det: 30-dages returret
- Opnå resultater inden for én til to uger

Styr behandlingen med en iOS-/Android-enhed

- Spor status for dine behandlinger i kalenderoversigt
- Brug behandlingsappen for at få fuld kontrol via en smart-enhed


PHILIPS

Appstyret pude til smertelindring

Innovativ blå LED-teknologi Mod muskelsmerter i ryggen, iOS- og Android-kompatibel, Med strop til nederste del af ryggen

Vigtigste nyheder


40 optimerede blå LED'er

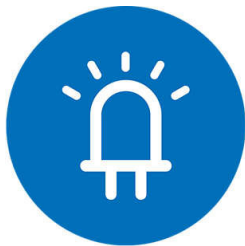

40x

BlueTouch-puden indeholder 40 blå LED'er, der skaber et terapeutisk lys. Blåt lys giver varme og stimulerer kroppens naturlige frigivelse af NO, som medfører øget blodgennemstrømning og derved forbedret næringsstof- og ilttilførsel samt fjernelse af metabolitter, så genopbygningen af de berørte muskler i behandlingsområdet understøttes.

Behagelig varme

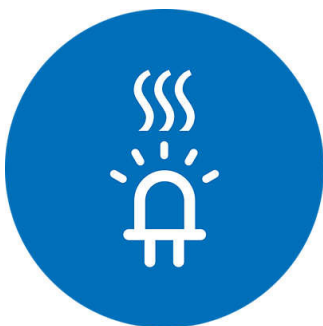

BlueTouch giver også gode resultater ved varme, som afslapper musklerne og lindrer smerte i ryggen, så brugeren får et bedre velbefindende.

Kontraindikationer

Brug ikke BlueTouch, hvis du har en af de kontraindikationer, som er angivet i brugervejledningen. Du kan finde den fulde oversigt i brugervejledningen. Eksempler: - Hvis du har en kendt solallergi - Hvis du er på steroider. Denne medicin gør huden mere

tilbøjelig til irritation - Hvis du har en implanteret medicinsk anordning (skrue etc.) i eller i nærheden af behandlingsområdet eller aktivt, implantabelt medicinsk udstyr som f. eks. pacemaker, defibrillator, neurostimulator, øresneglsimplantat eller enhed til administration af medicin noget sted i kroppen - Hvis du er gravid

Lindring af smerter i ryggen uden brug af medicin

Philips BlueTouch anvender varme og igangsætter naturlige helende processer med blåt lys for at lindre rygsmerter uden medicin.

Naturlig lindring af smerter i ryggen

Den største fordel ved behandling med blåt LED-lys skyldes dets naturlige karakter. Det blå lys stimulerer kroppens egne processer. Når det blå LED-lys rammer den menneskelige hud, frigives kroppens egen kvælstofilte (NO), og den transporteres til den muskel, der forårsager rygsmerter. Dette lille molekyle har en fantastisk effekt: naturlig lindring af rygsmerter.

Brug med gratis behandlingsapp



Philips BlueTouch styres med vores specialdesignede app for at gøre det nemt at vælge og styre din smertelindrende behandling. Behandlingsappen er tilgængelig til smartphone og tablet, og den er kompatibel med iOS 7 op til iOS 10 og med Android 4.4 KitKat op til Android 7.

PR3743/00


Behandlingsoversigt i kalender

Behandlingskalenderen er en del af behandlingsappen. Med et tryk på kalenderfunktionen får du en omfattende oversigt over din behandlingshistorik. Du kan bruge denne oversigt til at optimere din behandling for rygsmerter.

Anbefalet brug

Anbefalet brug 2 gange dagligt i op til 30 min. Opnå resultater inden for én til to uger.

Behandlingens varighed

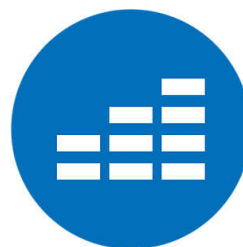

3x

Philips BlueTouch kan bruges op til 2 gange dagligt. Længden af hver behandling afhænger af det valgte intensitetsniveau. I tilstand 1 (blid) bør enheden bruges i højst 30 minutter, i tilstand 2 (middel) i 20 minutter og i tilstand 3 (intens) i 15 minutter pr. behandling. Du kan vælge intensitetsniveau efter eget skøn. De varierer med hensyn til lysintensitet og temperatur. Takket være virkningsmekanisme af det blå LED-lys kan BlueTouch bidrage til effektiv lindring af rygsmerter, når det bruges hver dag.

30 dages returret

Se selv, hvordan det fungerer, og test Philips BlueTouch! Prøv det i mindst to uger for at opnå den optimale virkning. Hvis du ikke er tilfreds, får du pengene tilbage inden for 30 dage efter købsdatoen.

Appstyret pude til smertelindring

Innovativ blå LED-teknologi Mod muskelsmerter i ryggen, iOS- og Android-kompatibel, Med strop til nederste del af ryggen

Specifikationer

Software

- iPhone®-kompatibilitet: Version iOS7 op til iOS10, iPhone® 4S og nyere
- iPad®-kompatibilitet: Version iOS7 op til iOS10, iPad® 3. gen., iPad Air™, iPad mini™ og nyere
- Android-kompatibilitet: Android 4.4 KitKat op til Android 7
- iPod®-kompatibilitet: Version iOS7 op til iOS10, iPod touch® 5. Gen. og nyere

Vægt og mål

- Vægt, BlueTouch: 0.168 kg
- Pudemål (B x H x D): 280 x 155 x 12,5 mm

Hvad følger med

- BlueTouch-pude til smertelindring
- Adapter
- Strop til den nederste del af ryggen

Anvendelsesområder

- Nedre ryg
- Mod muskelsmerter i ryggen

Specifikationer

- Nominel spænding: 100 V - 240 V
- Nominel frekvens: 50 - 60 Hz
- Nominel indgangseffekt: 15 W
- Class: Medicinsk udstyr i klasse IIa
- Klassificering: Risikogruppe 1
- Vandindtrængen: IP22
- Maks. daglig dosis: < 108,5 J/cm²
- Batteritype: Li-ion
- Bølgelængde, blå LED-lys: 453 nm

Anvendelse

- Tilstand 1 (lav): To gange dagligt i 30 min.
- Tilstand 2 (middel): To gange dagligt i 20 min.
- Op til to gange om dagen
- Tilstand 3 (høj): To gange dagligt i 15 min.



Udgivelsesdato
2023-03-02

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 73510 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (University Clinic Heidelberg, Tyskland), 24. tværfaglige kongres om smerteterapi og palliativ behandling, Frankfurt/Main, Tyskland, forelæsning den 7. marts 2013, om brugen af BlueTouch ved kroniske smerter i bevægeapparatet i ryggen.