

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 6100

Вбудований датчик тиску

3 режими, 3 рівні інтенсивності

2 функції BrushSync

Дорожній футляр



HX6877/68



Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтних конструкціях та полікованих зубах
- Відбілювання зубів лише за один тиждень

Створено для вас

- Заохочення до ретельного чищення
- Тепер подорожувати стало зручніше

Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

Чистіть зуби краще

- Три режими, три налаштування інтенсивності
- Насадки для щітки вибирають оптимальний режим та інтенсивність

Основні особливості

Природно біліші зуби



Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Персоналізоване чищення



Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам та трьом рівням інтенсивності. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен. Три рівні інтенсивності дозволяють змінювати послідовність налаштувань "вища" та "нижча" для відповідності рівням інтенсивності зліва направо.

Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Контроль натиску під час чищення



Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумну синхронізацію та розумне нагадування про заміну.

Синхронізація режиму та рівня інтенсивності




Не знаєте, який режим та інтенсивність використовувати? Без проблем. Функція синхронізації BrushSync повідомляє розумній ручці щітки, яку розумну насадку для щітки Ви використовуєте. Якщо встановити насадку для догляду за яснами, зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність для ясен. Потрібно лише натиснути кнопку живлення.

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

Корисні таймери

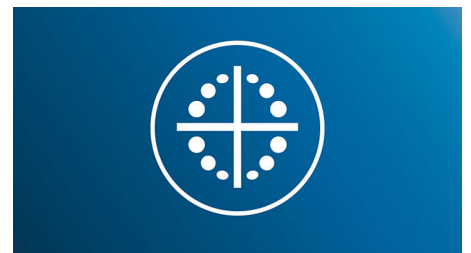

Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Сріблясто-білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Розпізнавання насадки для щітки: Синхронізація з оптимальним режимом

Час чищення: До 2 тижнів

Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Насадки для щітки: 1 W2 Optimal White

Ручка: 1 ProtectiveClean

Дорожній футляр: 1

Дезінфікуючий блок з УФ-лампою: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні, Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

3 рівні інтенсивності: Низький, Середній, Високий

Білий: Усуває поверхневі плями

Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна

Синхронізація BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Синхронізація з режимом чищення

G2 Optimal Gum Care: Синхронізація з режимом догляду за яснами

W2 Optimal White: Синхронізація з режимом відбілювання

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Технологія BrushSync: З'єднує розумну ручку та, розумна насадка для щітки

