



Philips goLITE BLU
EnergyLight

ricaricabile
adattatori internazionali



HF3330/01

Ricaricati di energia

Energia per tutto il giorno, in maniera naturale

La Philips goLITE BLU è una lampada compatta e portatile che produce luce blu simile a quella di un cielo estivo. È noto che questo tipo di luce consente di aumentare i livelli energetici quando se ne ha bisogno e di combattere la depressione invernale.

Comoda e facile da usare

- Touch screen retroilluminato per regolare timer e intensità luminosa
- Luci a LED durature
- Pratica, portatile e ricaricabile
- Per beneficiare degli effetti positivi, è sufficiente un utilizzo di 15-45 minuti al giorno
- Luce blu completamente priva di UV

Aumenta i livelli energetici e combatte la depressione invernale

- Aiuta ad alleviare i sintomi della depressione invernale
- Aiuta a superare la stanchezza da jet lag
- Consente di aumentare i livelli di energia
- Utilizza una particolare luce blu simile a quella di un cielo azzurro

Proven benefits

- Testata clinicamente* per migliorare l'umore e l'energia
- 100 anni di esperienza Philips nella tecnologia dell'illuminazione
- Una ricerca indipendente mostra un aumento del livello di energia presso i consumatori

PHILIPS

In evidenza

Luce blu naturale




La goLITE BLU EnergyLight produce un tipo particolare di luce blu pura che si forma naturalmente nelle giornate cristalline molto soleggiate. I ricettori speciali degli occhi assorbono questa luce blu che ti fa sentire pieno di energia quando serve.

Combatte la depressione invernale



Nei paesi con inverni lunghi, in molte persone si verifica perdita di energia e vitalità per la mancanza di esposizione alla luce. Questa condizione, che ha inizio in autunno e prosegue per diverse settimane, viene denominata depressione invernale. Philips goLITE BLU allevia in modo semplice e naturale tali sintomi e ripristina i livelli energetici e l'umore dell'estate.

Aumenta i livelli energetici

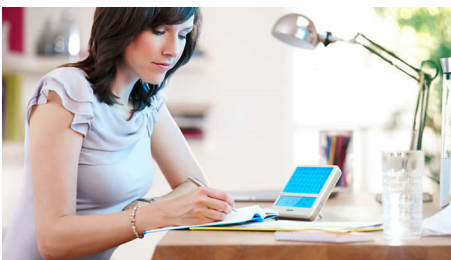

Il nostro stile di vita frenetico richiede molte energie e noi vogliamo essere sempre al top, sia al lavoro che nella vita privata. A volte, però, siamo giù di tono o perdiamo colpi durante la giornata. Utilizzando la goLITE BLU

EnergyLight in qualunque momento della giornata potrai aumentare il tuo livello di energia e di reattività in modo naturale.

Aiuta a combattere gli effetti del jet lag

Molte persone che viaggiano regolarmente, a seguito di voli di molte ore, possono subire gli effetti del jet lag. Utilizzando goLITE BLU ai primi segnali di stanchezza, riceverai una sferzata naturale di energia che potrà aiutarti a reimpostare l'orologio biologico del tuo corpo su un nuovo fuso orario.

È sufficiente un utilizzo di 15-45 minuti al giorno



Basta posizionare goLITE BLU entro il tuo campo visivo senza bisogno di guardare direttamente la luce. L'utilizzo di goLITE BLU EnergyLight per almeno 15 minuti produce un miglioramento naturale dell'umore e del livello di energia in qualunque momento tu ne senta il bisogno. L'utilizzo per periodi più lunghi è del tutto sicuro. Usalo ogni mattina durante i mesi freddi per alleviare i sintomi della depressione invernale.

Da utilizzare ovunque



Il design compatto, la custodia, la batteria ricaricabile e gli adattatori internazionali rendono la goLITE BLU facile da utilizzare, conservare e trasportare in ogni viaggio.

Timer e intensità regolabili



Imposta il timer in base alle tue esigenze (1 - 60 min) utilizzando il display tattile e scegliendo il giusto livello di luminosità tra i quattro disponibili mediante il dimmer. Imposta la sveglia per l'ora del trattamento; in questo modo sarai sicuro di non perdere la tua sessione di luce blu.

LED a lunga durata



I LED a lunga durata della goLITE BLU EnergyLight possono essere utilizzati per 30 minuti al giorno per 50 anni, senza perdere efficacia.

Senza UV



La luce blu pura incrementa naturalmente la tua energia come nelle giornate soleggiate, ma senza i raggi UV associati alla luce solare.

Specifiche

Specifiche tecniche

- Voltaggio: 100-240 V
- Assorbimento: 12 W
- Lunghezza cavo: 180 cm
- Isolamento: Classe II (doppio isolamento)
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di lampade: LED
- Durata delle lampade: 10.000 ore

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto: 14 x 14 x 2,5 cm
- Peso del prodotto: 0,4 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0.9 Kg
- Scatola principale: 2

Dati logistici

- Codice CTV: 884333001
- Paese di origine: Cina

Semplicità d'uso

- Pulsante on/off
- Touch screen retroilluminato
- Orologio integrato
- Funzione di pausa
- Allarme promemoria trattamento
- Timer durata trattamento: 0-60 min

Luce confortevole

- Gruppo ottico a diffusione avanzata
- Ampia area di trattamento
- Regolatore di intensità luminosa: Sì, 4 livelli
- Speciale luce blu

Apparecchio Medicale

- Direttiva per dispositivi medicali: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Portatile

- Design piccolo e compatto
- Batteria ricaricabile interna
- Astuccio protettivo in dotazione
- Adattatori di alimentazione internazionali

Benessere con l'aiuto della luce

- Combatti la depressione invernale
- Combatti il jet lag
- Aumenta la reattività
- Aumenta il livello di energia

Sicurezza e normative

- Non per l'illuminazione generale
- Protezione UV: Radiazioni UV assenti o minime
- Conforme a IEC 60601-1 Ed. 3
- Certificata CE 0344



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12