

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

ProtectiveClean  
4300

Senzor de presiune integrat

1 mod de curățare

1 funcție BrushSync



HX6801/04



## Dinți mai curați. În mod delicat.

Elimină până la de 7 ori mai multă placă decât o periuță manuală

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, îndepărtând în același timp până la de 7 ori mai multă placă bacteriană comparativ cu o periuță de dinți manuală

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuță de dinți manuală
- Sigură și delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice și dentare

### Concepute pentru tine

- Programul cu pornire ușoară îți creează treptat rutina Philips Sonicare
- Încurajare pentru un periaj temeinic
- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere

### Tehnologie inovatoare

- Te anunță dacă apeși prea tare
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente

# Repere

## Spune adio plăcii bacteriene



Perii deși, de înaltă calitate îndepărtează de 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală. În plus, vârful curbat special îți permite să ajungi cu ușurință la dinții din partea din spate a gurii.

## Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

## Tehnologie sonică unică



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

## Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, te va anunța printr-un indicator luminos pe mâner și un semnal sonor scurt. Astfel, poți avea siguranța că obții rezultate optime de la capul de periere.

## Monitorizează-ți presiunea de periere



Periajul prea intens îți poate deteriora dinții și gingiile. Pentru a preveni acest lucru, Philips Sonicare ProtectiveClean emite un sunet intermitent delicat pentru a-ți reaminti să reduci presiunea.


## Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul

de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

## Obişnuieşte-te cu noua ta rutină

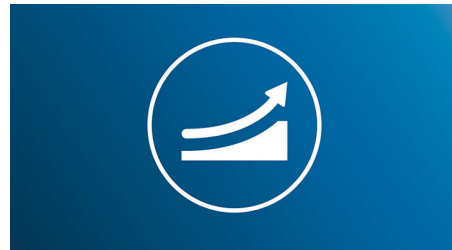

Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. Programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

## Cronometre utile



Ai nevoie de o periuță de dinți electrică dotată cu cronometru? QuadPacer te anunță când ai acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce SmarTimer te înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

# Specificații

**Alimentare**

Tensiune: 110-220 V

**Specificații tehnice**

Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): 14 zile\*\*

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

**Design și finisaj**

Culoare: Albastru închis

**Service**

Garanție: 2 ani garanție limitată

**Ușor de utilizat**

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Mâner: Design ergonomic subțire

**Articole incluse**

Mâner: 1 ProtectiveClean

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 cap C2 Optimal Plaque Defense

**Performanță de curățare**

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

**Moduri**

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

2 intensități: Redusă, Ridicată

**Tehnologie cu senzori inteligenți**

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Încetează când perierea este prea intensă



\* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală  
\* \*\*pe baza a două perieri de câte două minute pe zi