

Philips
Ébresztőfény

Természetes hangok
és FM rádió

HF3470/01



Ébredjen természetesen

a Wake-up Light ébresztőfény fokozatos ébredést biztosít Önnek

A Wake-up Light ébresztőlámpa a fényterápia és hang egyedülálló kombinációjával gyengéd és természetes módon ébreszti fel, így készen állhat a nap kihívásaira. Mostantól az ébredés kellemes élmény lesz.

Egyszerű használat

- A készüléket éjjeli lámpaként is használhatja kellemes olvasáshoz
- Cserélhető halogénlámpa

Bizonyítottan kedvező hatás

- A Philips 100 éves világítástechnikai tapasztalata
- Klinikailag bizonyított, hogy ébredése sokkal kellemesebb a használatával
- A kutatás szerint a készülék használói könnyebben kelnek ki az ágyból.

A finoman erősödő fény és hang fokozatosan ébreszt

- Válasszon a 2 természetes ébresztési hang közül
- Akár 250 Lux a természetes ébredésért
- Az enyhe ébresztőfény fokozatosan ébreszt

PHILIPS

Fénypontok

A fény fokozatosan ébreszt



Az ébresztőlámpa fényintenzitása fokozatosan erősödik a beállított ébresztési időpontot megelőző 30 perc folyamán. A szem érzékeli a fényt, mely növeli a test energiaszintjét, felkészítve a testet az ébredésre. Az ébredés ezáltal kellemesebbé válik.

250 Lux fényintenzitás



Az emberek fényérzékenysége különböző lehet. Általában, magasabb fényintenzitás mellett kevesebb időre van szüksége egy embernek az ébredéshez. Az ébresztőlámpa fényintenzitását akár 250 luxra is állíthatja. Olyan fényintenzitást állíthat be, amely az Ön számára a leginkább megfelelő.

Természetes ébresztőhang (2)




A beállított ébresztési időpontban megszólal egy természetet idéző hang vagy a kiválasztott rádióállomás. Halkan kezdődik, majd másfél perc után éri el a kiválasztott hangerőszintet. Két hang közül választhat: reggeli madárhangok és sípoló hang. A fokozatosan emelkedő hangerő kellemesebbé teszi az ébredést, így biztosítva a nyugodt reggeleket.

Éjjeli lámpa



A 20 különböző fényerőbeállításnak köszönhetően éjjeli lámpaként is használható

Cserélhető halogénlámpa

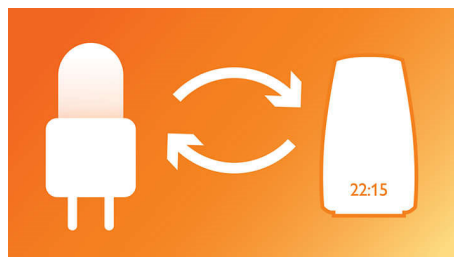

Az ébresztőlámpa egy cserélhető halogénlámpa használatával képes a természetes napfelkelte szimulálására.

Független kutatás



A Független kutatás* szerint 10-ből 8 ébresztőfény-tulajdonos könnyebben kel fel. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011; n=209

Klinikailag bizonyított



Klinikailag bizonyított, hogy fényre ébredni kellemesebb.

A Philips szakértelme



Mindezt a Philips biztosítja Önnek, amely több mint 100 éve vezető szerepet tölt be a fényterápia technológia terén.

Műszaki adatok

Hang

- FM-rádió
- Ébresztő hangjelzések száma: 2

Műszaki adatok

- Tápellátás: 85 W
- Feszültség: 230 V
- Kábel hossza: 200 cm
- Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)
- Frekvencia: 50 Hz
- Lámpák típusa: Philips halogénlámpa 50 W, 12 V, GY6.35
- Lámpák élettartama: várható > 4000 óra
- Szigetelés - hálózati adapter: nincs
- Kimeneti teljesítmény - adapter: nincs

Tömeg és méretek

- Termék méretei: 25,2 (magasság) x 17,0 (átmérő) cm
- Termék tömege: 1,45 kg
- Doboz méretei (Sz x MaxMé): 19,5 x 30 x 19 (Sz x MaxMé) cm
- Box weight: 1.7 kg
- Származási hely: Kína
- Tápkábel csatlakozó tömege: nincs

Biztonság

- Cenelec tanúsítvánnyal rendelkezik
- UV-sugárzásmentes: UV-sugárzásmentes

Egyszerű használat

- Ébresztési tesztfunkció
- Csúszásmentes gumi lábak
- iPhone/ iPod Touch töltéséhez: Nem
- Szabályozható fényerejű kijelző: 4 beállítás
- Szundítás típus: Szundítás gomb
- Gyári demó funkció
- Ébresztési időpontok száma: 1
- Szundítás gomb a hangjelzésekhez: 9 perc
- Vezérlés iPhone/ iPod alkalmazással: Nem

Fény

- Fény be- és kikapcsolási funkció

Fényből fakadó egészség

- Éberség növelése
- Fokozatos ébresztés

Természetes fény

- Napfelkeltét szimuláló folyamat: 30 perces
- Fényerő beállításai: 20
- Színes napfelkelte-szimulálás: Nem, egyszerű sárga
- Fényintenzitás: 250 Lux
- Napnyugta-szimulálás: Nem

Biztonság és előírások

- UV-sugárzásmentes: UV-sugárzásmentes
- Nem általános világításhoz
- Hogy a fénnel ébredhessen



Kiadás dátuma
2022-12-31

Verzió: 3.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993; Gordijn, M. et al. Universiteit van Groningen, 2007