

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

FlexCare Platinum

3 programy, 3 poziomy
intensywności

2 końcówki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

HX9112/02



Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi nacisku i zaawansowanej technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne czyszczenie, aby zapewnić niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie
- Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty
- Długa żywotność akumulatora oraz futerał podróżny
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz

Doskonałe czyszczenie

- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie
- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare*

Zoptymalizuj czyszczenie

- Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności


Zalety

Usuwać do 7 razy więcej płytki nazębnej




Nałóż główkę szczoteczki InterCare, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Bardzo długie włosie pozwala dbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach.

Zadbaj o dziąsła

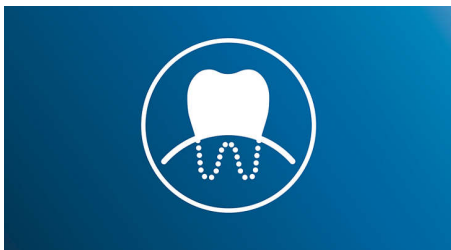

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczka FlexCare dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach. Usuając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

3 programy i 3 ustawienia intensywności

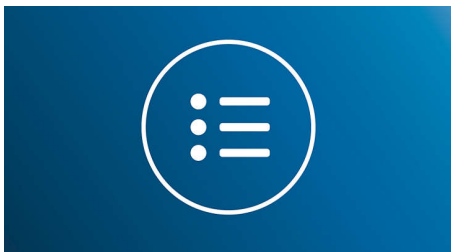

Szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia prawdziwie głębokie czyszczenie. 3 ustawienia intensywności pozwalają dokładniej wyczyścić zęby, a 3 programy zaspokoją określone potrzeby w zakresie szczotkowania. Program Clean zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, program White usuwa przebarwienia, a program Deep Clean doskonale sprawdza się w dokładnym szczotkowaniu.

Zbyt duży nacisk?




Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka FlexCare Platinum na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt mocno będziesz dociskać szczoteczkę, rączka zacznie delikatnie pulsować. Jest to przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i pozwolić główce szczoteczki wykonać całą pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji lepiej szczotkuje zęby.

Technologia Philips Sonicare



Wibracje soniczne przekształcają pastę do zębów i ślinę w mikrobąbelki oraz kierują je głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W tym samym czasie zęby są poddawane 62 tys. delikatnych, a jednocześnie efektywnych ruchów szczotkujących. 2 minuty takiego szczotkowania odpowiadają miesięcznemu korzystaniu ze zwykłej szczoteczki.

QuadPacer i SmarTimer

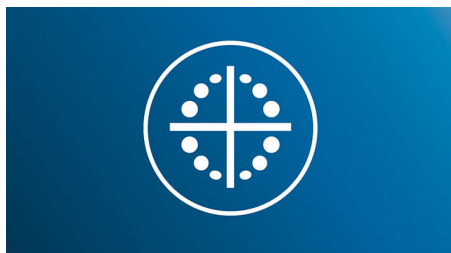

Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2 minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa optymalny czas przeznaczony na

szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje upływanie łącznego czasu. Razem pomagają w szczotkowaniu zębów przez zalecany czas — za każdym razem.

Szczotkuj bez obaw



Niezależnie od Twoich konkretnych potrzeb, możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki FlexCare Platinum jest bezpieczne. Nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Można z niej korzystać w codziennej terapii chorób dziąseł.

Zaprojektowano z myślą o Twoim stylu życia



Wysokiej jakości futerał podróżny umożliwia higieniczne przechowywanie szczoteczki do zębów, a kompaktowa ładowarka podróżna pozwala doładować urządzenie, gdy przebywasz poza domem. Jedno pełne ładowanie wystarcza na regularne użytkowanie przez dwa tygodnie, więc nawet gdy jesteś w podróży, nie musisz rezygnować z uczucia świeżości.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 FlexCare Platinum

Końcówki szczoteczki: 1 InterCare — standardowa, 1 InterCare — mała

Etui podróżne: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i Smartimer

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

