

PHILIPS

IPL sistem za
uklanjanje dlačica

Lumea Comfort

Za primenu na telu i licu

22 minuta za tretman donjih
delova nogu

Vek trajanja > 100.000
svetlos. impulsa

Kompaktan dizajn s kablom

SC1981/00



Kompaktno IPL rešenje

za sprečavanje ponovnog rasta dlačica i glatku kožu

Sistem za uklanjanje dlačica Philips Lumea Comfort IPL čini čuda da bi sprečio ponovni rast dlačica kako na licu tako i na telu. Kada se redovno primenjuju, nežni svetlosni impulsi čine kožu glatkom svakog dana.

Dugotrajna glatkoća

- Efikasna bez muke
- Uživajte u glatkoj koži svakoga dana

Uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Prilagođena za bezbednu upotrebu u udobnosti vašeg doma

Najkompaktniji Lumea dizajn


- Nema rezervnih delova, nema skrivenih troškova
- Najmanji i najlakši uređaj iz Lumea asortimana

Bezbedna i efikasna primena na licu i telu

- Pet podesivih postavki svetlosne energije
- Bezbedna i efikasna primena čak i u osetljivim područjima
- Senzor boje kože
- Režim klizanja i blicanja za uobičajeniju primenu
- Pogodno za različite tipove kose i kože

Važne karakt.

Uživajte u glatkoj koži svakoga dana

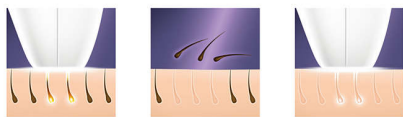

Philips Lumea deluje nežnim impulsima svetlosti na koren dlačice. To dovodi do prirodnog opadanja dlačica i onemogućava njihov ponovni rast. Redovno ponavljanje ovog tretmana učiniće vašu kožu glatkom svakoga dana.

Efikasna bez muke

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Naše kliničke studije pokazale su značajno smanjenje broja dlačica već posle četiri tretmana na dve nedelje uz glatku kožu bez dlačica kao rezultat. Da biste održali ove rezultate, jednostavno ponovite tretman kada je to potrebno. Vreme između tretmana može se razlikovati u zavisnosti od vašeg individualnog ponovnog rasta dlačica. —, da biste uvećali ovu sliku, kliknite na sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Tehnologija IPL



Philips Lumea Comfort koristi inovativnu tehnologiju zasnovanu na svetlosti pod nazivom IPL (intenzivno pulsirajuće svetlo, engl. intense pulsed light), izvedenu iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima lepote. Philips je prilagodio ovu tehnologiju radi efikasnog korišćenja u bezbednim uslovima i udobnosti vašeg doma.

Philips je tesno sarađivao sa stručnjacima za kožu pri razvoju ove tehnologije. Duže od 10 godina Philips je obavljao detaljno ispitivanje potrošača o tehnologiji IPL u kojem je učestvovalo preko 2000 žena.

Pogodni tipovi kose i kože

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Black	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark brown	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medium brown	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light brown	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark blonde	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Red	Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark brown	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medium brown	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light brown	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark blonde	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Red	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark brown	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medium brown	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light brown	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark blonde	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Red	Dark	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Philips Lumea Comfort efikasno deluje na (prirodno) tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama. Kao što je slučaj i sa drugim tretmanima na bazi svetlosti, uređaj Lumea Comfort NIJE efikasan na crvenim, svetloplavim ni belim/sedim dlačicama. —, da biste uvećali ovu sliku, kliknite na sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Područja primene



Upotrebite ga bez brige za uklanjanje dlačica s lica (gornja usna, brada) i delova tela, među kojima su noge, pazusi, bikini zona, stomak i ruke.

5 postavki svetlosti



Philips Lumea Comfort ima pet podesivih postavki svetlosne energije da bi osigurao nežan, ali efikasan tretman. Ako se koristi

ispravno, IPL tretman pomoću uređaja Philips Lumea je bezbedan i nežan čak i na osetljivoj koži i osetljivim delovima tela.

Senzor boje kože



Jedinstveni senzor boje kože meri nijansu kože na početku svake sesije i povremeno tokom sesije. Ako detektuje nijansu kože koja je previše tamna za uređaj Lumea Comfort, automatski će prekinuti emitovanje impulsa.

Režim klizanja i blicanja



Lumea Comfort omogućava pokret klizanja za praktičniju i neprekidnu primenu.

Najmanja i najlakša Lumea

Philips Lumea Comfort je najmanji i najlakši uređaj u Lumea asortimanu. Lako ga je držati i omogućava lak pristup svim područjima koja želite da tretirate.

Nema potrebe za rezervnim delovima



Philips Lumea Comfort je kompletno rešenje koje se isporučuje u stanju spremnom za rad odmah čim ga izvadite iz kutije. Štaviše, nisu mu potrebne nikakve rezervne sijalice ni gelovi.

Specifikacije

Područja primene

Delovi tela: Ruke, Noge, Stomak, Bikini zona, Pazusi

Delovi lica: Brada, Zulući, Gornja usna

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Senzor nijanse kože: Detektuje nijansu kože

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za primenu uz lagane pokrete

Korak i blicanje: Za tretman oblih područja

Na baterije / preko kabla: S kablom

Napajanje

Napon: 100–240 V

Tehničke specifikacije

Lampa visokih performansi: Kapaciteta preko 100.000 bljesaka

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Vodič za brzi početak, Koris. prir.

Adapter: 12V / 1500mA

Vreme primene

Potkolenica: 11 min

Pazuhi: 1,5 min

Bikini zona: 1,5 min

Delovi lica: 2,5 min

