



Philips Lumea for Men
IPL-
Haarentfernungssystem

Verhindert das Nachwachsen von
Haaren

Mit SmartSkin Sensor
Akku- und Netzbetrieb
Bodyroom im Lieferumfang



BG9040/04

Dauerhafte Haarentfernung

mit Intense Pulsed Light-Technologie (IPL)

Philips Lumea verwendet die Intense Pulse Light-Technologie (IPL) für die sichere und langfristige Haarentfernung. Diese effiziente Innovation, die auch in professionellen Salons verwendet wird, verhindert das Nachwachsen der Haare an der Wurzel und ist ideal für die Verwendung zu Hause geeignet.

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- SmartSkin Sensor mit 5 Einstellungen
- Akku- und Netzbetrieb
- Eine Haarentfernungslösung ohne versteckte Kosten

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie

- Professionelle Haarentfernungstechnologie für zu Hause
- Für den sicheren Gebrauch am ganzen Körper
- IPL-Haarentfernung für Männer
- Langanhaltend glattere Haut
- Behandelt effizient große Bereiche
- Haarentfernung für unterschiedliche Haar- und Hauttypen

Mit Bodyroom

- Vorbehandlung mit dem Bodyroom
- Hautfreundlicher Bodyroom im Lieferumfang enthalten, 100 % wasserfest

PHILIPS

IPL-Haarentfernungssystem

Verhindert das Nachwachsen von Haaren Mit SmartSkin Sensor, Akku- und Netzbetrieb, Bodyroom im Lieferumfang

Besonderheiten

Dauerhafte Haarentfernung


Philips Lumea for Men wurde gemeinsam mit Hautexperten und Dermatologen entwickelt und nutzt innovative lichtbasierte Technologie (IPL), um den Wachstumszyklus eines Haars zu durchbrechen. Eignet sich für den sicheren Gebrauch zu Hause. Eine Behandlung inaktiviert sanft Ihre Haarfollikel, sodass Sie länger haarfrei bleiben.

Körperbereiche für die Anwendung



Philips IPL for Men wurde mit führenden Dermatologen für die sichere, effiziente und sanfte Anwendung an den Armen, unter den Achseln, an den Schultern, am Bauch, im Schambereich (mit Ausnahme des Hodensacks), an den Beinen, an der Brust und am Rücken entwickelt.

Vorbereitung mit dem Bodyroom

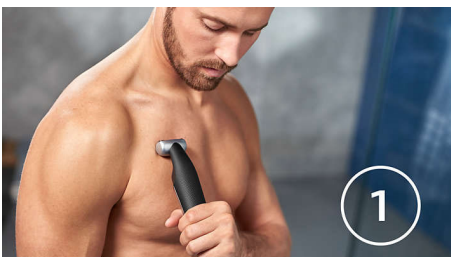

Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur von Achselhöhlen, Brust, Bauch, Rücken,

Schultern, Intimbereich und Beinen entwickelt. Der hautfreundliche Rasierer erfasst und schneidet Haare unterschiedlicher Länge, ohne dass andere Produkte notwendig wären oder scharfe Klingen die Haut berühren.

So wenden Sie Lumea an



1. Wenden Sie Philips Lumea bei den ersten 4 bis 5 Behandlungen alle 2 Wochen im gewünschten Bereich an 2. Zwischen den Behandlungen fallen die Haare auf natürliche Weise aus und Sie bemerken einen langsameren Nachwuchs 3. Verwenden Sie Lumea nach dem ersten Behandlungszyklus einmal alle 4 bis 8 Wochen, um glatte Ergebnisse zu erzielen.

Genießen Sie das sichere Gefühl



Philips Lumea nutzt eine innovative, auf Licht basierende Technologie namens IPL, um den Haarwachstumszyklus zu unterbrechen. Dabei werden sanfte Lichtblitze auf die Haarwurzeln angewendet. Dies führt nach mehreren Behandlungen dazu, dass die Haarfollikel nicht mehr aktiv werden.

BG9040/04

SmartSkin Sensor



Tipps zu automatischen Einstellungen basierend auf dem eigenen Hautton.

Slide & Flash Modi



IPL-Haarentfernung für Männer verfügt über ein großes Behandlungsfenster von 4,1 cm². Der Slide & Flash-Modus ermöglicht eine schnelle Behandlung großer Körperpartien.

Akku- und Netzbetrieb



Philips Lumea for Men ist ein IPL-Gerät, das für umfassenden Komfort entwickelt wurde. Es kann kabellos verwendet werden, um volle Bewegungsfreiheit zu ermöglichen oder für eine Behandlung ohne Unterbrechung an das Stromnetz angeschlossen werden.

IPL-Haarentfernungssystem

Verhindert das Nachwachsen von Haaren Mit SmartSkin Sensor, Akku- und Netzbetrieb, Bodygroom im Lieferumfang

Daten

BG9040/04

Technische Daten der Aufsätze

- Aufsatz zur Behandlung am Körper: Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Form: konvex geschwungen, Lichtenergie: 22,96 J, Lichtspektrum > 565 nm

Technische Daten

- High Performance-Lampe: Bietet > 250.000 Lichtimpulse

Leistung

- Spannung: 100-240 V

Artikel enthalten

- Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung
- Adapter: 19,5 V/4.000 mA
- Bodygroom: Vorbehandlung mit dem Bodygroom

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Anwendungsbereiche

- Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

- Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht
- 5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar
- Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse
- Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton
- SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungsmodus

- Slide and Flash: Für eine schnelle Anwendung
- Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel und kabellos verwendbar
- Manuell und automatisch: Für die Behandlung kleiner Bereiche



Ausstellungsdatum
2022-07-12

Version: 2.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com