

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6803/03



## Saubere Zähne. Ganz sanft.

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 7x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

### Für eine gute Mundgesundheit

- Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher
- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest

### Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Mit der speziell gebogenen Aktivspitze kommen Sie außerdem einfacher an die Zähne im hinteren Mundbereich.

## Sicher und sanft




Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

## Die einzig wahre Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Überwachen deinen Putzdruck

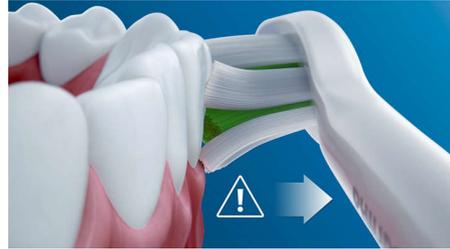

Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

## BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

## BrushSync Erinnerungsfunktion




Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

## Starten Sie einfach Ihre neue Routine

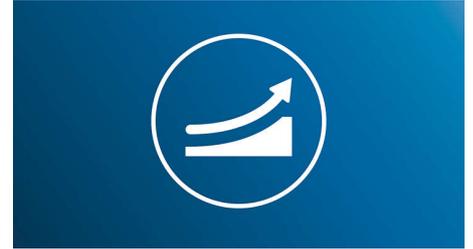

Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

## Hilfreiche Timer

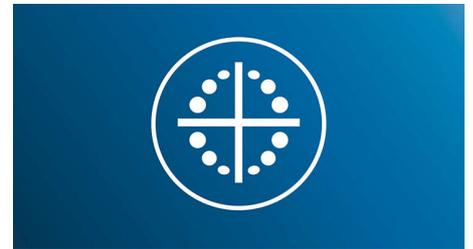

Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

## Handliches Reiseetui und Ladegerät



In unserem hochwertigen Reiseetui kannst du deine Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht dir auch unterwegs nie der Strom aus. Du kannst die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Hellblau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Bürstenköpfe:** 1 x C2 Optimal Plaque Defense

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

**Reiseetui:** 1

## Reinigungsleistung

**Leistung:** Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert

Kariesbildung

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**2 Intensitätsstufen:** Niedrig, Hoch

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

