

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean
4500

Zabudovaný tlakový senzor

2 režimy čištění

1 x funkce BrushSync



HX6888/89



Zdravější dásně. Šetrné čištění.

Až o 100 % zdravější dásně v porovnání s manuálním kartáčkem

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň budete mít až o 100 % zdravější dásně, než při používání manuálního kartáčku.

Designed around you

- Motivace k důkladnému čištění

Innovative technology

- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co neúčinněji
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Improves patients' oral health

- Plomby, korunky nebo citlivá místa? Žádný strach.

Optimize your brushing

- Režimy Clean a Gum Care

Designed around your patient

- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček


Přednosti

Zlepšuje zdraví dásní



Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.

Režimy Clean a Gum Care

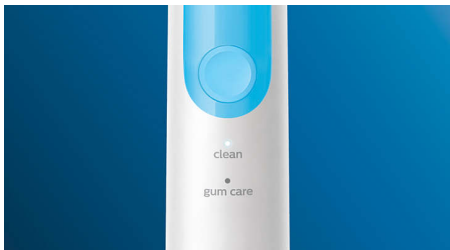

Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo na zdraví svých dásní, tento kartáček má režimy přesně pro vás: Režim Clean se stará o vynikající čištění, zatímco režim Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším výkonu pro jemnou masáž dásní.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Příliš velký tlak?




Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Automatické upozornění na potřebu výměny

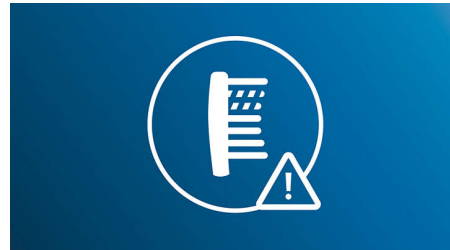


Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že jejich kartáčková hlavice bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

Užitečné časovače



Hledáte elektrický kartáček s časovačem? Zatímco náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištěním každé jednotlivé části úst, časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Program Easy-start

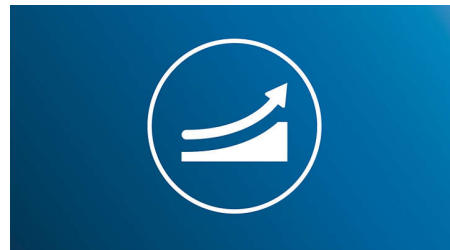

Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykne. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Bílá a polomodrá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Balení obsahuje

Tělo kartáčku: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 hlavice InterCare ic, kompaktní velikost

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

Clean: Pro výjimečně každodenní čištění

Péče o dásně: Jemně masíruje dásně

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

