

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ヘルシー
ホワイト

HealthyWhite

3つのモード

ブラシヘッド3本付属

HX6753/32



より自然に白い歯へ

自然な白い歯のための歯ブラシ

白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。

お口の健康を推進

- フィリップス ソニックケア歯ブラシで歯に自然な白さを
- 手磨きより多くの歯垢を除去

使いやすさ重視の設計

- タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ
- ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

新機能

- 音波水流で歯間の歯垢を除去


特長

歯垢をしっかり除去



密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

ステインを除去し自然な白い歯へ

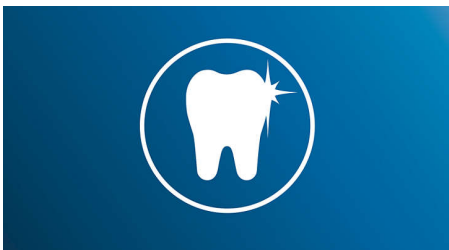


フィリップス ソニックケア電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす




お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とします。

タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ

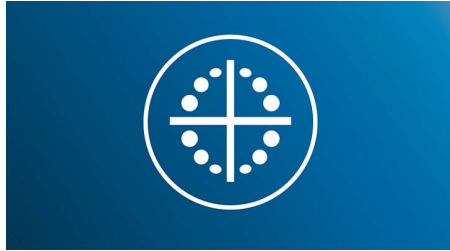

約2分間で歯をしっかりと磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能

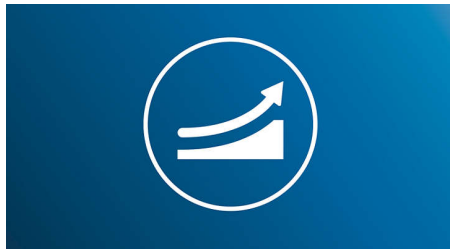

フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

音波水流で歯間の歯垢を除去



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約3週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン、握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約3週間**

内容・付属品

ブラシヘッド: プロリザルトブラシヘッド2本, センシティブ（レギュラー）1本

充電器: 1

ハンドル: ヘルシーホワイト1本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

クリーン&ホワイト: クリーン（2分間）+ ホワイト（30秒間）

* クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

** クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

