

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

FlexCare Platinum

3 moduri, 3 intensități

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

HX9112/02



Curățare excepțională între dinți

Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinți*

Cu nouă opțiuni unice de periere, un senzor de presiune intuitiv și tehnologie avansată a capului de periere, Philips Sonicare FlexCare Platinum depășește granițele curățării tradiționale pentru a oferi o îndepărtare excepțională a plăcii bacteriene și o sănătate îmbunătățită a gingiilor.

Proven to improve oral health

- Îmbunătățește starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni
- Sigur și delicat pentru cerințele tale în materie de igienă orală

Concepute pentru tine

- Cronometrele încurajează un periaj riguros de 2 minute
- Durată mare de viață a bateriei și toc de transport
- Te avertizează dacă apeși prea tare

Îți oferă curățare superioară


- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată
- Îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană cu capul de periere InterCare*

Optimizează periajul

- Alege din 3 moduri și 3 setări de intensitate

Repere

Îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

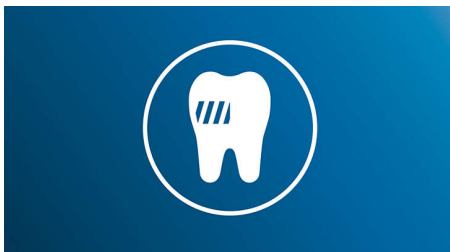


Atașează capul de periere InterCare pentru a îmbunătăți sănătatea gingiilor în doar 2 săptămâni. Perii foarte lungi îndepărtează mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile și din spațiile interdentare, pentru gingii sănătoase.

Îngrijește-ți gingiile



Grație curățării optime asigurate de FlexCare, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuță de dinți manuală, vei beneficia de cel mai sănătos zămbet.


3 moduri și 3 setări de intensitate

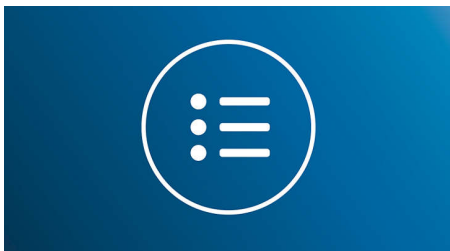

Cu FlexCare Platinum, vei beneficia de o curățare în profunzime. Cele 3 setări de intensitate îți permit să crești puterea de curățare, iar cele 3 moduri îți îndeplinesc nevoile specifice: modul Clean – pentru curățare zilnică superioară, modul White –

pentru îndepărtarea petelor de suprafață și modul Deep Clean – pentru curățare zilnică de excepție.

Prea multă presiune?

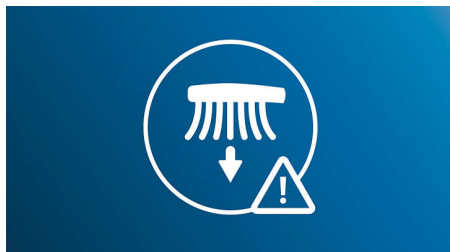

Se poate să nu observi că îți periezi dinții prea apăsat, dar FlexCare Platinum va detecta presiunea excesivă. Dacă aplici o presiune prea mare, mânerul va pulsa ușor, amintindu-ți să reduci presiunea și să lași capul de periere să-și facă treaba. 7 din 10 persoane au considerat că această funcție i-a ajutat să își perieze dinții mai eficient.

Tehnologie Philips Sonicare



Vibrațiile sonice transformă pasta de dinți într-o spumă care combate placa bacteriană și care pătrunde adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei. În același timp, dinții vor fi curățați prin 62.000 de mișcări de periere delicate și totuși eficiente. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.

QuadPacer și Smartimer



Un spălat riguros pe dinți durează doar 2 minute. Cronometrul QuadPacer îți arată când ai petrecut durata optimă de timp în fiecare zonă a gurii, în timp ce SmarTimer indică scurgerea timpului total. Împreună te ajută să atingi timpul recomandat de periere, de fiecare dată.

Periază-ți dinții cu încredere



Indiferent de nevoile tale, FlexCare Platinum îți garantează o experiență sigură de periere a dinților. Tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare și poate fi chiar folosită la tratamentul zilnic al afecțiunii gingivale.

Proiectat pentru stilul tău de viață



Tocul nostru premium de transport îți permite să depozitezi igienic periuța de dinți, în timp ce încărcătorul compact de voiaj menține bateria încărcată în timpul deplasărilor. Vei beneficia de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare, pentru a nu pierde acea senzație de prospețime în timpul călătoriilor.

Specificații

Design și finisaj

Culoare: Gri platinat

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Afișaj: Afișaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Articole incluse

Mâner: 1 FlexCare Platinum

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 InterCare standard, 1

InterCare compact

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană*

Senzor de presiune: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Ajută la îndepărtarea naturală a petelor

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

3 intensități: Redusă, Medie, Ridică

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

Gum Care: Masează delicat gingiile

