

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
sonico con app

DiamondClean  
Smart

Coaching personalizzato

Sensori intelligenti della testina

Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9901/63



## Il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa

### Ottieni la sicurezza di una pulizia completa

DiamondClean Smart è il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa. La testina ad alte prestazioni ti permette di dedicarti a tutti gli aspetti della tua igiene orale, mentre la tecnologia Smart Sensor ti consente di ricevere feedback e coaching personalizzati.

#### **Proven to improve oral health**

- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda

#### **Coaching personalizzato per una pulizia perfetta**

- Ti aiuta nello spazzolamento e ti segnala le zone trascurate
- Indica eventuali punti trascurati per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Ti aiuta a ridurre lo sfregamento

#### **Pulizia ottimale**

- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali
- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità


# In evidenza

## Puoi dire addio alla placca




Inserisci la testina C3 Premium Plaque Control per provare la nostra pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia\*\*\* e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere\*.

## Non tralasciare nessun punto

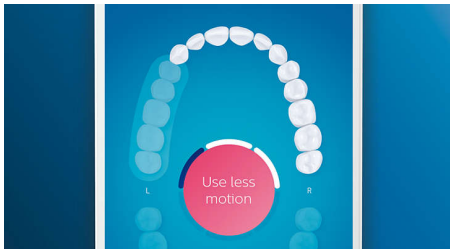


Grazie all'app Philips Sonicare saprai quando hai raggiunto una pulizia profonda e riceverai istruzioni per spazzolare in maniera più consapevole.

## Funzione TouchUp

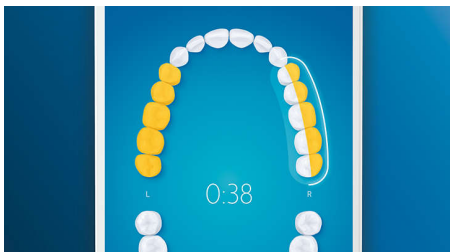


Se durante la pulizia dei denti ti capita di tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

## Promemoria intelligente per la sostituzione della testina

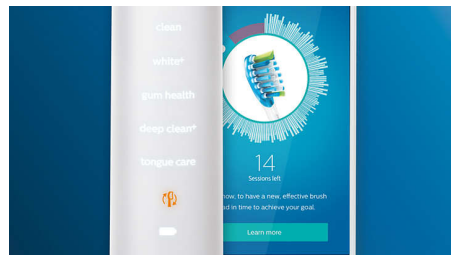


Le testine si usano nel tempo e diventano meno efficaci nel rimuovere la placca. Grazie al riconoscimento intelligente della testina saprai sempre quando è necessario sostituire la testina. Il tuo spazzolino monitora per quanto tempo e con quale intensità hai utilizzato ciascuna testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. È inoltre possibile monitorare la durata delle testine nell'app Philips Sonicare e persino ordinare testine di ricambio, così non resterai mai senza.

## Zone specifiche e obiettivi

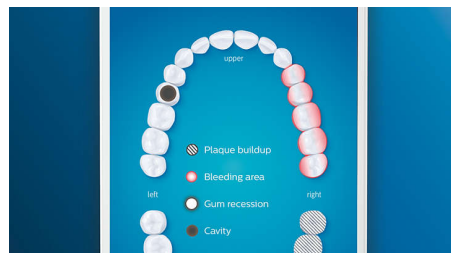

Il tuo dentista ha segnalato zone problematiche? Le indicheremo nell'app sulla mappa in 3D del cavo orale e ti ricorderemo di prestare particolare attenzione a queste zone.

## Pressione eccessiva?

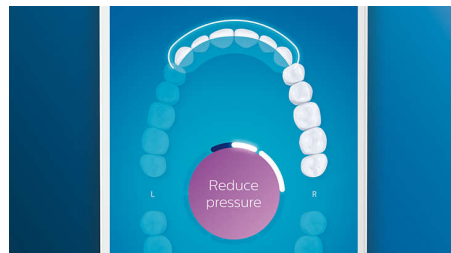

Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del


manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

## Detto fatto



Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo creato un sensore nel manico che ti ricorda di ridurre lo sfregamento. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ed efficace.

## Associazione con modalità BrushSync

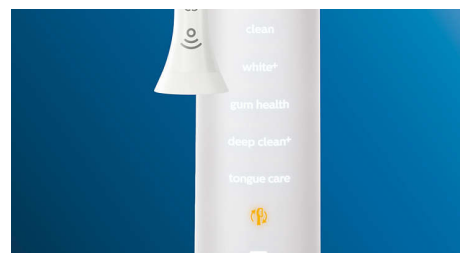

Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. Un microchip nella testina indica a DiamondClean Smart quale stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per ottenere una pulizia delle gengive delicata ma efficace. Ti basterà premere il pulsante di accensione.

# Specifiche

## Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

## Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

## Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Rose gold

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo

## Facilità d'uso

**Indicatore di stato della batteria:** L'icona illuminata indica la durata della batteria

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Display:** Display illuminato

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Riconoscimento della testina:** Si sincronizza con la modalità ottimale

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

## Accessori inclusi

**Testine:** 1 C3 Premium Plaque Defence

**Manico:** 1 DiamondClean Smart

**Caricatore in vetro:** 1

**Base di ricarica:** 1

## Prestazioni di pulizia

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Benefici per la salute:** Per migliorare le condizioni delle gengive

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:** L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

**TouchUp:** Garantisce il 100% di copertura

## Modalità

**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molari

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Sensore di localizzazione:** Monitora e migliora la copertura

**Sensore di spazzolamento:** Guida per ridurre lo sfregamento

**Mappa 3D del cavo orale:** Indica le zone problematiche

**TouchUp:** Per tornare sui punti trascurati



\* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

\*\* rispetto a uno spazzolino manuale utilizzato con un dentifricio sbiancante leader di categoria

\*\* rispetto a DiamondClean

\*\*\*\*dopo 2 settimane in modalità Gum Health, rispetto a uno spazzolino manuale

\*\*\*\*dopo 3 giorni di utilizzo in modalità White+ rispetto a uno spazzolino manuale

\*\*\*\*sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard