



Philips Lumea for Men
Épilateur à lumière pulsée

Prévient la repousse des poils

Avec capteur SmartSkin
Utilisation avec ou sans fil
Tondeuse corps incluse



BG9040/04

Épilation longue durée

avec technologie de lumière pulsée (IPL)

Grâce à la technologie de lumière pulsée (IPL) de l'épilateur Philips Lumea, votre peau reste lisse sur le long terme, en toute sécurité. Cette innovation efficace provenant des instituts de beauté évite la repousse des poils à la racine. Convient à une utilisation domestique.

Liberté absolue, contraintes minimales

- Capteur SmartSkin avec 5 réglages
- Utilisation avec ou sans fil
- Une solution d'épilation sans coûts cachés

Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

- Technologie d'épilation professionnelle à utiliser chez soi
- Sans danger pour une utilisation sur tout le corps
- Épilateur à lumière pulsée pour hommes
- Une peau plus douce plus longtemps
- Flashage efficace de grandes zones
- Épilation pour de nombreux types de peau et de poils

Tondeuse corps incluse

- Pré-rasage avec la tondeuse corps
- Tondeuse corps respectueuse de la peau incluse, 100 % étanche

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Prévient la repousse des poils Avec capteur SmartSkin, Utilisation avec ou sans fil, Tondeuse corps incluse

BG9040/04

Points forts

Épilation longue durée


Développé en collaboration avec des experts de la peau, le Philips Lumea pour hommes utilise une technologie de lumière pulsée (IPL) pour interrompre le cycle de repousse des poils. Adapté et sûr pour une utilisation à domicile, un programme d'épilation désactive en douceur vos follicules pileux, ce qui vous permet de garder la peau lisse plus longtemps.

Zones d'utilisation



Conçu en étroite collaboration avec des experts de renom, l'épilateur à lumière pulsée pour hommes Philips est sûr, efficace et doux sur les bras, les aisselles, les épaules, le ventre, la zone pubienne (à l'exception du scrotum), les jambes, le torse et le dos.

Pré-rasage avec la tondeuse corps

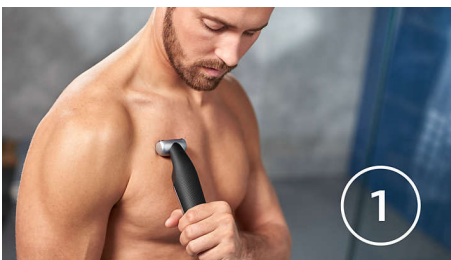

Pour une utilisation sûre et confortable sur les aisselles, le torse et l'abdomen, le dos et les épaules, le pubis et les jambes. Le rasoir respectueux de la peau saisit et coupe les poils de différentes longueurs, sans nécessiter

différents accessoires ou un contact entre la peau et des bords coupants.

Utilisez votre Lumea



1. Passez le Philips Lumea sur la zone souhaitée toutes les 2 semaines pour les 4 à 5 premières séances 2. Entre les séances, les poils tombent naturellement et vous remarquerez une réduction de la repousse 3. Après le cycle initial de séances, utilisez votre Lumea toutes les 4 à 8 semaines pour garder la peau lisse.

La confiance



Philips Lumea utilise une technologie innovante de lumière pulsée pour rompre le cycle de repousse des poils. De légères impulsions lumineuses agissent à la racine des poils pour prévenir la réactivation des poils au bout de quelques séances.

Capteur SmartSkin



Recommandation automatique d'intensité selon votre type de peau.

Modes manuel & continu



L'épilateur à lumière pulsée pour hommes est doté d'une grande fenêtre de flashage de 4,1 cm². Ses modes manuel et continu permettent d'épiler rapidement de grandes zones du corps.

Utilisation avec ou sans fil



L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea pour hommes est extrêmement pratique. Il peut être utilisé sans fil pour une liberté de mouvement totale, ou branché sur le secteur pour une utilisation ininterrompue.

Types de peaux et de poils adaptés



Le Philips Lumea est un épilateur pour hommes. Il fonctionne sur des tons de peau allant de très blanc (I) à marron foncé (V), mais comme pour d'autres types d'épilation à la lumière, il NE CONVIENT PAS aux poils roux, blond clair ou blancs/gris. Il N'EST PAS non plus adapté aux peaux très foncées (type de peau VI).

Caractéristiques

Caractéristiques techniques des accessoires

- Accessoire corps: Taille de la fenêtre : 4,1 cm²,
Forme : convexe, Énergie lumineuse : 22,96 J,
Spectre lumineux > 565 nm

Accessoires inclus

- Conditions d'utilisation: Mode d'emploi
- Adaptateur: 19,5 V / 4 000 mA
- Tondeuse corps: Pré-rasage avec la tondeuse corps

Zones d'application

- Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre

Sécurité et paramètres réglables

- Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV
- 5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau
- Système de sécurité intégré: Évite les flashes

accidentels

- Capteur de teint de peau: Détecte votre teint de peau
- Capteur SmartSkin: Le réglage adapté à la demande

Mode d'application

- Flash Continu & Manuel: Pour une utilisation rapide
- Utilisation avec ou sans fil: Fonctionne sans fil et sur secteur
- Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les petites zones

Alimentation

- Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

- Lampe haute performance: Produit > 250 000 flashes

Entretien

- Garantie: Garantie mondiale de 2 ans



Date de publication
2023-09-21

Version: 2.3.1

EAN: 87 10103 85577 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com