

PHILIPS

sonicare

Sonisk, elektrisk
tannbørste med app

DiamondClean 9000

Tilkoblet børsting i en fei

Innebygd trykksensor

Anerkjent smart børstehode

Fire moduser og tre
intensitetsnivåer



HX9914/62

Hvitere og sunnere tenner for livet

Hvitere tenner på bare én dag*

Vår mest elegante elektriske Philips Sonicare-tannbørste – den beste løsningen for hvitere tenner. Bytt til Philips Sonicare.

Stilig og brukervennlig design

- Elegant utseende og enkel å lade

DiamondClean-brukere opplever bedre tannhelse

- Effektiv mot plakk, skånsom mot tannkjøttet
- Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss

La DiamondClean 9000 tilpasse seg etter dine behov

- Egendefinert pusseopplevelse
- Sier fra når du trykker for hardt
- BrushSync velger automatisk den beste modusen for deg
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Følg rutinen din med en personlig fremdriftsrapport

- Begynn og oppretthold sunne vaner


DiamondClean 9000

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9914/62

Høydepunkter

Fremgangsrapport

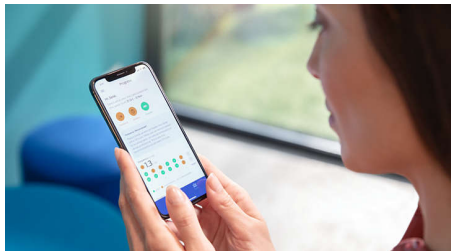

DiamondClean 9000 gir deg rådene du trenger for å forbedre og opprettholde sunne pussevaner mellom tannlegebesøk. Innebygde smartsensorer gir deg beskjed når du bruker for mye kraft, og ved å koble pusseopplevelsen din til Sonicare-appen får du en personlig fremgangsrapport som hjelper deg med å følge rutinen din for å se hvor mye du har forbedret deg over tid.

Fire moduser og tre intensitetsnivåer



DiamondClean 9000 leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+ for å oppfylle børstebehovene dine. Clean-modusen brukes til grundig tannpuss hver dag, White+ brukes til å fjerne misfarging, Gum Health gir en skånsom, men effektiv tannpuss av tannkjøttet, og Deep Clean+ gir deg en oppkvikkende og svært grundig tannpuss. Tre intensitetsnivåer gjør at du kan velge mellom en høyere innstilling for å få en grundigere rengjøring og en lavere innstilling til de som har mer sensitive tenner.

Innebygd trykksensor



Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men DiamondClean 9000 merker det. Hvis du trykker for hardt, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å lette på trykket og la børstehodet gjøre jobben. Syv av ti personer synes at denne funksjonen har hjulpet dem med å pusse tennene bedre.

Paring i BrushSync-modus



Smarte børstehoder sikrer at du bruker riktig modus og intensitet for å få den beste tannpussen. Hvis du for eksempel bruker W3 Premium White-børstehodet, synkroniserer DiamondClean 9000-teknologien børstehodet med tannkjøttmodusen automatisk for å hjelpe deg med å opprettholde et sunt tannkjøtt.

C3 Premium Plaque Defense



Premium Plaque Control-børstehodet er utformet for å gi deg den grundigste tannpussen hittil. Myke fleksible sider og børstehår som bøyer seg etter formen på tennene, gir deg en fire ganger større kontaktflate og når områder som er vanskelige å komme til, enklere*.

Byttepåminnelse med BrushSync




Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

Batteri med lang levetid



DiamondClean 9000 varer i opptil to uker per opplading med vanlig bruk.

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

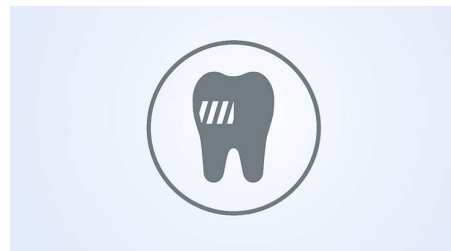

Få den grundigste tannpussen med C3 Premium Plaque Control-børstehodet. De myke, fleksible børstehårene er utformet for å bøye seg etter formen på tennene, noe som gir deg en fire ganger større kontaktflate** og opptil ti ganger mer fjerning av plakk fra steder som er vanskelige å komme til.

DiamondClean 9000

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9914/62

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteritype: Litium-ION

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 11.1 cm

Length: 17.4 cm

Net weight: 0.957 kg

Gross weight: 1.32 kg

GTIN: 8720689002547

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

Height: 27.5 cm

Width: 35.7 cm

Length: 18.9 cm

Net weight: 2.871 kg

Gross weight: 4.305 kg

GTIN: 18720689002544

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Pallet Layer

Height: 27.5 cm

Width: 120 cm

Length: 80 cm

Annet

Height: 96.8 cm

Width: 120 cm

Length: 80 cm

GTIN: 68720689002549

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegerasjons iPad eller

nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller

nyere, med iOS7-operativsystem

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som

klikkes enkelt på plass

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige

resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Håndtak: 2 DiamondClean 9000

Børstehoder: 4 C3 Premium Plaque Defense

Oppladende glass: 1

Ladebase: 2

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i

håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Tre intensiteter: Høy, Lav, Middels stor

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig

tannpuss

For sunt tannkjøtt: Pusser jekslene ekstra godt

White+: For å fjerne misfarging

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

BrushSync-teknologi: smart børstehode, Kobler

til smarthåndtaket og

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr

relevante programvareoppdateringer i to år etter

kjøpsdatoen.

