

# PHILIPS

IPL Haarentfernungsgerät  
mit SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin Sensor

3 intelligente Aufsätze: Körper,  
Gesicht, Präzision

Lumea IPL App

Mit Kabel und kabellos  
verwendbar

BRI955/01



## Individuelle Behandlung mit SenseIQ ohne Kabel

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut\*

Genießen Sie eine komfortable individuelle Behandlung mit der kabellosen Version der schnellsten Lumea IPL-Lösung. SenseIQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Anleitungen in der Lumea IPL App sorgen für langanhaltend glatte Haut.

### Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatologen
- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Das einzige Lumea Gerät mit kabelloser Option

### Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 3 intelligenten Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

### Individuelle IPL-Haarentfernung

- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.
- Sanft und komfortabel mit SenseIQ

# Besonderheiten

## 3 intelligente Aufsätze




Die Aufsätze passen sich jeder Kontur Ihres Körpers an und lösen den jeweils passenden Behandlungsmodus aus. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Präzision: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.

## Philips Lumea IPL-App



Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

## Mit Dermatologen entwickelt

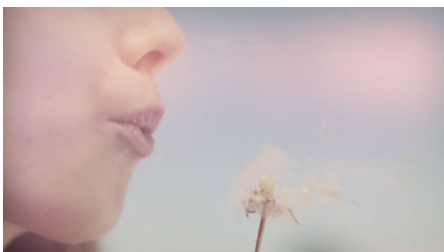

Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

## Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung




Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

## SenseIQ Technologie



Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

## Bei Bedarf kabellos

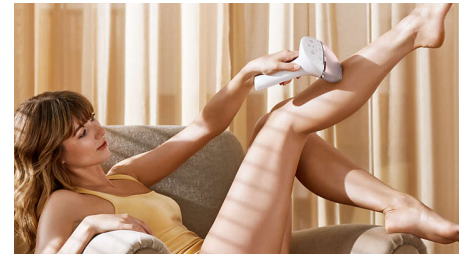

Lumea Serie 9000 ist unser einziges IPL-Gerät mit kabellosem Betrieb und damit besonders praktisch. So erreicht es schwer zugängliche Bereiche noch präziser und eignet sich auch für unterwegs.

## Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

# Daten

## Technische Daten der Aufsätze

**Körperbehandlungs-Aufsatz:** Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

**Gesichtsbehandlungs-Aufsatz:** Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm<sup>2</sup>, zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

**Präzisionsbehandlungs-Aufsatz:** Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für die Bikinizone und Achselhöhlen

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

**SmartSkin Sensor:** Die richtige Einstellung auf Abruf

## Anwendungsmodus

**„Slide and Flash“:** Für eine schnelle Anwendung

**Mit Kabel/kabellos:** Mit Kabel und kabellos verwendbar

**„Stamp and Flash“:** Für die Behandlung kleiner Bereiche

## Technische Daten

**Batterietyp:** wiederaufladbarer Akku

**Stromspannung:** 100–240 V

**Hochleistungs-Lampe:** Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren\*\*

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Hochwertige Tasche

**Adapter:** 19,5 V/4.000 mA

## Anwendungszeit

**Unterarme:** 2,5 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

**Gesichtsbereiche:** 1,5 Min.

**Unterschenkel:** 8,5 Min.

