

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

ExpertClean 4700

Integruotas spaudimo jutiklis

2 režimai, 3 intensyvumai

1 „BrushSync“ funkcija

su dezinfekavimo priemone



HX6483/53



Švaresni dantys. Švelnus valymas.

Pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų nei valant rankiniu šepetėliu

Pajuskite švelnaus valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį ir pašalindami iki 10 kartų daugiau apnašų nei valydami rankiniu šepetėliu

Proven to improve oral health

- Didesnis sąlytis su paviršiumi, kad būtų pašalintos apnašos

Innovative technology

- Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant
- Pacientai gauna maksimalią naudą naudodami šias šepetėlių galvutes
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“

Optimize your brushing

- „Clean“ ir „Gum care“ režimai

Designed around your patient

- Puikus būdas priprasti prie naujojo dantų šepetėlio
- Skatinimas valytis kruopščiai

UV dezinfekavimo priemonė padeda sunaikinti mikrobus ant galvūčių

- Reflektorius paskirsto dezinfekuojančią šviesą šepetėlio galvutėje

Ypatybės

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*




Giliausiai valanti „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutė. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis** ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*.

Per daug spaudžiate?



Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausiti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojantį garsą ir primins sumažinti spaudimą.

„Clean“ ir „Gum care“ režimai

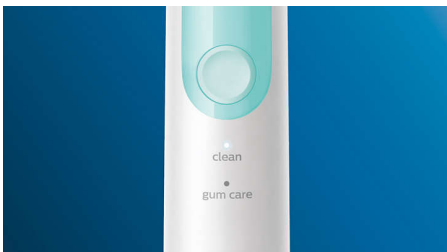


Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba į sveikos dantenų būklės palaikymą, šepetėlyje yra jums tinkamas režimas: valymo režimas puikiai valo, o dantenų priežiūros režime pridėdama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir synchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

Išmanusis galvutės keitimo priminimas

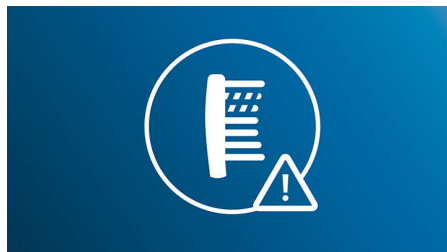


Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau ir apie tai pagalvojome: mūsų išmanioji šepetėlio galvutės atpažinimo technologija stebi, kiek laiko pacientai naudojo šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valė dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis indikatorius. Taip visada būsite tikri, kad šepetėlio galvutė nuolatos valo neprikaištingai.

Lengvos pradžios programa



Prie naujų dalykų reikia priprasti. Todėl mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.

Naudingi laikmačiai

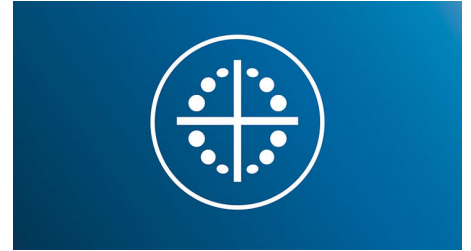

Mūsų „QuadPacer“ perspėja pacientus, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Dezinfekuojanti šviesa



UV dezinfekavimo priemonės reflektorius paskirsto dezinfekuojančią šviesą visoje viršutinėje šepetėlio galvutės dalyje, kad rezultatai būtų optimalūs.

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta ir mėta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“

Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque Control“, 1 „G3 Premium Gum Care“, 1 „W2c Optimal White compact“

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

Nauda sveikatai: Padeda sumažinti ertmių

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas

„Gum Care“: Švelniai masažuoja danteną

Išmanioji jutiklinė technologija

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

