

PHILIPS

sonicare

ソニックアー フレックス
スケアー プラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド 2本付属

過圧防止センサー

ブラシヘッド紫外線除菌器



HX9162/28



ソニックアー史上最高の歯垢除去力10倍(*1) 新しくなった、フレックスケアプラチナ。

新しくなった、フレックスケアプラチナ。

推奨ガイドラインに沿ってブラッシング

- 強すぎるブラッシングを警告
- 磨き時間をタイマーでお知らせ
- 10分間で歯ブラシを徹底除菌

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- 3段階の強さ設定と3つのクリーニングモード
- 新しいディープクリーンモード：トラブルのある箇所を楽々洗浄

フィリップスソニックアーでしっかりクリーニング

- アダプティブクリーニングテクノロジーでしっかりやさしくクリーニング
- 歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング
- 音波水流でお口を健康に

ライフスタイルにフィット

- 長持ちするバッテリーとトラベルケース
- 便利なトラベルケースと充電器

特長

磨き方を問わずにしっかりクリーニング




従来の習慣を変えるのは大変なものです。次世代のフレックスエアープラチナなら簡単です。フィリップスのアダプティブクリーニングテクノロジーの中核である、革新的なアダプティブクリーンブラシヘッドと過圧防止センサーにより、今まで届きにくかったトラブルのある箇所のお手入れが簡単になりました。アダプティブクリーンブラシヘッドの毛先は、歯と歯ぐきの形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で約4倍**、最大約10倍の歯垢を除去。ブラッシングが強過ぎると、過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動させるので、歯ぐきにはやさしく、しっかりと歯垢を落とせます。

アダプティブクリーンブラシヘッド



アダプティブクリーンブラシヘッドは、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するユニークな電動ブラシヘッドです。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が最大約4倍、歯肉腺や歯間の歯垢を最大約10倍除去。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。


過圧防止センサー

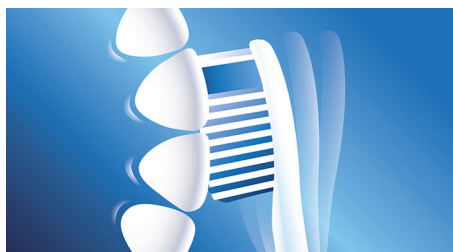

強すぎるブラッシングの場合、フレックスエアープラチナ歯ブラシでは圧力が強すぎると過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動さ

せるので、いつ力を弱くすればいいのが分かります。実験では、ブラッシングが強すぎる人10人中7人が過圧防止センサーのおかげでブラッシング圧力を弱めることに成功しています。

1人1人に合ったブラッシング方法

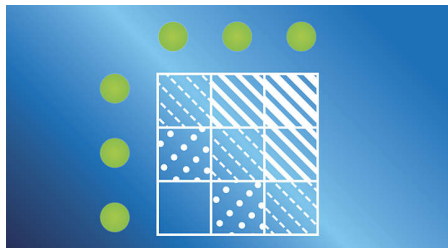

フレックスエアープラチナは、3段階の強さ設定と3つのクリーニングモードで、快適かつしっかりと歯を磨けます。特に注意して磨きたいトラブルのある箇所には3分間のディープクリーンモードで、毎日の歯磨きにはクリーンモード、ステインの除去にはホワイトモードがおすすめです。強さはお好みに合わせて低、中、高に設定してください。

ディープクリーンモード



まったく新しいディープクリーンモードは、届きにくい場所を格段にきれいにします。このモードのブラシヘッドのユニークな動きと、3分間と長めのブラッシング時間は、トラブルのある箇所に特に注意して磨きたいときに最適です。

音波水流



ソニックエアー ブラシヘッドは、1分間に31,000以上のブラシストローク数の高速振動と幅広い振幅の動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワ

ーを伝えます。この音波水流を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

紫外線除菌器



フレックスエアープラチナ音波式歯ブラシに付属の紫外線除菌器は、ブラシヘッドに付着した細菌を除菌するよう設計されています。紫外線除菌器から照射された光が、最大99%の細菌を除菌します。*（一財）日本食品分析センターによる試験歯ブラシについた菌が99%減少【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較

カドペーサーとスマートタイマー



フレックスエアープラチナには、しっかり磨くための2種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイート

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 3 週間***

内容・付属品

ハンドル: フレックスケアープラチナ 1 本

ブラシヘッド: アダプティブクリーン 1 本, インターケアー ミニ 1 本

充電器: 1

トラベルケース: 1

紫外線除菌器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

過圧防止センサー: ハンドルが振動してお知らせ

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

3 段階の強さ設定: 強, 弱, 中

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

* 3 カ月ごとにブラシを交換してください。

** 1 アダプティブクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

*** 2 分間のブラッシング 1 日 2 回 を基準とした場合

