

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 4500

Вбудований датчик тиску

2 режими чищення

1 функція BrushSync



HX6888/89



Здоровіші ясна. У лагідний спосіб.

Покращення здоров'я ясен до 100% більше, ніж вручну.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров'я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою.

Створено для вас

- Заохочення до ретельного чищення

Innovative technology

- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки
- Покращує стан ясен усього за 2 тижні
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Покращує здоров'я ротової порожнини

- Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

Чистить зуби краще


- Режим чищення та турботи про ясна

Створено для ваших пацієнтів

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки


Основні особливості

Покращує стан ясен

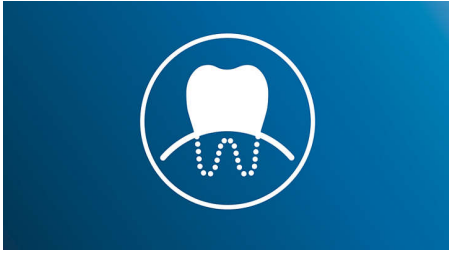

Насадка для щітки і InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.

Режим чищення та турботи про ясна

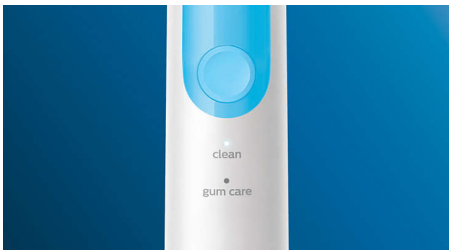

Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи подбати про здоров'я ясен? Ця щітка має потрібний вам режим: режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим турботи про ясна додає додаткову хвилину чищення з меншою потужністю для лагідного масажу ясен.

Безпечно та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, plomb, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Забагато тиску?




На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Розумне нагадування про заміну

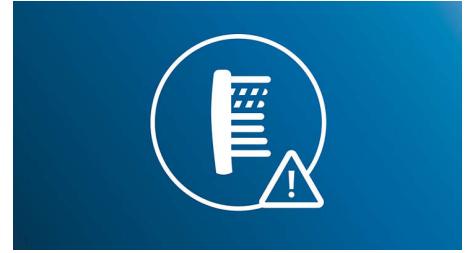


Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

Корисні таймери

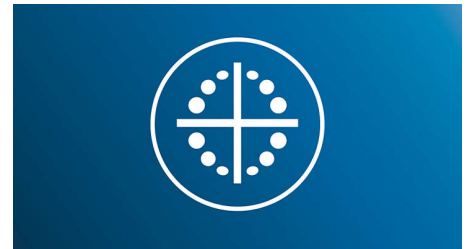

Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

Програма "Легкий старт"

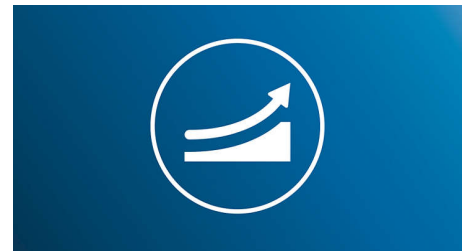

Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий і синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 ic InterCare compact

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібрає, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

