

# PHILIPS

IPL uređaj za  
uklanjanje dlačica

Lumea IPL serije  
7000

Za tijelo, lice i bikini

3 nastavka: tijelo, lice, bikini

> 250 000 bljeskova

Korištenje s kabelom



SC1998/00



Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlačica\*  
Čak 85% manje dlačica u 3 tretmana\*\*

Svilenkasto glatka koža bez dlačica s našom Lumea IPL serije 7000. Tretmani uklanjanja dlačica su nježni i učinkoviti uz nastavke za svako područje tijela.

#### **Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu**

- Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi bilo sigurno i učinkovito
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

#### **Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo**

- Sveobuhvatno IPL rješenje za lice, tijelo i bikini
- Pogodno za širok raspon nijansi kože i boja dlačica

#### **Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica**

- Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

# Istaknute značaj.

## 2x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

## Senzor nijanse kože



Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

## Izuzetno dugačak kabel




Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

## 3 odgovarajuća nastavka



Nastavci za lice, tijelo i bikini precizno i nježno tretiraju dlačice, čak i na osjetljivim područjima. Nastavak za lice ima integrirani filter za svjetlo za precizan tretman.


## Razvijeno s dermatolozima

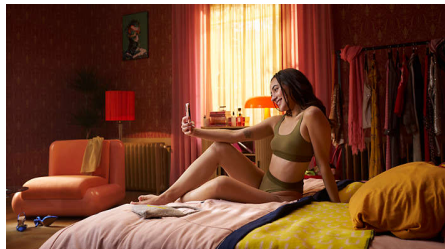

Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

## Aplikacija Philips Lumea IPL

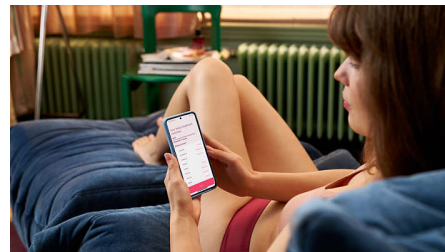

Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

## Za razne tipove kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do srednje smeđe (I – IV).

# Specifikacije

## Sigurnost i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filtar:** Štiti kožu od UV zračenja  
**5 postavki jačine svjetlosti:** Može se prilagoditi prema vašem tipu kože  
**Integrirani sigurnosni sustav:** Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

## Način primjene

**"Slide and Flash":** Za brzu primjenu  
**Žično/bežično:** Korištenje s kabelom  
**"Stamp and Flash":** Za primjenu na manjim područjima

## Tehničke specifikacije

**Snažna žarulja:** Napravljen da traje, 250.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 20 godina trajanja lampe\*\*  
**Napon:** 100 – 240 V

## Servis

**Jamstvo:** Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

## Predmeti u kompletu

**Upute za uporabu:** Upute  
**Pohrana:** Torbica  
**Adapter:** 24 V / 1500 mA

## Vrijeme primjene

**Potkoljenica:** 15 min  
**Pazusi:** 2,5 min  
**Bikini linija:** 4 min  
**Lice:** 2 min

## Tehnički podaci za nastavke

**Nastavak za tijelo:** Veličina prozora: 4,0 cm<sup>2</sup>,  
Tretman za tijelo: noge, ruke, trbuh i pazuhe  
**Nastavak za lice:** Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>,  
dodatni filtar, Tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti  
**Nastavak za bikini zonu:** Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>, Tretman za bikini područje

