

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

ProtectiveClean
5100

Senzor de presiune integrat

3 moduri

1 funcție BrushSync

Toc de transport



HX6857/35



Dinți mai albi. În mod delicat.

Dinți mai albi în doar o săptămână.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ți dinții în doar o săptămână.

S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Sigură și delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice și dentare
- Albește dinții în numai o săptămână

Concepute pentru tine

- Încurajare pentru un periaj temeinic
- Îți face călătoria mai ușoară

Tehnologie inovatoare

- Te anunță dacă apeși prea tare
- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente

Optimizează periajul

- Alege din trei moduri

Repere

Dinți mai albi în mod natural



Atașează capul de periere W Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.

Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

Trei moduri



Această periuță de dinți îți permite să îți personalizezi periajul în funcție de nevoile proprii, putând alege din trei moduri. Modul Clean este modul standard pentru curățare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafață. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa ușor gingiile.

Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

Monitorizează-ți presiunea de periere




Periajul prea intens îți poate deteriora dinții și gingiile. Pentru a preveni acest lucru, Philips Sonicare ProtectiveClean emite un sunet intermitent delicat pentru a-ți reaminti să reduci presiunea.

Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, te va anunța printr-un indicator luminos pe mâner și un semnal sonor scurt. Astfel, poți avea siguranța că obții rezultate optime de la capul de periere.

Cronometre utile

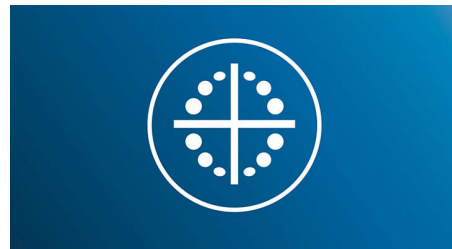

Ai nevoie de o periuță de dinți electrică dotată cu cronometru? QuadPacer te anunță când ai acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce SmarTimer te înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

Toc de transport comod și încărcător



Tocul nostru premium de transport îți permite să depozitezi igienic periuța de dinți, în timp ce baza noastră de încărcare compactă menține bateria încărcată în timpul deplasărilor. Beneficiezi de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare completă, încărcătorul fiind util pentru călătorii mai lungi.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Negru cu gri, Alb cu verde mentă

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Mâner: Design ergonomic subțire

Recunoașterea capului de periere: Se sincronizează cu modul ideal

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Atenționare de înlocuire: Pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate, pictograma de reamintire se aprinde

Articole incluse

Mâner: 2 ProtectiveClean

Toc de transport: 2

Încărcător: 1

Capete de periere: 2 capete W2 Optimal White de dimensiune standard

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni, Ajută la reducerea cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

Gum Care: Masează delicat gingiile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

