

# PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät  
mit SenselQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin Sensor

3 intelligente Aufsätze: Körper,  
Gesicht, Präzision

Lumea IPL App

Mit Kabel und kabellos  
verwendbar



BRI955/01

## Individuelle Behandlung mit SenselQ ohne Kabel

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut\*

Genießen Sie eine komfortable individuelle Behandlung mit der kabellosen Version der schnellsten Lumea IPL-Lösung. SenselQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Anleitungen in der Lumea IPL App sorgen für langanhaltend glatte Haut.

### Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv

### Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 3 intelligenten Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

### Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenselQ
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

# Besonderheiten

### Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung




Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

### SenselQ technology



Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

### Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

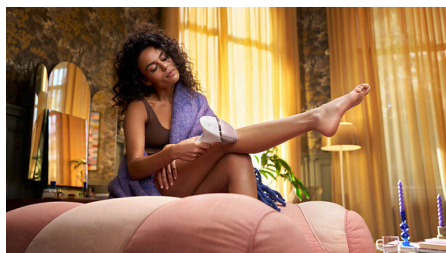

Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine, oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

### 3 intelligente Aufsätze

Die Aufsätze passen sich jeder Kontur Ihres Körpers an und lösen den jeweils passenden Behandlungsmodus aus. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Präzision: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.


### Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

### Philips Lumea IPL-App

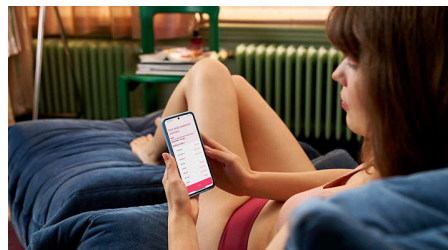

Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

### Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

## Daten

### Technische Daten der Aufsätze

**Körperbehandlungsaufsatz:** Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

**Gesichtsbehandlungsaufsatz:** Form: flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm<sup>2</sup>, zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

**Aufsatz zur präzisen Behandlung:** Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für die Bikinizone und Achselhöhlen

### Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtenergieeinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

**SmartSkin-Sensor:** Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

### Anwendungsmodus

**Schieben und blinken:** Für eine schnelle Anwendung

**Stempel und Blitz:** Für die Behandlung kleiner Bereiche

**Schnurgebundene / schnurlose Verwendung:** Mit Kabel und kabellos verwendbar

### Technische Daten

**Batterietyp:** wiederaufladbarer Akku

**Stromspannung:** 100-240 V

**Hochleistungslampe:** Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren\*\*

### Bedienung

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

### Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lager:** Hochwertige Tasche

**Adapter:** 19,5 V/4.000 mA

### Anwendungszeit

**Achselhöhlen:** 2,5 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

**Gesichtsbereiche:** 1,5 Min.

**Unterschenkel:** 8,5 Min.

