

# PHILIPS

Forstøverkompressor  
system

InnoSpire Elegance

Stationær enhed til hjemmebrug

Behandling udført på 6 - 8  
minutter\*

\*Ved en 2,5 ml dosis salbutamol

Forstøversæt medfølger



HH1300



Pålidelig forstøvet medicinbehandling, du kan  
stole på

For en ensartet behandling

InnoSpire Elegance giver hurtig, effektiv og pålidelig indgift af inhalationsmedicin, som er beregnet til kontinuerlig behandling på hospitalet og i hjemmet.

**Gennemprøvet SideStream-teknologi**

- Gennemprøvet nebulisator-teknologi

**Elegant, robust design**

- Robust design møder pålidelighed

**Til brug på hospitaler og i hjemmet**

- Designet til kontinuerlig anvendelse
- Kompatibel med almindeligt ordineret nebulisatormedicin

**Korte behandlingstider**

- Behandling leveret i løbet af 6-8 minutter \*

## Vigtigste nyheder

### Til hjemmebrug


Fordi den er robust nok til kontinuerlig brug i både kliniske omgivelser og i familiemiljøer, giver InnoSpire Elegance ensartet og pålidelig nebulisatorbehandling.

### Styrke og stil i ét



Designet til både at passe ind i din livsstil og til at holde til hyppig brug. Du kan være sikker på, at du modtager aerosoler i høj kvalitet i nebulisatorens levetid.

### Gennemprøvet nebulisator teknologi

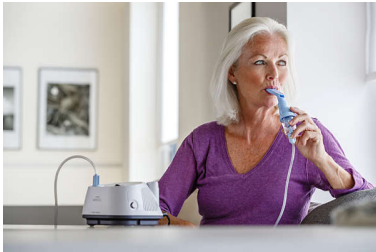

Efterhånden som InnoSpire Elegance presser luften gennem slangen, vil yderligere luft blive suget ind gennem toppen af nebulisatoren,

hvor den skaber en hurtig gennemstrømning af luftbåren medicin, som du kan inhalere. Sidestream er konstrueret til at holde til hyppig og gentagen brug og vil fortsætte med at levere din nebulisatormedicin på effektiv vis, indtil det er tid til udskiftning.

### Behandlingstid

InnoSpire Elegance, kombineret med den genanvendelige SideStream-nebulisator, er designet til give hurtig indgift af lægemidler og korte behandlingstider.

### Alsidighed



Er i stand til at forstøve et bredt udvalg af lægemidler, der rutinemæssigt bruges til at behandle forskellige luftvejssygdomme via nebulisator.

## Specifikationer

### Design

**Kompakt:** Weighs only 1.5 kg

### Driftsparametre

**Elektrisk mærkning/støm:** 120 V / 60 Hz, 1.7

Amp

**Maksimal flowhastighed:** 9.4 lpm

**Maksimalt tryk:** 44 psi

**Driftsform:** Continuous

**Gennemsnitlig flowhastighed:** 7 LPM @ 10 psi

### Data for ydeevne

**MMAD:** 2.9  $\mu$ m

**Fraktion af fine partikler:** 77% below 5  $\mu$ m

**Medicinforstøvningskapacitet:** 8 ml

### Service

**Garanti:** 5 years

### Produktoplysninger

**Vægt:** 1.5 kg

**Størrelse:** 165x165x108 mm

**Støjniveau:** 58  $\pm$ 3 dBA

**Behandlingstid (6 - 8 minutter\*):** \* 2.5ml

Salbutamol dose

