




Philips
InfraCare-infrapunalamppu

650 W

Puolivartalohoito
Korkeus 124 cm

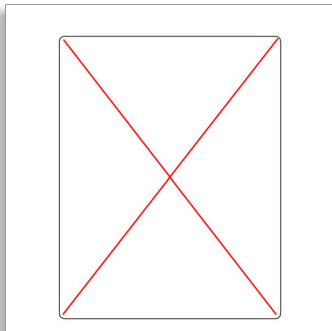

HP3643

Tehokas kivunlievitys

Syvälle vaikuttava infrapunalämpö

Philips InfraCare -lämpölamppu lievittää tehokkaasti lihas- ja nivelkipuja. 650 watin infrapunalämpö on erittäin miellyttävää ja tunkeutuu syväälle ihoon, stimuloi verenkiertoa ja lievittää kipua tehokkaasti 60 x 40 cm:n alueilla tehtävällä puolivartalohoidolla.

Helppokäyttöinen

- Säädettyvä asento
- Yltää helposti niskaan ja olkapäihin

Tehokas kivunlievitys

- Syvältä vaikuttava infrapunalämpö

Puolivartalohoito

- 650 W:n infrapunahalogeenilamppu

Vilkastunut verenkierto

- Vilkastuttaa verenkiertoa

PHILIPS

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

- 2 kahvaa: helppoon kuljettamiseen ja sijoittamiseen
- Säädettävä: 0 – 40 astetta (taaksepäin)
- Virtakytkin
- Jatkettava korkeus: 62-127 cm
- Helposti kohdistettava lamppu (vasen/oikea): 90
- Helposti kohdistettava lamppu (ylös/alas): 45

Turvallisuus

- Automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin kuluttua
- IEC-sertifioitu: IEC 60601:n ja 60335:n mukainen

Puolivartalohoito

- Infrapunahalogeenilamppu: 650 W
- Hoitoalue: 60 x 40 cm

Tehokas kivunlievitys

- Syvälle tunkeutuva lämpö

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 300 m
- Virta: 650 W

- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Taajuus: 50–60 Hz
- Jännite: 220–230 V, Taiwan 110 V
- Lamppujen käyttöikä: 500 hr

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 29 x 124 x 29 cm
- Laitteen paino: 7,2 kg
- Tuotepakkauksen paino: 9,1 kg
- Euro-lavan kpl-määrä: 24 pcs
- Tuotepakkauksen mitat (=tukkupakkaus): 34,5 x 60 x 39 cm
- Tuotepakkauksen mitat: 34,5 x 60 x 39 cm
- Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus): 9,1 kg

Logistiset tiedot

- Alkuperämaa: Saksa
- CTV-koodi: 884364301000

Terveystuote

- Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD 93/42/ETY

Kohokohdat

650 W:n infrapunahalogeenilamppu



Philips InfraCare HP 3643 -lämpölamppu lievittää tehokkaasti kipua 60 x 40 cm:n kokoisilla kehon alueilla, kuten koko selässä, hartioissa ja niskassa tai reisissä. InfraCare-laitteessa on innovatiivinen infrapuna-halogeenilamppu. Erikisoptiikka, suodatin ja voimakas 650 watin lamppu mahdollistavat puolivartalohoidon (60 x 40 cm). Lämpö tuntuu paljon miellyttävämmältä, sillä infrapunälämpö jakautuu tasaisemmin hoidettavalle alueelle.

Säädettävä asento

InfraCare HP 3643 on erittäin helppokäyttöinen puolivartalohoidoissa ja eri asennoissa (esim. makuuasennossa sängyllä tai sohvassa). Korkeudensäädön jälkeen lämmön voi helposti kohdistaa haluttuun kehon osaan säätämällä lamppua vaakaa- tai pystysuorassa (vasemmalle/oikealle 90 astetta) ja suuntaamalla sitä ylös tai alas (45 astetta).

Yltää helposti niskaan ja olkapäihin

InfraCare HP3643 -lämpölamppun teho yltää niskaan ja hartioihin hoitamaan kipeytyneitä lihaksia. Lampun korkeudeksi voi säätää 60 - 120 cm, joten sen saa sopivalle korkeudelle sekä sängyllä maataessa että tuolilla istuessa.

Vilkastuttaa verenkiertoa

Infrapunavalon ja lämpö tunkeutuvat syvälle ihoon vilkastuttaen verenkiertoa ja laajentaen verisuonia. Lisäksi infrapunavalon nopeuttaa aineenvaihduntaa ja kuona-aineiden poistumista kehosta.

Syvältä vaikuttava infrapunälämpö



Infrapunavalon on todistettu tehokkaasti lievittävän kipu- ja särkytiloja, joita kipeät lihakset ja jäykät nivelet aiheuttavat. Infrapunavalon tuottama miellyttävä lämpö tunkeutuu syvälle ihoon, vilkastuttaa verenkiertoa ja lämmittää lihaksia. Kun kipu lihaksissa rauhoittuu, lihakset myös rentoutuvat. Lämpö pehmittää kudoksia, vähentää samalla jäykkyyttä ja lisää nivelten liikkuvuutta.



Julkaisupäivä 2022-09-13

Versio: 0.0.0

EAN: 08 71010 33204 87

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com