

PHILIPS

IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

4 inteligentné nastavce: telo, tvár, oblasť línie bikín a podpazušia

Aplikácia Lumea IPL

Použitie na sieť



BRI947/00



Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov*

Vychutnajte si rýchle a prispôsobené ošetrovanie s našim prístrojom Lumea IPL série 8000. Technológia SenseIQ s inteligentnými nastavcami a aplikáciou Lumea IPL pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Ošetrte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť
- Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na ošetrovanie tváre a tela s 4 nastavcami
- Vhodné pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chĺpkov

Personalizované ošetrovanie epiláciou IPL

- Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ
- Optimalizujte si rutinné ošetrovanie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL

Hlavné prvky

2x mesačne pre rýchle výsledky



Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrovanie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.

Technológia SenseIQ



Séria Lumea 8000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nastavce prispôbujú ošetrovanie každej oblasti tela.

Výnimočne dlhý kábel



Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

4 inteligentné nastavce



Špeciálne navrhnuté nastavce sa dokonale hodia ku krivkám vášho tela a keď sú pripojené, spustia najúčinnnejšie programy pre každú oblasť tela. Tvár: plochý dizajn a malý prierez s UV filtrom. Telo: zakrivený smerom dovnútra s veľkým priezorom. Oblasť bikín a podpazušia: zaoblený smerom von pre ťažko dostupné miesta.


Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi

s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrovanie aj v citlivých oblastiach.

Aplikácia Philips Lumea IPL

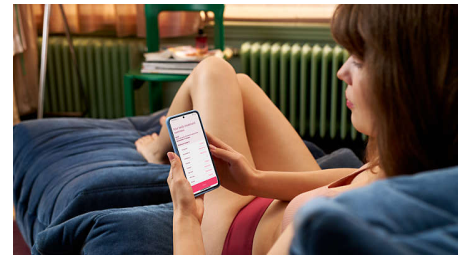

Naša bezplatná tréningová aplikácia vám pomôže naplánovať a dodržiavať plán ošetrovania a potom vás krok za krokom prevedie každým ošetrovaním. Stiahlo si ju viac ako 2,1 milióna používateľov.

Pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chlčkov



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chlčkov a pigmentom v odtieni pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých aj čiernych chlčkoch a na odtieňoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – V).

Technické údaje

Technické údaje, prílohy

Nadstavec na ošetrovanie tela: Tvar: konvexný, Plocha priezoru: 4,1 cm², Prispôsobená na ošetrovanie tela: nohy, ruky a brucho

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter, Prispôsobená na ošetrovanie tváre: horná pera, brada a čelust

Nadstavec na ošetrovanie oblasti bikín: Tvar: konkávny, Plocha priezoru: 3 cm², Prispôsobená na ošetrovanie citlivých oblastí bikín

Nadstavec na ošetrovanie podpazušia: Tvar: konkávny, Plocha priezoru: 3 cm², Prispôsobená na ošetrovanie oblasti podpazušia

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor SmartSkin: Vhodné nastavenie na požiadanie

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchle použitie

Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie na sieť

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Technické údaje

Napätie: 100–240 V

Vysokovýkonná lampa: Výkon > 200 000 zábleskov

Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Súčasti balenia

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Kozmetické puzdro

Adaptér: 19,5 V/4 000 mA

Čas aplikácie

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Oblasti tváre: 1,5 min

Časť nôh od kolien dole: 8,5 min

