

PHILIPS

Venttiilillinen
tilanjatke ja maski

OptiChamber
Diamond

Mukana L-koon LiteTouch-maski

Pienikokoinen, tilavuus 140 ml

Yleisimmille astmalääkkeille



HH1308



Auttaa sinua pysymään tilanteen tasalla

Tehostaa lääkkeen annostelua

OptiChamber Diamond -tilanjatkeella entistä suurempi osa lääkkeestä saadaan hengitettävä keuhkoihin. Koska putken sisäpinta on antistaattista materiaalia, aerosoli säilyy putkessa entistä kauemmin ja sisäänhengitykselle jää enemmän aikaa.*

Mukavuus

- Lisävarusteena saatava maski myötäilee kasvoja
- Yhden koon suokappale sopii kaikille

Tehokas hoito

- Vie lääkkeen keuhkoihin**

Suunniteltu kestävään käyttöön

- Erikoisominaisuudet helpottavat käyttöä ja huoltoa
- Venttiilin matala vastus helpottaa hengittämistä
- Antistaattinen venttiilillinen tilanjatke antaa enemmän aikaa

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettävälle lääkkeille

- Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettävälle lääkkeille

Kohokohdat

Vie lääkkeen keuhkoihin



OptiChamber Diamond tehostaa aerosolin annostelua keuhkoihin ja auttaa saamaan parhaan hyödyn inhaloitavista lääkkeistä.

Hengitys kulkee helpommin

Low resistance valves



Venttiilien vastus on matala, joten ne avautuvat helposti myös lasten matalilla virtausnopeuksilla. Näin lääkkeen hengittäminen tilanjatkeen kautta on vaivatonta sekä sinulle että lapsellesi.*

Yhteensopiva



OptiChamber Diamond on tarkoitettu usein määrätuille inhalaattorilääkkeille.

Helppo käyttää ja huoltaa



High-flow whistle

Sovitin pitää inhalaattorin tiiviisti paikallaan, ja sisäänrakennettu pilli viheltää, jos hengität liian nopeasti. Suukappale ja sovitin on helppo irrottaa puhdistusta varten.

Aikaa hengittää




Anti-static chamber

OptiChamber Diamond -tilanjatkeella entistä suurempi osa lääkkeestä saadaan hengitettyä keuhkoihin. Koska putken sisäpinta on

antistaattista materiaalia, aerosoli säilyy putkessa entistä kauemmin ja sisäänhengitykselle jää enemmän aikaa.*

Mukavuus

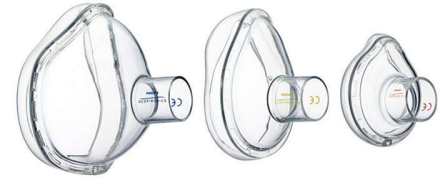

Irrotettavassa LiteTouch-maskissa on pehmeä reunatyyny, joka myötäilee kasvojen muotoja eikä paina. SoftTouch-tiiviste vähentää vuotoja.**

Aikuisille ja lapsille



Portaittaisen suukappaleen ansiosta OptiChamber Diamond -tilanjatketta voivat käyttää sekä lapset että aikuiset.

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Mukana: Large LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Materiaali

Tilanjatke: Akryylnitriilibutadienistyreeni

LiteTouch-maski: Polyeteenitereftalaatti (PET), silikoni

Venttiilit: Silicone

Ylläpito

Puhdistaminen: Warm water and liquid soap

Käyttöikä: Replace after one year

Tuotteen tiedot

Pituus: 14.2 cm (5.6")

Suukappale: Interfaces w 22 mm connectors

Äänenvoimakkuus: 140 ml

Tarkoitettu: Adults



* **Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

***Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

****Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.