

PHILIPS

Tilanjatke S-koon
LiteTouch maskilla

OptiChamber
Diamond

Sovitin pitää inhalaattorin
paikoillaan

0–18 kuukauden ikäisille lapsille

Yleisimmille astmalääkkeille

Pienikokoinen, tilavuus 140 ml



HH1306



Auttaa sinua pysymään tilanteen tasalla Tehostaa lääkkeen annostelua

OptiChamber Diamond -tilanjatkeella entistä suurempi osa lääkkeestä saadaan hengitettyä keuhkoihin. Koska putken sisäpinta on antistaattista materiaalia, aerosoli säilyy putkessa entistä kauemmin ja sisäänhengitykselle jää enemmän aikaa.*

Mukavuus

- Lisävarusteena saatava maski myötäilee kasvoja
- Yhden koon suukappale sopii kaikille

Tehokas hoito

- Vie lääkkeen keuhkoihin**

Suunniteltu kestäväään käyttöön

- Erikoisominaisuudet helpottavat käyttöä ja huoltoa
- Venttiilien matala vastus helpottaa hengittämistä
- Antistaattinen venttiilillinen tilanjatke antaa enemmän aikaa

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettäville lääkkeille

- Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettäville lääkkeille

Kohokohdat

Vie lääkkeen keuhkoihin




OptiChamber Diamond tehostaa aerosolin annostelua keuhkoihin ja auttaa saamaan parhaan hyödyn inhaloitavista lääkkeistä.

Hengitys kulkee helpommin



Venttiilien vastus on matala, joten ne avautuvat helposti myös lasten matalilla virtausnopeuksilla. Näin lääkkeen hengittäminen tilanjatkeen kautta on vaivatonta sekä sinulle että lapsellesi.*

Mukavuus

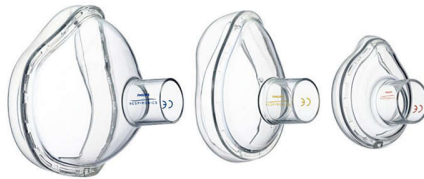


Irrotettavassa LiteTouch-maskissa on pehmeä reunatyyny, joka myötäilee kasvojen muotoja eikä paina. SoftTouch-tiiviste vähentää vuotoja.**

Yhteensopiva



OptiChamber Diamond on tarkoitettu usein määrätuille inhalaattorilääkkeille.

Helppo käyttää ja huoltaa

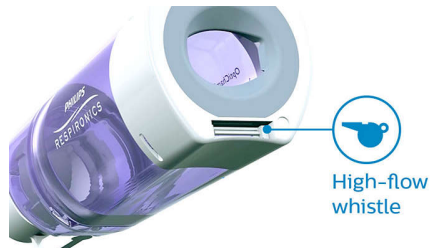

Sovitin pitää inhalaattorin tiiviisti paikallaan, ja sisäänrakennettu pilli viheltää, jos hengität liian nopeasti. Suukappale ja sovitin on helppo irrottaa puhdistusta varten.

Aikuisille ja lapsille



Portaittaisen suukappaleen ansiosta OptiChamber Diamond -tilanjatketta voivat käyttää sekä lapset että aikuiset.

Aikaa hengittää



OptiChamber Diamond -tilanjatkeella entistä suurempi osa lääkkeestä saadaan hengitettyä keuhkoihin. Koska putken sisäpinta on antistaattista materiaalia, aerosoli säilyy putkessa entistä kauemmin ja sisäänhengitykselle jää enemmän aikaa.*

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Mukana: Small LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Materiaali

Tilanjatke: Akryyliniitrilibutadienistyreeni

LiteTouch-maski: Polyeteenitereftalaatti (PET), silikoni

Venttiilit: Silicone

Ylläpito

Puhdistaminen: Warm water and liquid soap

Käyttöikä: Replace after one year

Tuotteen tiedot

Pituus: 14.2 cm (5.6")

Suukappale: Interfaces w 22 mm connectors

Äänenvoimakkuus: 140 ml

Tarkoitettu: Children aged 1-5yr



* *Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

* ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.