

# PHILIPS

Kannettava  
kompressorisumutin


InnoSpire Mini

Suunniteltu satunnaiseen  
käyttöön

Hoito vie 6–8 minuuttia\*

Ladattava akku

Mukana SideStream Plus

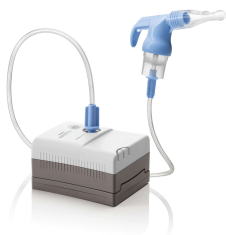

HH1302



## Mainio matkakumppani

Pienikokoinen ja kevyt

InnoSpire Mini on kannettava sumutin, jolla voit ottaa lääkkeesi milloin ja missä tahansa. Pienikokoinen InnoSpire Mini kulkee kätevästi mukanasasi, jotta sinä voit nauttia vapaudestasi.

### Kannettava

- Tasaisen laadukasta ja luotettavaa hoitoa
- Pienikokoinen ja kevyt

### Useita virransyöttövaihtoehtoja

- Mukana ladattava akku

### Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

- Mukana SideStream Plus -kestokäyttösumutin
- Lääkkeen hengittäminen vie 6–8 minuuttia\*
- Sopii yleisimmille sumutinlääkkeille

# Kohokohdat

# Tekniset tiedot

## Monipuolinen



Soveltuu monenlaisille sumutettaville lääkkeille useiden eri hengitystiesairauksien hoitoon.

## Satunnaiseen käyttöön



Suunniteltu satunnaiseen käyttöön (30 min käytössä / 30 min virta katkaistuna) sekä kotona että matkoilla. Philips InnoSpire Mini annostelee lääke aerosolin aina laadukkaasti, luotettavasti ja tasaisesti.

## Useita virransyöttövaihtoehtoja



InnoSpire Mini saa tehonsa joko verkkovirrasta tai ladattavasta litiumioniakusta, jonka yhdellä latauksella kompressorin toimii jopa 90 min. Liikkeellä ollessa InnoSpire Minin virtalähteenä voi käyttää myös 12 VDC:n autolaturia.

## Kannettava



InnoSpire Mini -kompressorisumutin annostelee tehokkaasti useimpia yleisiä lääke aerosoleja. Kannettavalla laitteella lääkkeenotto onnistuu helposti missä ja milloin tahansa.

## Tutkitusti tehokas sumutintekniikka



SideStream Plus annostelee lääkkeen nopeasti ja lyhentää hoitoaikaa, sillä sen venturimekanismi imee enemmän ilmaa sisään. Ainutlaatuinen vinoneliön muotoinen suutin kuluu vähemmän käytössä ja annostelee aerosolin tasaisen laadukkaasti.

## Hoitoaika



Hoitoaika lyhenee, sillä InnoSpire Mini annostelee lääkkeen nopeasti yhdessä SideStream-sumuttimen kanssa.

## Pakkauksen sisältö

Mukana: User Manual, InnoSpire Mini compressor

## Muotoilu

Elämäntyyliisi mukautuva sumutin:  
Rechargeable battery option

## Käyttöparametrit

Enimmäisvirtausnopeus: 8 LPM  
Enimmäispaine: 30 psi  
Käyttötila: Intermittent (30 min. on/off)

## Suorituskyky

MMAD: 4.77 µm  
Pienhiukkasosuus: 51.44% below 5 µm  
Akun latausaika: Approximately 6 hours  
Hoitokertoja latausta kohti: Up to 12 treatments\*  
Käyttöaika akun kanssa: Up to 90 minutes

## Varaosat

SideStream Plus: Every 6 months

## Tuotteen tiedot

Takuu: Battery: 6 months, Compressor: 3 years  
Käyttöääni: 58 ±4 dBA

