

PHILIPS

IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Lumea IPL 9900 Series

„SmartSkin“ jutiklis

4 išmanūs priedai: kūnui, veidui, bikinio sričiai, pažastims

Išskirtinės DI valdomos programos funkcijos

Naudojamas be laido ir su laidu



BRI976/00



Mūsų protingiausias IPL su išskirtinėmis „Skin AI“ funkcijomis

12 mėn. mėgautės glotnia oda be plaukelių*

Atraskite mūsų išmaniausią IPL sprendimą ilgai išliekančiai lygiai odai. Mūsų greičiausias akumuliatorinis „Lumea IPL“ įrenginys su „SenseIQ“ technologija dabar turi išskirtines „Skin AI“ funkcijas „Lumea IPL“ programėlėje, kad galėtumėte analizuoti savo odą ir stebėti pažangą.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Vienintelis „Lumea“ modelis be laido
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 4 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Išmanioji odos analizė su „SkinAI“

Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį



Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 8,5 min.

„SenseIQ“ technologija



„Lumea 9900“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaitys jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

Galima rinktis belaidį variantą



Siekiant didesnio patogumo, „Lumea 9900“ serija yra vienintelis IPL modelis be laido, kuris leidžia dar lengviau tiksliai pasiekti visas vietas ir naudoti jį bet kur, kur tik norite.

4 išmanieji priedai



Specialiai sukurti priedai puikiai priglundą prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Bikinio sritis ir pažastys: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.


Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Išskirtinės „SkinAI“ funkcijos

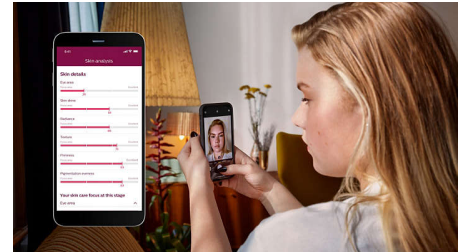

Mūsų nemokama instrukravimo programėlė siūlo nuoseklias gaires dabar su išskirtine „SkinAI“ technologija, skirta analizuoti jūsų odą ir stebėti plaukelių šalinimą.

Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Kūno procedūros priedas: Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm², Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui

Veido procedūros priedas: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

Tikslios procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm², Bikinio plotui ir pažastims pritaikyta procedūra

Bikini srities procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm², Jautriai bikini sričiai pritaikyta procedūra

Pažasties procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm², Pažastims pritaikyta procedūra

Taikymo sritys

Kūno sritys: Kojos, Pažastys, Pilvas, Rankoms

Veido sritys: Smakras, Viršutinė lūpa, Žandenos, Žandikaulio linija

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

Saugos žiedo sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos

atspalvį

„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojamas be laido ir su laidu

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Maitinimo sistema: Įkraunama baterija

Techniniai duomenys

Baterijos tipas: Įkraunama baterija

Maitinimas: W W

Įtampa: 100–240 V

Dažnis: Hz Hz

Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus****

Šviesos spektras: Kūno priedas > 570 nm,

Tikslus priedas > 600 nm

Šviesos srautas (J/cm²): 2–6,5 (priklauso nuo nustatymo)

Priedai

Kūno priedas (3 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Tikslus priedas (2 cm²): Skirta naudoti pažastų ir bikini srityje

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Priedas bikini sričiai (2 cm²): Specialus režimas bikini srities plaukams

Veidui skirtas priedas (2 cm²): Saugiai naudojamas veido srityje

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistruvus gaminį internetu per 90 dienų

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus krepšys

Adapteris: 19,5 V / 4000 mA

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Veidas: 1 min

Apatinė kojos dalis: 8,5 min.

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Pažastys: 2,5 min.

Bikini linija: 2 min.

Veido sritys: 1,5 min.

Apatinės kojų dalys: 8,5 min.

