

PHILIPS

IPL epilátor s funkcí
SenseIQ

Lumea IPL 9900
Series

Senzor SmartSkin

4 inteligentní nastavce: tělo,
obličej, bikini, podpaží

Exkluzivní funkce aplikace na
základě umělé inteligence

Použití s kabelem i bez něj



BRI976/00



Náš nejchytřejší systém IPL s exkluzivními funkcemi SkinAI

Užijte si 12 měsíců hladké pokožky bez chloupků*

Objevte naše dosud nejchytřejší IPL zařízení a užívejte si hladkou pokožku bez chloupků až 12 měsíců*. Nejrychlejší a neúčinnější bezdrátový přístroj Lumea IPL s technologií SenseIQ navíc přináší exkluzivní funkce SkinAI v aplikaci Philips Lumea IPL. Získejte personalizovanou analýzu pleti a průvodce ošetřením využívající umělou inteligenci (AI) pro ještě lepší výsledky a cílenou péči o pleť.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné, bezpečné a účinné použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Kompletní ošetření těla i obličeje se 4 chytrými nastavci
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ
- Personalizovaná analýza pleti pomocí SkinAI

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky



Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Technologie SenseIQ



Epilátor Lumea 9900 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nastavení přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Funguje i bezdrátově



Epilátor Lumea 9900 Series je naše jediné zařízení IPL s bezdrátovou funkcí pro ještě větší pohodlí. Snadněji se s ním dostanete přesně tam, kam potřebujete, a můžete ho používat kdekoli chcete.

4 chytré nastavení




Speciálně navržené nastavení jsou dokonale přizpůsobeny křivkám vašeho těla a po připojení spustí ten nejúčinnější program pro každou oblast. Obličej: Plochý design a malé okénko s UV filtrem. Tělo: Zakřivený směrem dovnitř s velkým okénkem. Linie bikin a podpaží: Zakřivený směrem ven pro obtížně dostupné oblasti.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula IPL epilátor Lumea pro snadné, bezpečné a efektivní použití v soukromí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Exkluzivní funkce SkinAI

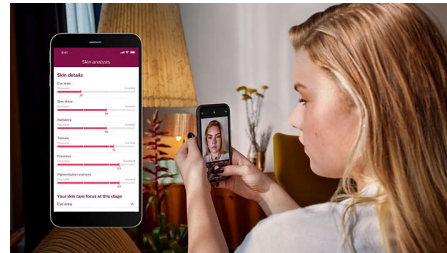

Naše bezplatná asistenční aplikace vám poskytne podrobné vedení. Nyní je navíc vybavena exkluzivní technologií SkinAI, díky které dovede analyzovat vaši pleť a sledovat redukci chloupků s využitím umělé inteligence (AI).

Pro většinu typů pokožky a chloupků



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pleti, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až tmavě hnědých odstínech pleti (I-V).

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Nástavec pro epilaci tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření na míru pro obličej: horní ret, brada a oblouk čelisti

Nástavec pro epilaci bikin: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro citlivou pokožku v oblasti bikin

Nástavec pro epilaci podpaží: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro oblast podpaží

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Použití s kabelem / bezdrátové: Použití s kabelem i bez něj

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Technické údaje

Napětí: 100–240 V

Typ baterie: Nabíjecí baterie

Vysoce výkonná lampa: Dlouhodobá výdrž, 450 000 záblesků pulzního světla, což odpovídá 39 letům životnosti lampy****

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Holeň: 8,5 min

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Oblast tváře: 1,5 min



* Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních: 86% na lýtkách, 70 % v oblasti třísel, 67 % v podpaží.

** Při dodržování plánu ošetření. Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.

*** Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.