

PHILIPS

IPL-ihokarvanpoistolaite,
jossa SenseIQ-teknikka

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-tunnistin

4 älykästä lisäosaa: vartalo,
kasvot, bikinialue, kainalat

Sovelluksen ainutlaatuiset
tekoälyä hyödyntävät
ominaisuudet

Johdottomaan ja johdolliseen
käyttöön



BRP958/00

Älykkäin IPL-laitteemme ja ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Tutustu älykkäimpään IPL-ratkaisuun, joka takaa pitkään sileänä pysyvän ihon. Nopein langaton Lumea IPL -laitteemme käyttää SenseIQ-teknikkaa ja tarjoaa Lumea IPL -sovelluksen ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet, jotka analysoivat ihoasi ja seuraavat edistymistäsi.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset
- Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärin kanssa

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – neljä älykästä lisäosaa
- Sileät kasvot ovat vain kahden vaiheen päässä kasvojen ihokarvojen poistolaitteen ansiosta
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-teknikan ansiosta
- Älykäs ihoanalyysi SkinAI:n avulla

Lumea IPL 9900 Series

IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniiikka

BRP958/00

Kohokohdat

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa




Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.

SenseIQ-tekniiikka



Lumea 9900 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa

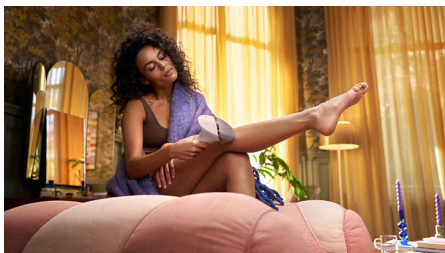

Philips Lumea -laitteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuret ihoalueet kuten jalat saa käsiteltyä nopeasti, kun

laite on kytkettynä verkkovirtaan. Akkukäyttöisenä laitteella taas saa helposti käsiteltyä hankalatkin paikat tarkasti.

Neljä älykästä lisäosaa




Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Bikinialue ja kainalot: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa




Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet

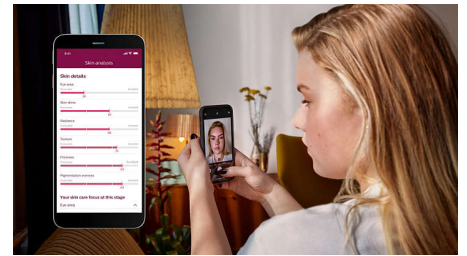

Maksuton opastussovelluksemme antaa vaiheittaiset ohjeet ja hyödyntää ainutlaatuista SkinAI-tekniiikkaa, joka analysoi ihoa ja seuraa karvankasvun vähenemistä.

Mukana kasvojen ihokarvojen poistolaite

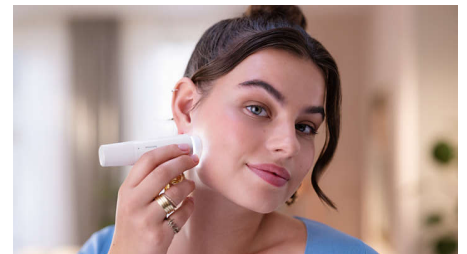

Lumea IPL 9900 -sarjan mukana tulee Philipsin uusi kasvojen ihokarvojen poistolaite. Nyt voit poistaa haituvat helposti ja turvallisesti ennen Lumean käyttämistä.

Useimmille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm², Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: sääret, käsivarret ja vatsa
Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², Iisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja
Bikininirajojen lisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Herkälle bikinialueelle suunniteltu käsittelyohjelma
Kainalolisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta
5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn
SmartSkin-tunnistin: Kertoo tarvittaessa oikean asetuksen

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn
Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn
Johdoton / johdollinen käyttö: Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Jännite: 100–240 V
Akun/pariston tyyppi: Ladattava akku
Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikää****

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas
Tallennustila: Ylellinen säilytyspussi
Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Sääri: 8,5 min
Kainalog: 2,5 min
Bikininirajat: 2 min
Kasvot: 1,5 min

