

PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

4 inteligentna dodatka; telo, lice,
bikini, pazuh

Ekskluzivne funkcije aplikacije
sa veštačkom inteligencijom

Bežična i žična upotreba



BRI976/00



Naš najpametniji IPL sa ekskluzivnim funkcijama SkinAI

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dljučica*

Saznajte više o našem najpametnijem IPL rešenju do sada da biste uživali u dugotrajno glatkoj koži. Naš najbrži bežični uređaj Lumea IPL sa tehnologijom SenseIQ sada poseduje ekskluzivne funkcionalnosti SkinAI u aplikaciji Lumea IPL za analizu kože i praćenje napretka.

Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate
- Jedini aparat Lumea sa bežičnim varijantom
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu

Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 4 pametna dodatka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

Personalizovani tretman uklanjanja dljučica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pametna analiza kože sa tehnologijom SkinAI

Važne karakt.

2 puta mesečno za brze rezultate




Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 9900 ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagodavaju tretman svakom delu tela.

Bežično, ukoliko želite

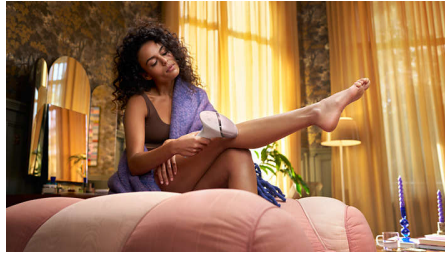

Za dodatnu praktičnost, aparat Lumea serije 9900 je naš jedini IPL uređaj sa bežičnim radom, što čini lakšim da sa preciznošću dosegnete bilo gde i koristite ga na bilo kom mestu.

4 pametna dodatka



Posebno dizajnirani dodaci savršeno prate oblik vašeg tela i aktiviraju najefikasnije programe za svaki deo tela kada su povezani. Lice: ravan dizajn sa prozorčićem sa UV filterom. Telo: zakrivljen ka unutra sa velikim prozorom. Bikini zona i pazuh: zakrivljen ka spolja za teško dostupna mesta.


Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu

potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

Ekskluzivne SkinAI funkcionalnosti

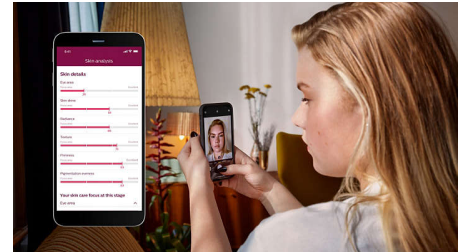

Naša besplatna aplikacija za obuku nudi postupna uputstva sada uz ekskluzivnu SkinAI tehnologiju kako bi analizirala vašu kožu i pratila smanjenje rasta dlačica.

Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I–V).

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za tretman tela: Oblik: ispučen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

Dodatak za tretman lica: Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

Dodatak za tretman bikini zone: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman osjetljive bikini zone

Dodatak za pazuh: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3cm², Prilagođeni tretman pazuha

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Senzor nijanse kože: Detektuje nijansu kože
Senzor SmartSkin: Prava podešavanja kad poželite

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za brzu primenu

Na baterije / preko kabla: Bežična i žična upotreba

Prislanjanje i blicanje: Za tretman malih područja

Tehničke specifikacije

Tip baterije: Punjiva baterija

Napon: 100-240 V

Lampa visokih performansi: Dizajnirana da dugo traje, pruža 450.000 bljesaka, što je jednako 39 godina radnog veka lampe****

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Korisnički priručnik

Skladištenje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vreme primene

Potkolenica: 8,5 min

Pazuh: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Delovi lica: 1,5 min



* Prosečno smanjenje rasta dlačica nakon 12 tretmana: 86% na potkolenicama, 70% u bikini zoni, 67% na pazuhu

** Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine