

# PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje  
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

4 inteligentna dodatka; telo, lice,  
bikini, pazuh

Ekskluzivne funkcije aplikacije  
sa veštačkom inteligencijom

Bežična i žična upotreba



BRI977/00



## Naš najpametniji IPL sa ekskluzivnim funkcijama SkinAI

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dljučica\*

Saznajte više o našem najpametnijem IPL rešenju do sada da biste uživali u dugotrajno glatkoj koži. Naš najbrži bežični uređaj Lumea IPL sa tehnologijom SenseIQ sada poseduje ekskluzivne funkcionalnosti SkinAI u aplikaciji Lumea IPL za analizu kože i praćenje napretka.

### Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate
- Jedini aparat Lumea sa bežičnim varijantom
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu

### Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 4 pametna dodatka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

### Personalizovani tretman uklanjanja dljučica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pametna analiza kože sa tehnologijom SkinAI

# Važne karakt.

## 2 puta mesečno za brze rezultate




Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.

## Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 9900 ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagodavaju tretman svakom delu tela.

## Bežično, ukoliko želite

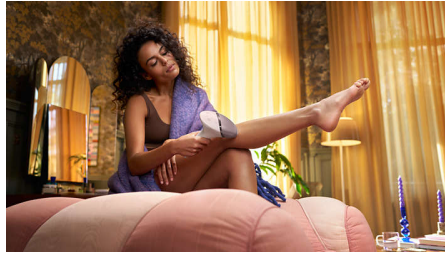

Za dodatnu praktičnost, aparat Lumea serije 9900 je naš jedini IPL uređaj sa bežičnim radom, što čini lakšim da sa preciznošću dosegnete bilo gde i koristite ga na bilo kom mestu.

## 4 pametna dodatka



Posebno dizajnirani dodaci savršeno prate oblik vašeg tela i aktiviraju najefikasnije programe za svaki deo tela kada su povezani. Lice: ravan dizajn sa prozorčićem sa UV filterom. Telo: zakrivljen ka unutra sa velikim prozorom. Bikini zona i pazuh: zakrivljen ka spolja za teško dostupna mesta.


## Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu

potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

## Ekskluzivne SkinAI funkcionalnosti

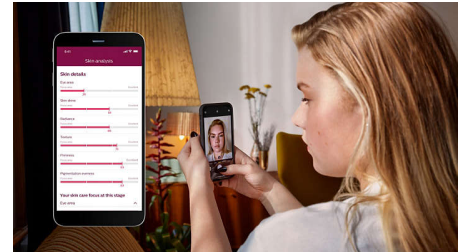

Naša besplatna aplikacija za obuku nudi postupna uputstva sada uz ekskluzivnu SkinAI tehnologiju kako bi analizirala vašu kožu i pratila smanjenje rasta dlačica.

## Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I–V).

# Specifikacije

## Tehničke specifikacije dodataka

**Dodatak za tretman tela:** Oblik: ispuščen, Veličina prozora: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

**Dodatak za tretman lica:** Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>, dodatni filter, Prilagođeni tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

**Dodatak za tretman bikini zone:** Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman osjetljive bikini zone

**Dodatak za pazuh:** Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman pazuha

## Bezbednosne i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filter:** Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

**5 postavki svetlosti:** Prilagodljivo tipu kože

**Ugrađeni bezbednosni sistem:** Sprečite slučajno blicanje

**Senzor nijanse kože:** Detektuje nijansu kože

**Senzor SmartSkin:** Prava podešavanja kad poželite

## Režim korišćenja

**Klizanje i blicanje:** Za brzu primenu

**Na baterije / preko kabla:** Bežična i žična upotreba

**Prislanjanje i blicanje:** Za tretman malih područja

## Tehničke specifikacije

**Tip baterije:** Punjiva baterija

**Napon:** 100-240 V

**Lampa visokih performansi:** Dizajnirana da dugo traje, pruža 450.000 bljesaka, što je jednako 39 godina radnog veka lampe\*\*\*\*

## Servis

**Garancija:** 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

## Predmeti koji se isporučuju

**Uputstva za upotrebu:** Korisnički priručnik

**Skladištenje:** Luksuzna torbica

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Vreme primene

**Potkolenica:** 8,5 min

**Pazuh:** 2,5 min

**Bikini zona:** 2 min

**Delovi lica:** 1,5 min

