

PHILIPS

IPL matiņu likvidēšanas
ierīce ar SenselQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin sensors

4 intelektiskas papildierīces:
ķermenim, sejai, bikini zonai,
padusēm

Ekskluzīvas lietotnes funkcijas,
kuru darbību nodrošina
mākslīgais intelekts

Lietošana bez vada un ar vadu



BRI976/00



Mūsu viedākais IPL ar ekskluzīvām SkinAI funkcijām

Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 12 mēnešus*

Atklājiet mūsu viedāko IPL risinājumu ilgstoši gludai ādai. Mūsu ātrākā bezvadu Lumea IPL ierīce ar SenselQ tehnoloģiju tagad ir ar ekskluzīvām SkinAI funkcijām Lumea IPL lietotnē, lai analizētu jūsu ādu un sekotu jūsu progresam.

Maigs un efektīvs process ilgstoši gludas ādas nodrošināšanai

- Ātrs rezultāts, veicot procedūru tikai ik pēc 2 nedēļām
- For convenience with corded and cordless options
- Radīta kopā ar dermatologiem, lai lietošana būtu ērta un efektīva

Pilnīgs risinājums sejai un ķermenim


- Visaptverošs risinājums sejas un ķermeņa procedūrām ar 4 viediem uzgaļiem
- Piemērota vairākumam ādas un matu toņu

Personalizēta IPL matiņu likvidēšana

- Saudzējoša un ērta lietošana ar SenselQ
- Vieda ādas analīze ar SkinAI

Izceltie produkti

2 reizes mēnesī, lai ātri iegūtu rezultātus

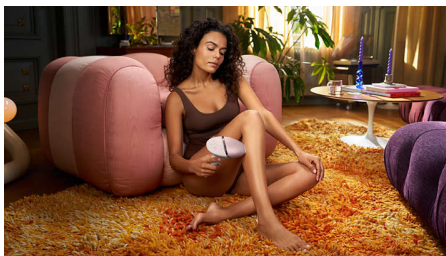


Sāciet ar 4 procedūrām tikai ik pēc 2 nedēļām — uz pusi mazāk procedūru nekā ar citu zīmolu ierīcēm. Lai uzturētu efektu, pēc tam nepieciešama profilakse reizi mēnesī.

SenselQ tehnoloģija



Ierīcei Lumea 9900 Series ir pieci ērti pielāgojami gaismas iestatījumi. Sensors SmartSkin nosaka ādas toni un palīdz noteikt ērtāko iestatījumu. Viedie uzgaļi pielāgo procedūru katrai ķermeņa zonai atsevišķi.

Ērtai lietošanai ar vadu un bez vada

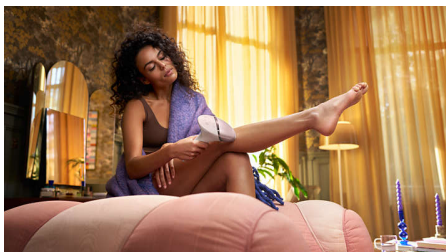

Philips Lumea ierīce ir izstrādāta ērtai un vieglai lietošanai. Lietojiet šo ierīci ar vadu ātrai lielāku tādu ķermeņa zonu kopšanai kā kājas,

vai izmantojiet bezvada akumulatora režīmu, lai precīzi apkoptu grūti aizsniedzamas ķermeņa zonas.

4 viedie uzgaļi




Īpaši izstrādāti uzgaļi nevainojami pielāgojas ķermeņa formai un, nonākot saskarē ar ķermeņa zonu, aktivizē katrai tai piemērotāko programmu. Sejai: uzgaļis ar gludu konstrukciju un nelielu lodziņu ar ultravioletā starojuma aizsargfiltru. Ķermenim: uz iekšpusi ieliekts uzgaļis ar lielu lodziņu. Bikini un padušu zonai: uz ārpusi izliekts uzgaļis grūti sasniedzamām zonām.

Radīta kopā ar dermatologiem



Veselības aprūpes tehnoloģiju nozares līderis Philips izstrādāja ierīci Lumea IPL sadarbībā ar dermatologiem, lai ierīci varētu ērti, efektīvi un droši lietot mājas apstākļos. Ierīce Lumea IPL ir izstrādāta, izmantojot profesionālos salonos izmantoto tehnoloģiju, tādēļ nodrošina saudzējošas procedūras arī jutīgās zonās.

Ekskluzīvas SkinAI funkcijas

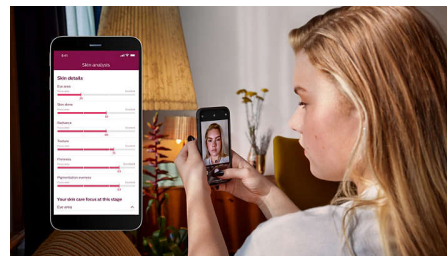

Mūsu bezmaksas apmācību lietotne piedāvā pakāpeniskus norādījumus kopā ar SkinAI tehnoloģiju, analizē ādu un seko līdzi matiņu noņemšanas procesam.

Piemērota vairākumam ādas un matu tipu



IPL ierīču darbībai ir nepieciešams kontrasts starp mata pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc to var izmantot dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiem un uz gaišas līdz tumši brūnas ādas (I–V).

Specifikācijas

Pievienoto piederumu tehniskās specifikācijas

Ķermeņa apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz ārpusi, Loga izmērs: 4,1 cm2, Ķermenim piemērota procedūra: kājas, rokas un vēders

Sejas apstrādes papildpiederums: Forma: plakans, Loga izmērs: 2 cm2, papildu filtrs, Sejai piemērota procedūra: augšlūpa, zods un žokļa līnija

Bikini apstrādes papildpiederums: Forma: izliekts uz iekšpusi, Lodziņa izmērs: 3 cm2, Jūtīgai bikini zonai piemērota procedūra

Papildpiederums padušu zonas apstrādei: Forma: izliekts uz iekšpusi, Loga izmērs: 3 cm2, Padušu zonai piemērota procedūra

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu
5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījuma norādījums pēc pieprasījuma

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Paslīdināt un izgaismot): Ātrai izmantošanai

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Nelielu zonu apstrādei

Lietošana ar vadu/bez vada: Lietošana bez vada un ar vadu

Tehniskā specifikācija

Akumulatora tips: Uzlādējams akumulators

Spriegums: 100–240 V

Augstas veiktspējas lampa: Ilgstošai darbībai, 450 000 mirgošanas reizes, kas atbilst 39 gadu lampas kalpošanas laikam****

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un 1 papildu garantijas gads pēc produkta registrācijas 90 dienu laikā

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Eleganta somiņa

Adapteris: 19,5V/4000 mA

Lietošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8,5 min

Padušu zonas: 2,5 min

Bikini līnija: 2 min

Sejas zonas: 1,5 min

