

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische Schallzahnbürste  
- Praxismodell

EasyClean

1 Putzprogramm

2 Bürstenköpfe

HX6513/09



## Gesundes Zahnfleisch in 2 Wochen

Der Wechsel von einer herkömmlichen Zahnbürste leicht gemacht

Philips Sonicare EasyClean kombiniert unsere patentierte Sonicare Zahnbürstentechnologie mit dem ProResults Bürstenkopf für gesundes Zahnfleisch, um bis zu 6 Mal mehr Plaque zu entfernen\*. Sie bietet eine effektive Lösung, um die frühen Anzeichen einer Zahnfleischerkrankung zu verhindern und zu reduzieren.

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Funktion
- Aufladeanzeige

### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- 4-Quadranten-Timer
- 2-Minuten-Timer

### Hervorragende Reinigung

- Für gesünderes Zahnfleisch
- Patentierte Sonicare Schallechnologie
- Exklusive Bonusartikel nur für Zahnmediziner verfügbar

# Besonderheiten

## Zusätzliche Artikel, die nicht im Einzelhandel verkauft werden



Jetzt können Sie einen exklusiven Philips Sonicare EasyClean Bonusartikel anbieten, den Ihre Patienten nur bei Ihnen erhalten, für eine verbesserte Zahnfleischpflege. Das Paket wurde speziell für die Bedürfnisse von Patienten in Zahnarztpraxen wie Ihrer entwickelt und enthält 1 zusätzlichen ProResults Bürstenkopf für gesundes Zahnfleisch.

## Eine sanfteres Putzerlebnis



Dieser Philips Sonicare Aufsteckbürstenkopf verfügt über eng stehende, hochwertige Borsten zur effektiven Plaque-Entfernung und für ein gesünderes Zahnfleisch. Speziell gebogene Borsten erreichen mühelos die


Backenzähne hinten im Mund. Darüber hinaus schont das Borstenprofil die Zähne und sorgt so für eine besonders sanfte Reinigung.

## Sonicare Schalltechnologie




Dank des dynamischen Flüssigkeitseffekts werden Zahnpasta und Speichel in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

## Easy-Start-Funktion

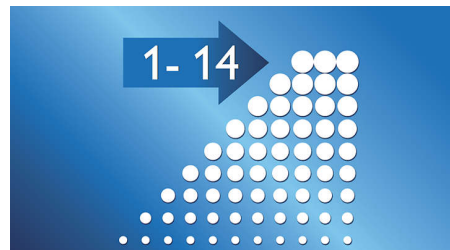

Erhöht die Putzintensität langsam über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der Sonicare Schallzahnbürste.

## 4-Quadranten-Timer

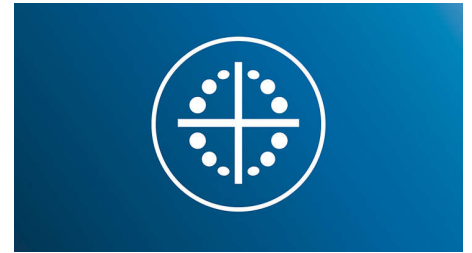

Der 30-Sekunden-Intervall-Timer gewährleistet gründliches Bürsten aller vier Quadranten im Mund.

## 2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

## Aufladeanzeige

Die Anzeige blinkt, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass der Akku aufgeladen werden muss.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Türkis

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Handstücke:** 1 EasyClean

**Reiseetui:** 1

**Bürstenköpfe:** 2 ProResults gesundes Zahnfleisch

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 6x mehr Plaque\*

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen\*

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Weißer Zähne:** Entfernt effektiv Verfärbungen

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

