

PHILIPS

Epilator IPL cu
SenseIQ

Lumea Seria 9900

3 accesorii: corp, față, precizie

Utilizare cu și fără fir

450.000 de impulsuri

Aplicație Lumea SkinAI exclusivă



BRI973/00

Cea mai inteligentă gamă Lumea IPL cu funcții SkinAI exclusive

Bucură-te de 12 luni de piele fină, fără păr*

Descoperă cea mai inteligentă soluție IPL de până acum, pentru o piele fină timp îndelungat. Cea mai rapidă gamă Lumea IPL, fără fir și cu tehnologie SenseIQ, este dotată acum cu funcții exclusive SkinAI disponibile în aplicația Lumea IPL, pentru a analiza pielea și a monitoriza progresul.

Delicat și eficient pentru piele fină de lungă durată

- Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună
- Singurul aparat Lumea cu opțiune fără fir
- Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi ușor și eficient

Soluție completă pentru față și corp

- Soluție completă pentru față și corp cu 3 accesorii inteligente
- Adecvat pentru majoritatea tonurilor pielii și culorilor părului

Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului

- Delicat și confortabil cu SenseIQ
- Funcție inteligentă de analiză a pielii cu SkinAI

Repere

De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide



La fiecare 2 săptămâni pentru a începe – aceasta înseamnă jumătate din numărul de tratamente de la alte mărci. Urmată de retușuri doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea ambelor gambe durează 8,5 minute.

Tehnologie SenseIQ



Lumea seria 9900 are cinci setări de lumină ușor de reglat. Senzorul SmartSkin îți citește nuanța pielii și te ajută să găsești setarea cea mai confortabilă. Accesoriile inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.

Fără fir, dacă dorești



Pentru mai mult confort, Lumea seria 9900 este singurul nostru aparat IPL cu funcționalitate fără fir, ceea ce face și mai ușor să ajungi oriunde cu precizie și să îl folosești de oriunde dorești.

3 accesorii inteligente



Accesoriile special concepute se potrivesc perfect curbilor corpului și declanșează cele mai eficiente programe pentru fiecare zonă a corpului atunci când sunt conectate. Față: Design plat și fereastră mică cu filtru UV. Corp: Curbat spre interior cu o fereastră mare. Precizie: Curbat spre exterior pentru zonele greu accesibile.


Dezvoltată împreună cu dermatologi



Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a dezvoltat Lumea IPL în consultare cu dermatologi, pentru utilizare ușoară și eficientă

în siguranța casei tale. Derivat din tehnologia utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL oferă un tratament delicat, chiar și în zonele sensibile.

Caracteristici exclusive SkinAI

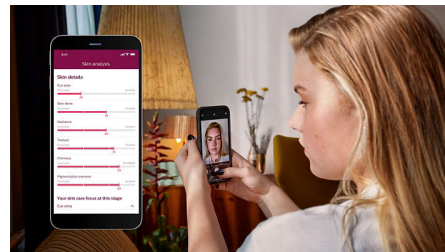

Aplicația noastră gratuită de instruire oferă acum îndrumări pas cu pas cu ajutorul tehnologiei exclusive SkinAI pentru a analiza pielea și a urmări reducerea pilozității.

Potrivit pentru majoritatea tipurilor de piele și păr



Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului și pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcționează pe părul natural blond închis, castaniu și negru și cu tonuri ale pielii de la nuanțe deschise până la maro închis (I-V).

Specificații

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru tratamentul corpului: Formă: curbat convex, Dimensiunea ferestrei: 4,1 cm², Tratament adaptat pentru corp: picioare, brațe și abdomen

Accesoriu pentru tratamentul feței: Formă: plat, Dimensiunea ferestrei: 2 cm², filtru suplimentar, Tratament adaptat pentru față: buza superioară, bărbie și maxilar

Accesoriu pentru tratament de precizie: Formă: curbat concav, Dimensiunea ferestrei: 3 cm², Tratament adaptat pentru zona inghinală și zona axilară

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Senzor ton de piele: Detectează nuanța pielii tale

Senzor SmartSkin: Setarea corectă la cerere

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Utilizare cu cablu / fără fir: Utilizare cu și fără fir

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

Specificații tehnice

Tensiune: 100-240 V

Tip baterie: Baterie reîncărcabilă

Lampă cu performanță ridicată: Conceput pentru a dura, 450.000 pulsații, echivalent a 39 de ani de durată de viață a lămpii****

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție globală + 1 an suplimentar de garanție la înregistrarea produsului în termen de 90 de zile

Articole incluse

Instructiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă de lux

Adaptor: 19,5 V/4000 mA

Timp de aplicare

Membrului inferior: 8,5 min

Zonele axilare: 2,5 min

Zona inghinală: 2 min

Zonele feței: 1,5 min



* Reducerea medie a părului după 12 tratamente: 86 % pe picioare, 70 % pe linia bikinilor, 67 % pe axile

** La urmarea unui program de tratament. Calculată pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară și pe față. Durata de viață a lămpii nu prelungește durata de 2 ani a garanției internaționale Philips