

PHILIPS

IPL fotoepilaator
SenselQ-ga

Lumea IPL 9900
Series

SmartSkin-andur

4 nutikat tarvikut: kehale, näole,
bikiinipiirkonnale, kaenlaalustele

Tehisintellektiga rakenduse
eksklusiivsed funktsioonid

Kasutatav nii juhtmeta kui ka
juhtmega



BRI977/00



Nutikaim IPL lahendus eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega

Nautige siledat karvavaba nahka 12 kuud*

Avastage meie kõigi aegade nutikaim IPL lahendus kauakestva sileda naha jaoks. Meie kiireim juhtmevaba Lumea IPL seade koos SenselQ tehnoloogiaga on nüüd Lumea IPL rakenduses varustatud eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega, et analüüsida teie nahka ja jälgida teie edusamme.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused ainult kaks korda kuus kasutamisel
- Ainuke juhtmeta kasutamise võimalusega Lumea
- Lihtsuse ja tõhususe tagamiseks töötatud välja koos dermatoloogidega

Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 4 nutika tarvikuga
- Sobib enamikule naha- ja karvatoonidele

Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Õrn ja mugav SenselQ-ga
- Nutikas nahaanalüüs SkinAI abil

Esiletõstetud tooted

Kaks korda kuus tagab kiired tulemused




Alustuseks iga kahe nädala järel – poole vähem hoolduskordi kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb viimistlus üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulu 8,5 minutit.

SenseIQ tehnoloogia



Lumea 9900 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseseadet. Meie andur SmartSkin loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige mugavama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.

Soovi korral juhtmeta

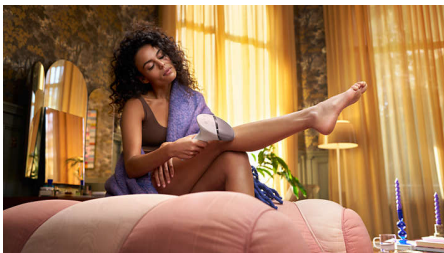

Eriti mugavaks kasutamiseks on Lumea 9900 seeria meie ainus IPL, millel on juhtmeta kasutamise funktsioon. Tänu sellele

funktsioonile on veelgi lihtsam ulatuda kõikjale ja töötada täpselt – ning saate seadet kasutada kõikjal, kus soovite.

4 nutikat tarvikut




Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näootsak: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötlusalaga. Bikiiniipiirkonna ja kaenlaaluste otsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Töötatud välja koos dermatoloogidega



Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõtteks töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Eksklusiivsed SkinAI funktsioonid

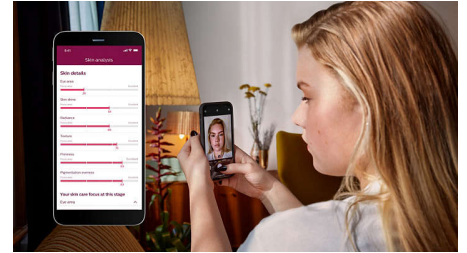

Meie tasuta rakendus tagab üksikasjalikud juhised koos eksklusiivse SkinAI tehnoloogiaga, mis võimaldab nahka analüüsida ja karvade vähenemist jälgida.

Enamiku naha- ja karvatüüpide jaoks



IPL vajab kontrasti karvapigmenti ja nahapigmenti vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel karvadel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I–V).

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed, lisad

Kehakarvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 4,1 cm², Spetsiaalne hooldus kehale: jalad, käed ja kõht

Näokarvade eemaldustarvik: Kuju: lame, Töötlusala suurus: 2 cm², lisafilter, Spetsiaalne hooldus näole: ülahuul, lõug ja lõuajoon

Bikiinipiirkonna karvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm², Spetsiaalne hooldus tundlikule bikiinipiirkonnale

Kaenlaaluste karvade eemaldustarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm², Spetsiaalne hooldus kaenlaalustele

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Nahatooniaandur: Tuvastab teie nahatooni

Andur SmartSkin: Vajadusele vastav seadistus

Kasutusrežiim

Libista ja välguta: Kiireks kasutamiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Kasutatakse nii juhtmeta kui ka juhtmega

Markeeri ja välguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Tehnilised andmed

Aku tüüp: Laetav aku

Pinge: 100–240 V

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 450 000 välgatust, mis vastab lambi 39-aastasele tööeale****

Teenindus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Hoiundamine: Luksuslik vutlar

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Kasutusaeg

Sääreosa: 8,5 min

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiinjoon: 2 minutit

Näopiirkonnad: 1,5 min

