

PHILIPS



IPL-ihokarvanpoistolaite,
jossa SenseIQ-tekniikka

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-tunnistin

4 älykästä lisäosaa: vartalo,
kasvot, bikinialue, kainalat

Sovelluksen ainutlaatuiset
tekoälyä hyödyntävät
ominaisuudet

Johdottomaan ja johdolliseen
käyttöön



BRI977/00

Älykkäin IPL-laitteemme ja ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Tutustu älykkäimpään IPL-ratkaisuun, joka takaa pitkään sileänä pysyvän ihon. Nopein langaton Lumea IPL -laitteemme käyttää SenseIQ-tekniikkaa ja tarjoaa Lumea IPL -sovelluksen ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet, jotka analysoivat ihoasi ja seuraavat edistymistäsi.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa
- Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärin kanssa

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – neljä älykästä lisäosaa
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta
- Älykäs ihoanalyysi SkinAI:n avulla

Lumea IPL 9900 Series

IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniiikka

BRI977/00

Kohokohdat

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa



Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.

SenseIQ-tekniiikka



Lumea 9900 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa



Philips Lumea -laitteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuret ihoalueet kuten jalat saa käsiteltyä nopeasti, kun

laite on kytkettynä verkkovirtaan. Akkukäyttöisenä laitteella taas saa helposti käsiteltyä hankalatkin paikat tarkasti.

Neljä älykästä lisäosaa




Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Bikinialue ja kainalot: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa



Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet

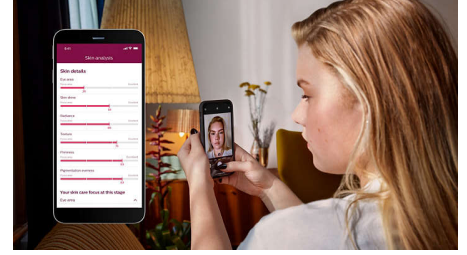

Maksuton opastussovelluksemme antaa vaiheittaiset ohjeet ja hyödyntää ainutlaatuista SkinAI-tekniiikkaa, joka analysoi ihoa ja seuraa karvankasvun vähenemistä.

Useimmille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm², Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: sääret, käsivarret ja vatsa

Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja
Bikininirajojen lisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Herkälle bikinialueelle suunniteltu käsittelyohjelma
Kainalolisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta
5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn

SmartSkin-tunnistin: Kertoo tarvittaessa oikean asetuksen

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Jännite: 100–240 V

Akun/pariston tyyppi: Ladattava akku

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikää****

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Tallennustila: Ylellinen säilytyspussi

Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Sääri: 8,5 min

Kainalog: 2,5 min

Bikininirajat: 2 min

Kasvot: 1,5 min

