

# PHILIPS

IPL-ihokarvanpoistolaite,  
jossa SenseIQ-tekniikka

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-tunnistin

3 älykästä lisäosaa: vartalo,  
kasvot, tarkkuusajo

Sovelluksen ainutlaatuiset  
tekoälyä hyödyntävät  
ominaisuudet

Johdottomaan ja johdolliseen  
käyttöön

BRI973/00



## Älykkäin IPL-laitteemme ja ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan\*

Tutustu älykkäimpään IPL-ratkaisuamme, joka takaa pitkään sileänä pysyvän ihon. Nopein langaton Lumea IPL -laitteemme käyttää SenseIQ-tekniikkaa ja tarjoaa Lumea IPL -sovelluksen ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet, jotka analysoivat ihoasi ja seuraavat edistymistäsi.

### Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Ainoa johdoton Lumea-laite
- Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa

### Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle


- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kolme älykästä lisäosaa
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

### Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Älykäs ihoanalyysi SkinAI:n avulla
- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta


## Kohokohdat

### Ainutlaatuiset SkinAI-ominaisuudet

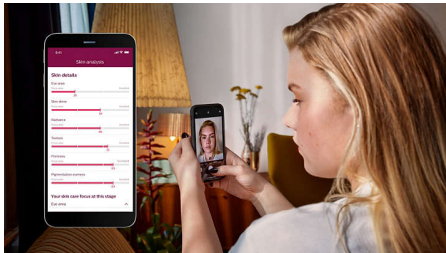


Maksuton opastussovelluksemme antaa vaihteittaiset ohjeet ja hyödyntää ainutlaatuista SkinAI-teknikkaa, joka analysoi ihoa ja seuraa karvankasvun vähenemistä.

### Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa

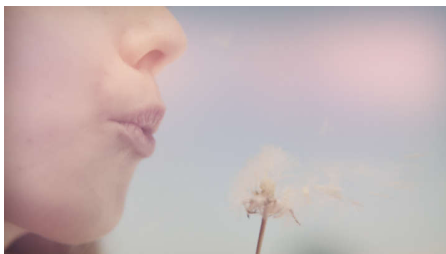

Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL - ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

### Kolme älykästä lisäosaa

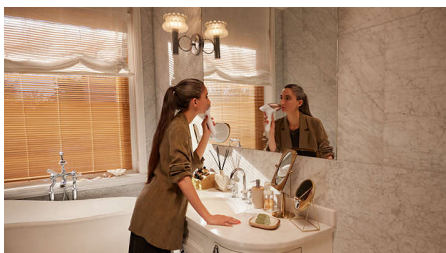

Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman

kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Tarkkuutta vaativat alueet: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

### Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa




Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.

### SenseIQ-teknikka




Lumea 9900 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

### Halutessasi langaton

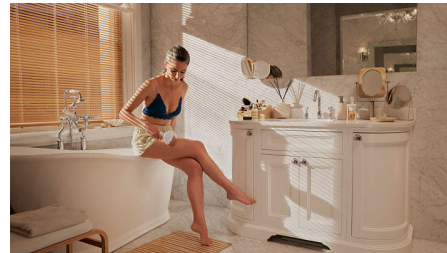

Lumea 9900 -sarjan IPL-laite on ainoa johdoton IPL-laitteemme. Sen avulla ihoalueiden tarkka käsittely on entistä helpompaa, ja voit käyttää laitetta kätevästi missä vain.

### Useimmille iho- ja karvatyypeille

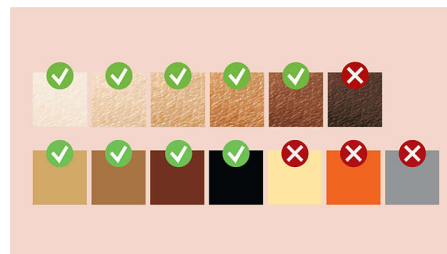

IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

# Tekniset tiedot

## Lisäosien tekniset tiedot

**Vartalolisäosa:** Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm<sup>2</sup>, Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: sääret, käsivarret ja vatsa

**Kasvolisäosa:** Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm<sup>2</sup>, lisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja

**Tarkkuuslisäosa:** Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm<sup>2</sup>, Bikinialueelle ja kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

## Turvallisuus ja säädettävät asetukset

**Integroitu UV-suodatin:** Suojaa ihoa UV-valolta

**5 valotehoasetusta:** Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

**Integroitu turvajärjestelmä:** Estää tahattomat välähdykset

**Ihon sävyn tunnistin:** Havaitsee ihon sävyn

**SmartSkin-tunnistin:** Oikea asetus tarpeen mukaan

## Käyttötila

**Liuku ja välähdys:** Nopeaan käsittelyyn

**Johdoton / johdollinen käyttö:** Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

**Leima ja välähdys:** Pienten alueiden käsittelyyn

## Tekniset tiedot

**Akun/pariston tyyppi:** Ladattava akku

**Jännite:** 100–240 V

**Tehokas lamppu:** Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikä\*\*\*\*

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

## Pakkauksen sisältö

**Käyttöohjeet:** Käyttöopas

**Säilytys:** Ylellinen säilytyspussi

**Sovitin:** 19,5 V / 4 000 mA

## Käyttöaika

**Sääri:** 8,5 min

**Kainalot:** 2,5 min

**Bikininirajat:** 2 min

**Kasvat:** 1,5 min

