

# PHILIPS

Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

1 pametni nastavek: za telo

Aplikacija Lumea IPL

Uporaba s kablom



BRI940/00



## Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ

Uživajte v svilnato gladki koži kar 12 mesecev\*

Uživajte v hitrem in prilagojenem tretmaju z našim izdelkom Lumea IPL serije 8000. Tehnologija SenseIQ s pametnimi nastavki in aplikacijo Lumea IPL poskrbi za dolgotrajno gladko kožo.

### Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Za hitre rezultate sta dovolj samo 2 tretmaja mesečno
- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost
- Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

### Celovita rešitev za obraz in telo

- Rešitev za telo z 1 pametnim nastavkom
- Primerno za večino odtenkov kože in barv dlačic

### Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ
- Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL

# Značilnosti

## 2 tretmaja na mesec za hitre rezultate



Vsaka 2 tedna za začetek – to je pol manj tretmajev v primerjavi z aparati drugih znamk. Sledijo hitra urejanja samo enkrat na mesec. To je vse. Tretma spodnjih delov nog traja 8,5 minute.

## Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 8000 ima pet nastavitvev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtenek kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitvev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.

## Zelo dolg kabel



Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.

## 1 pametni nastavek



Posebej zasnovan nastavek je ukrivljen navznoter za optimalen stik s kožo pri tretmaju večjih predelov, kot so noge. Po priključitvi se sproži prilagojen program.


## Razvito v sodelovanju z dermatologi



Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z

dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

## Aplikacija Philips Lumea IPL

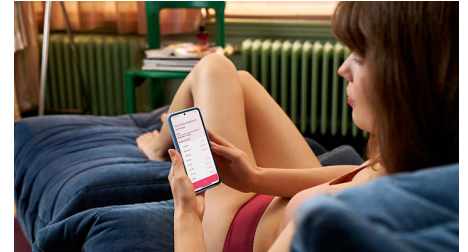

Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se rasporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.

## Za večino vrst kože in dlacic



Tehnologija IPL deluje na podlagi kontrasta med pigmentom v barvi dlacic in pigmentom v odtenku kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlacicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenkih kože od svetlega do temno rjavega (I-V).

# Specifikacije

## Tehnični podatki za nastavke

**Nastavek za telo:** Oblika: konveksno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagojen program za telo: noge, roke in trebuh

## Varnost in prilagodljive nastavitve

**Vgrajen UV-filtr:** Kožo varuje pred UV-svetlobo

**5 nastavitve svetlobne energije:** Prilagodljivo glede na vrsto kože

**Vgrajeni varnostni sistem:** Preprečuje nenamerno osvetljevanje

**Senzor barve kože:** Zazna barvo kože.

**Senzor SmartSkin:** Prava nastavek na ukaz

## Način uporabe

**Pomik in osvetlitev:** Za hitro uporabo

**Žična/brezžična uporaba:** Uporaba s kablom

**Pritisni in osvetli:** Za uporabo na manjših predelih

## Tehnične specifikacije

**Napetost:** 100–240 V

**Visokozmogljiva sijalka:** Zdržljivo zasnovano za 450.000 osvetlitev, kar je enakovredno 39-letni življenjski dobi sijalke\*\*

## Servis

**Garancija:** 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

## Priloženi predmeti

**Navodila za uporabo:** Uporabniški priročnik

**Shranjevanje:** Kozmetična torbica

**Napajalnik:** 19,5 V/4000 mA

## Čas uporabe

**Pazduhe:** 2,5 min

**Predel bikinija:** 2 min

**Spodnji del nog:** 8,5 min

