

PHILIPS

Фотоепилатор за
обезкосмяване със SenselQ

Lumea IPL 9900 Series

Сензор SmartSkin

4 интелигентни приставки: за тяло,
лице, бикини зона и подмишници

Ексклузивни функции на
приложения с изкуствен интелект

Използване без кабел и с кабел



BRI977/00



Най-интелигентният ни фотоепилатор с ексклузивните функции SkinAI

Насладете се на гладка кожа без косъмчета в продължение на 12 месеца*

Открийте нашия най-интелигентен фотоепилатор за дълготрайно гладка кожа. Нашият най-бърз безкабелен фотоепилатор Philips Lumea с технология SenselQ вече разполага с ексклузивни функции на SkinAI в приложението Lumea IPL, за да анализира кожата ви и да проследява напредъка ви.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- За удобство с кабелни и безкабелни опции
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен

Пълно решение за лицето и тялото


- Пълно решение за лицето и тялото с 4 интелигентни приставки
- Подходящ за повечето тонове на кожата и цветове на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Нежен и удобен със SenselQ
- Интелигентен анализ на кожата със SkinAI

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати

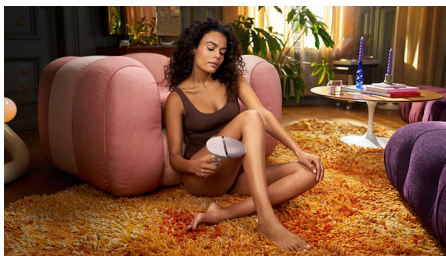


На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

Технология SenselQ



Сериата Lumea 9900 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата Ви и Ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

For convenience with corded and cordless options

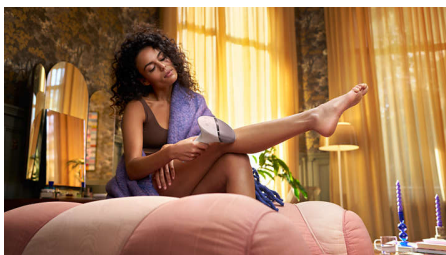

Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи участъци от тялото, като

краката ви, или преминете към режима на безжична батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.

4 интелигентни приставки




Специално проектираните приставки перфектно пасват на извивките на тялото Ви и задействат най-ефективните програми за всяка област на тялото, когато са свързани. Лице: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър. Тяло: извити навътре с голям прозорец. Бикини и подмишници: извити навън за труднодостъпни места.

Разработено с помощта на дерматолози




Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Изключителни функции на SkinAI

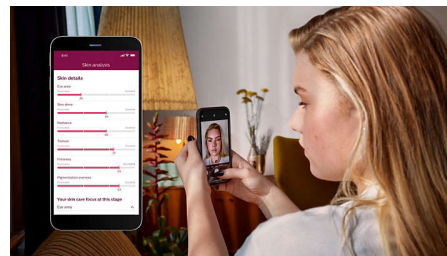

Нашето безплатно приложение за инструктиране вече предлага насоки стъпка по стъпка с изключителна SkinAI технология, за да анализирате кожата си и да проследявате намаляването на окосмяването.

За повечето типове кожа и косми

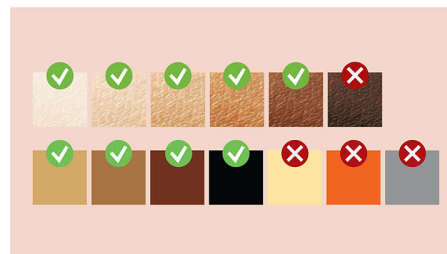

Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до тъмнокафява (I – V).

Спецификации

Технически спецификации на приставките

Приставка за третиране на тялото: Форма: изпъкнала извивка, Прозорец с размер: 4,1 см2, Персонализирано третиране на тялото: крака, ръце и стомах

Приставка за третиране на лицето: Форма: плоска, Прозорец с размер: 2 см2, допълнителен филтър, Персонализирано третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

Приставка за третиране на бикини зоната: Форма: вдлъбната извивка, Прозорец с размер: 3 см2, Персонализирано третиране на чувствителна бикини зона

Приставка за третиране на долната част на ръката: Форма: вдлъбната извивка, Прозорец с размер: 3 см2, Персонализирано третиране на подмишници

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми

според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност: Предотвратява случайното генериране на импулс

Сензор за тон на кожата: Установява цвета на кожата ви

Сензор SmartSkin: Правилната настройка по желание

Режим на приложение

Плъзгане и импулс: За бързо приложение

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Употреба с кабел/без кабел: Използване без кабел и с кабел

Технически спецификации

Тип батерия: Акумулаторна батерия

Напрежение: 100-240 V

Лампа с високи работни характеристики: Създаден, за да издържи, осигурява 450 000 импулса, еквивалентни на 39 години живот на лампата****

Сервизно обслужване

Гаранция: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод, за потребителя

Съхранение: Луксозен калъф

Адаптер: 19,5 V/4000 mA

Време на приложение

Долна част на крака: 8,5 мин

Долна част на ръцете: 2,5 мин

Бикини линия: 2 мин

Зони на лицето: 1,5 мин



* Средно намаляване на окосмяването след 12 третираня: 86% на подбедрицата, 70% на бикини зоната, 67% на подмишниците
* * При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips