

PHILIPS

IPL hårfjerningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 9900
Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt, bikini, armhuler

Eksklusiv AI-drevne app-
funksjoner

Både trådløs bruk og bruk med
ledning

BRP958/00



Vår smarteste IPL med eksklusive SkinAI-funksjoner

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Oppdag vår smarteste IPL-løsning noensinne for langvarig glatt hud. Vår raskeste trådløse Lumea IPL-enhet med SenseIQ-teknologi leveres nå med eksklusive SkinAI-funksjoner i Lumea IPL-appen, slik at du kan få analysert huden din og spore fremgangen.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- Den eneste Lumea med trådløs tilkobling
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler
- Glatt ansikt er bare to trinn unna med en ansiktshårfjerner
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Smart hudanalyse med SkinAI


Høydepunkter

Inkluderer ansiktshårfjerner




Lumea IPL 9900-serien leveres med den nye ansiktshårfjerner fra Philips. Nå kan du enkelt og trygt fjerne hår før du blinker med Lumea.

Eksklusive SkinAI-funksjoner

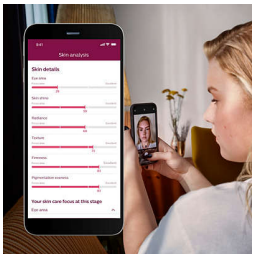

Den gratis veilednings-appen vår gir steg-for-steg veiledning, nå med eksklusiv SkinAI-teknologi for å analysere huden din og spore hårreduksjon.

Utviklet sammen med hudspesialister

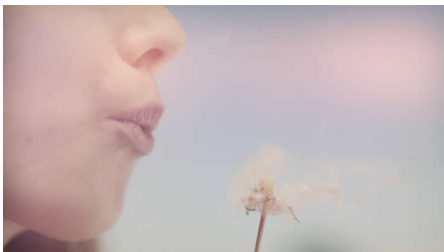

Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Fire smarte tilbehørsdeler



Spesialdesignet tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for de ulike kroppsområdene når det er koblet til. Ansikt: flatt design og lite vindu med UV-filer. Kropp: kurvet innover med stort vindu. Bikini og armhule: kurvet utover for vanskelig tilgjengelige områder.

2 ganger i måneden for raske resultater



Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9900-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest

komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Trådløs hvis du vil



Lumea 9900-serien er vår eneste IPL med praktisk trådløs funksjonalitet, noe som gjør det enda enklere å nå frem hvor som helst med presisjon og bruke den der du befinner deg.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

Tilbehør for underarmbehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen
SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Tekniske spesifikasjoner

Batteritype: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Bygget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen****

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Legg: 8,5 min

Underarmer: 2,5 min

Bikini linje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

