

# PHILIPS

IPL-ontharingsapparaat  
met SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente opzetstukken:  
lichaam, gezicht, bikini, oksels

Exclusieve app-functies op  
basis van AI

Zowel met als zonder snoer te  
gebruiken

BRP958/00



## Onze slimste IPL met exclusieve SkinAI-functies

Geniet 12 maanden lang van een haarloze, gladde huid\*

Ontdek onze slimste IPL-oplossing ooit voor een langdurig gladde huid. Ons snelste draadloze Lumea IPL-apparaat met SenseIQ-technologie wordt nu geleverd met exclusieve SkinAI-functies in de Lumea IPL-app om uw huid te analyseren en uw voortgang bij te houden.

### Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- De enige Lumea met snoerloze optie

### Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Een glad gezicht in slechts twee stappen met de Gezichtshaarverwijderaar
- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 4 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

### Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling\*

- Slimme huidanalyse met SkinAI
- Zacht en comfortabel met SenseIQ


# Kenmerken

## Inclusief Gezichtshaarverwijderaar




De Lumea IPL 9900-serie wordt geleverd met het nieuwe Philips Gezichtshaarverwijderaar. Nu kunt u lichte gezichtsbehaarung eenvoudig en veilig verwijderen voordat u met Lumea behandelt.

## Exclusieve SkinAI-functies

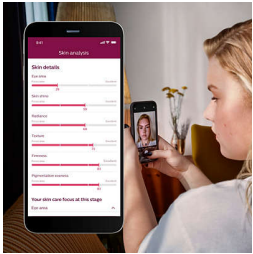

Onze gratis coaching-app biedt nu stapsgewijze begeleiding met exclusieve SkinAI-technologie om uw huid te analyseren en haarvermindering bij te houden.

## Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

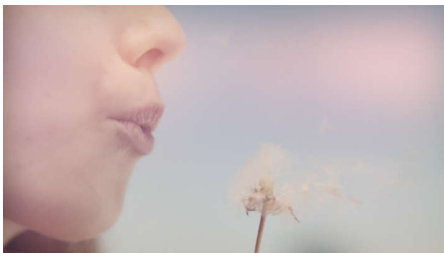

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid

van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

## 4 slimme opzetstukken



Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster. Bikini en oksel: Naar buiten gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen.

## 2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

## SenseIQ-technologie



Lumea 9900-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortabele instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

## Snoerloos als u dat wilt



Voor extra gemak is de Lumea 9900-serie onze enige IPL met snoerloze functionaliteit, waardoor het nog eenvoudiger wordt om overal nauwkeurig bij te kunnen en te gebruiken waar u wilt.

## Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

# Specificaties

## Technische specificaties hulpstukken

**Lichaamsopzetstuk:** Vorm: bol gebogen,

Venstergrootte: 4,1 cm<sup>2</sup>, Afgestemde

lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

**Opzetstuk voor het gezicht:** Vorm: plat,

Venstergrootte: 2 cm<sup>2</sup>, extra filter, Afgestemde

behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

**Opzetstuk voor bikinilijn:** Vorm: hol gebogen,

Venstergrootte: 3 cm<sup>2</sup>, Afgestemde

behandeling voor gevoelige bikinilijn

**Opzetstuk voor de oksels:** Vorm: hol gebogen,

Venstergrootte: 3 cm<sup>2</sup>, Afgestemde

onderarmbehandeling

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

**Huidtintsensor:** Detecteert uw huidtint

**SmartSkin-sensor:** De juiste instelling op het juiste moment

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor snelle toepassing

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Zowel met als zonder snoer te gebruiken

**Stap en Flits:** Voor behandeling op kleine zones

## Technische specificaties

**Batterijtype:** Oplaadbare batterij

**Spanning:** 100-240 volt

**Lamp met hoge prestaties:** Duurzaam, 450.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 39 jaar\*\*\*\*

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

## Meegeleverde artikelen

**Gebruiksaanwijzing:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Luxe etui

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8,5 min.

**Oksels:** 2,5 min.

**Bikinilijn:** 2 min.

**Delen van het gezicht:** 1,5 min.

