

# PHILIPS

## sonicare

ProtectiveClean  
4300

Mitarbeiterertestmodell

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6848/98



## Nicht zum Weiterverkauf! Weißere Zähne. Ganz sanft.

Bis zu 100% gesünderes Zahnfleisch als mit einer Handzahnbürste.

Der perfekte Einstieg in die Schalltechnologie: Überzeugen Sie sich selbst und spüren Sie den Unterschied einer sanften aber gründlichen Reinigung mit Drucksensor.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

### Innovative Technologie

- Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht
- Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

### Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Verbessert Gesundheit des Zahnfleisches um bis zu 100 %\*
- Füllungen, Kronen oder empfindliche Bereiche? Keine Sorge.

### Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Eine tolle Möglichkeit, sich an Ihre neue Zahnbürste zu gewöhnen
- Förderung einer gründlichen Reinigung

# Besonderheiten

## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten bieten Ihnen eine besonders schonende Reinigung zur Entfernung von Plaque entlang des Zahnfleischrands. So wird Ihr Zahnfleisch um bis zu 100 % gesünder als mit Handzahnbürsten. Mit der speziell gebogenen Aktivspitze kommen Sie außerdem einfacher an die Zähne im hinteren Mundbereich.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

## Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen,


Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Intelligente Erinnerungsfunktionen

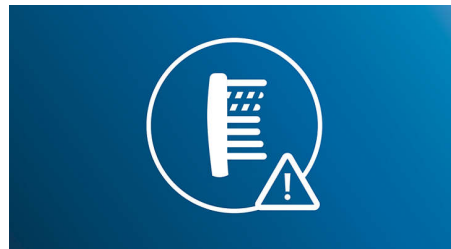


Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

## BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

## Hilfreiche Timer

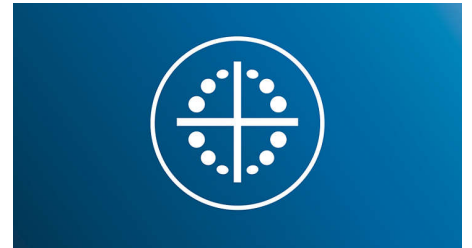

Unser 4-Quadranten-Timer teilt Patienten mit, wenn sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

## Easy-Start-Funktion

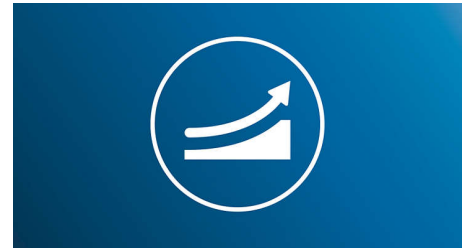

Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Mid-Blue

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare (Standard), 1 W2c: Optimal White (kompakt)

**Ladegerät:** 1

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-

Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

