

Philips BlueTouch
App-styrt trådløs
smertelindringsenhet

Innovativ blå LED-teknologi
For muskulære ryggsmarter
Kompatibel med iOS og Android
Inkludert en stropp for øvre rygg



PR3741/00

Naturlig, medikamentfri lindring av muskulære ryggsmarter

Klinisk bevist* smerteterapi med blått lys

Philips BlueTouch bruker nyskapende smerteterapi med blått lys som har dobbel effekt. Lyset gir lindrende varme og stimulerer frigjøringen av kroppens nitrogenoksid, noe som øker lokal blodgjennomstrømning og støtter kroppens naturlige gjenopprettingsprosesser.

Øker lokal blodgjennomstrømning for å lindre smerter

- Bruker varmen og den naturlige behandlingseffekten til blått lys
- Medikamentfri behandling

Innovativ blå LED-lys-teknologi

- Unik bruk av blå LED-lys for å øke lokal blodgjennomstrømning
- Ekstra beroligende varmeeffekt for lindring av ryggsmarter
- Informasjon om kontraindikasjoner i brukerhåndboken

Bruk opptil 30 min to ganger om dagen for lindring etter 1–2 uker

- Korte behandlingstider, tre intensitetsnivåer
- Test den: 30-dagers pengene tilbake-garanti
- Du kan kjenne resultatene i løpet av én til to uker

Kontroller behandlingen med en iOS-/Android-enhet

- Spor fremdriften til behandlingene i dagboksoversikten
- Bruk behandlingssappen for full kontroll med en smartenhet


PHILIPS

App-styrt trådløs smertelindringsenhet

Innovativ blå LED-teknologi For muskulære ryggsmarter, Kompatibel med iOS og Android, Inkludert en stropp for øvre rygg

Høydepunkter


40 optimaliserte blå LED-lys

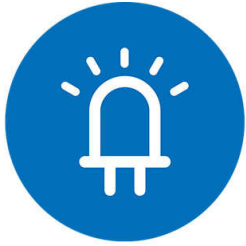

40x

BlueTouch-enheten har 40 blå terapeutiske LED-lys. Det blå lyset gir varme og stimulerer kroppens naturlige frigjøring av nitrogenmonoksid. Dette fører til økt blodgjennomstrømning og forbedrer nærings- og oksygenforsyningen og fjerner metabolitter, slik at behandlingen av de berørte musklene støttes.

Behagelig varme

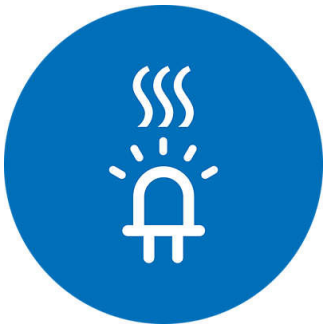

BlueTouch avgir også gunstig varme som virker avslappende på musklene og lindrer ryggsmarter, noe som gir brukeren en følelse av velvære.

Kontraindikasjoner

Du må ikke bruk BlueTouch hvis du har en av kontraindikasjonene som er oppført i brukerhåndboken. Du finner en full oversikt i brukerhåndboken. Noen eksempler omfatter: – Hvis du har en kjent solallergi – Hvis du bruker steroider, ettersom at dette

medikamentet gjør huden mer mottakelig for irritasjon – Hvis du har et medisinsk implantat (f. eks en skrue osv.) i, eller i nærheten av, området som skal behandles, eller et aktivt medisinsk implantat, for eksempel pacemaker, defibrillator, nervestimulator, cochleaimplantat eller aktive medikamentleveringsenheter hvor som helst i kroppen – Hvis du er gravid

Medikamentfri lindring av ryggsmarter

Philips BlueTouch bruker varme som utløser naturlige helbredelsesprosesser med blått lys for å lindre ryggsmarter uten medikamenter.

Naturlig lindring av ryggsmarter

Den største fordelene med varmeterapi med blå LED-lys er at det er naturlig. Det blå lyset stimulerer kroppens egne prosesser. Når blå LED-lys treffer huden, frigjøres kroppens egne forsyninger av nitrogenoksidmolekyler og transporteres til musklene som forårsaker ryggsmertene. Disse små molekylene lindrer ryggsmerten på en naturlig måte.

Bruk sammen med gratis behandlingsapp




Philips BlueTouch styres med den spesialutviklede appen vår, slik at det blir enkelt å velge og kontrollere behandlingen. Behandlingsappen er tilgjengelig for smarttelefon og nettbrett og er kompatibel med iOS 7 opp til iOS 10 og med Android 4.4 Kitkat opp til Android 7.

PR3741/00

Behandlingsoversikt i dagboken

Behandlingsdagboken er en del av behandlingsappen. Med ett enkelt trykk på dagboksfunksjonen får du en omfattende oversikt over behandlingene dine. Du kan bruke denne oversikten til å optimalisere behandlingen av ryggsmertene.

Behandlingsvarighet

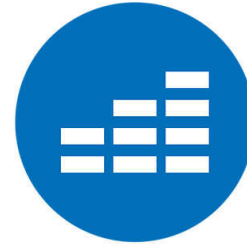

3x

Philips BlueTouch kan brukes opptil to ganger om dagen. Lengden på hver behandling avhenger av hvilket intensitetsnivå du velger. I modus 1 (svak) kan du bruke enheten i maksimalt 30 minutter, i Modus 2 (middels) kan du bruke enheten i 20 minutter og i Modus 3 (intens) kan du bruke enheten i 15 minutter per behandling. Du velger det intensitetsnivået du foretrekker, og de varierer i lysintensitet og temperatur. Takk være blå LED-teknologi bidrar BlueTouch til effektiv lindring av ryggsmarter når du bruker enheten hver dag.

30-dagers pengene tilbake-garanti

Du kan teste Philips BlueTouch og finne ut hvordan den fungerer. Prøv enheten i minst to uker for å oppnå optimal effekt. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, får du pengene tilbake innen 30 dager etter kjøpsdato.

Anbefalt bruk

Anbefalt bruk. To ganger om dagen i opptil 30 min. Du merker forandringen etter én til to uker.

App-styrt trådløs smertelindringsenhet

Innovativ blå LED-teknologi For muskulære ryggsmarter, Kompatibel med iOS og Android, Inkludert en stropp for øvre rygg

Spesifikasjoner

Programvare

- iPhone®-kompatibilitet: Versjon iOS7 opp til iOS10, iPhone® 4S og nyere
- iPad®-kompatibilitet: Versjon iOS7 opp til iOS10, Tredje generasjon iPad®, iPad Air™, iPad mini™ og nyere
- Android-kompatibilitet: Android 4.4 KitKat opp til Android 7
- iPod®-kompatibilitet: Versjon iOS7 opp til iOS10, Femte generasjon iPod touch® og nyere

Mål og vekt

- Vekten til BlueTouch: 0,168 kg
- Enhetsmål (B x H x D): 280 x 155 x 12,5 mm

Følgende er inkludert:

- BlueTouch-enhet for smertelindring
- Adapter
- Stropp for øvre del av ryggen

Bruksområder

- For muskulære ryggsmarter
- Øvre del av ryggen

Beskrivelser

- Nominell spenning: 100–240 V
- Nominell frekvens: 50–60 Hz
- Nominell inngang: 15 W
- Klasse: Medisinsk enhet, klasse IIa
- Klassifisering: Risikogruppe 1
- Inntrenging av vann: IP22
- Maksimal daglig dose: < 108,5 J/cm²
- Batteritype: Li-ion
- Bølgelengde blå LED-lys: 453 nm

Bruk

- Modus 1 (lav): To ganger om dagen i 30 minutter
- Modus 2 (middels): To ganger om dagen i 20 minutter
- Opptil to ganger om dagen
- Modus 3 (høy): To ganger om dagen i 15 minutter



Utgivelsesdato
2023-03-28

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 10103 73507 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (Universitätsklinikken Heidelberg, Tyskland), 24. tverrfaglige kongress om smerteterapi og palliativ pleie, Frankfurt am Main, Tyskland, foredrag om bruk av BlueTouch mot kroniske ryggsmarter 7. mars 2013.