

Philips BlueTouch
Appkontrollerad
smärtlindringsplatta

Innovativ blå LED-teknik
Mot ryggont samt muskelvärk i
ryggen
Kompatibel med iOS och Android
Inneh. rem för nedre delen av
ryggen



PR3743/00

Naturlig smärtlindring utan läkemedel – för muskelvärk i ryggen

Kliniskt testad* smärtlindringsbehandling med blått ljus

I Philips BlueTouch används en innovativ blåljusbehandling med dubbelverkande effekt. Den ger lugnande värme och stimulerar kroppens frigörande av kväveoxid, vilket ökar det lokala blodflödet och stimulerar kroppens naturliga återhämtningsförmåga.

Ökar blodflödet lokalt vilket ger smärtlindring

- Använder värme och den naturliga läkande effekten hos blått ljus
- Behandling utan mediciner

Innovativ blå lysdiodteknik

- Unikt med blått LED-ljus för att öka det lokala blodflödet
- Extra lugnande värmeeffekt för smärtlindring i ryggen
- Information om kontraindikationer i användarhandboken

Använd upp till 30 min två ggr om dagen för lindring i 1-2 v

- Korta behandlingstider, tre intensitetsnivåer
- Testa den: 30 dagars pengarna tillbaka-garanti
- Känn resultat inom en till två veckor

Styr din behandling från en iOS- eller Android-enhet

- Spåra framsteg med behandlingarna i en dagboksöversikt
- Använd behandlingsappen för full kontroll med en smart enhet


PHILIPS

Appkontrollerad smärtlindringsplatta

Innovativ blå LED-teknik Mot ryggont samt muskelvärk i ryggen, Kompatibel med iOS och Android, Innehåller rem för nedre delen av ryggen

Funktioner


40 optimerad blå lysdioder

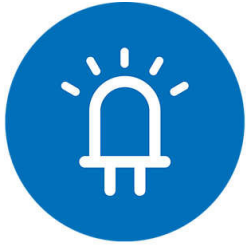

40x

BlueTouch-plattan innehåller 40 blå lysdioder som skapar terapeutiskt ljus. Blått ljus ger värme och stimulerar kroppens naturliga utsläpp av kväveoxid. Tillsammans leder det till ett högre blodflöde, som i sin tur förbättrar näringsämnen och syretillförsel och avlägsnar metaboliter. Detta stöder återställningsprocessen för berörda muskler i behandlingsområdet.

Behaglig värme

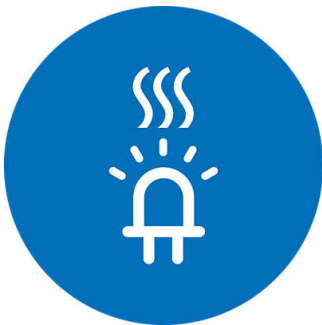

BlueTouch ger även välgörande värme som lugnar muskler för smärtlindring i ryggen och ger den som använder plattan en känsla av välbefinnande.

Kontraindikationer

Använd inte BlueTouch om du har någon av de kontraindikationer som anges i användarhandboken. Läs hela översikten i användarhandboken. Några exempel: Om du har en känd solöverkänslighet, eller om du använder steroider. Det här läkemedlet gör

huden mer känslig för irritation. Om du har en implanterad medicinsk enhet (skruvar osv.) i eller i närheten av behandlingsområdet eller en aktiv implantation, t.ex. pacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochleaimplantat, aktiv medicinövervakningsenhet i kroppen eller om du är gravid


Smärtlindring för ryggen utan mediciner

Philips BlueTouch använder värme och aktiverar naturliga läkande processer med blått ljus för att lindra ryggsmärta utan mediciner.

Naturlig smärtlindring i ryggen

Den största fördelen med terapi med blått LED-ljus ligger i dess naturliga karaktär. Den blå lampan stimulerar kroppens egna processer. När det blå LED-ljuset träffar huden, frigörs kroppens egna reserver med kväveoxid (NO)-molekyler och transporteras till musklerna som orsakar ryggsmärtorna. Den här lilla molekylen har en fantastisk effekt: smärtan i ryggen lindras naturligt.

Använd med den kostnadsfria behandlingsappen

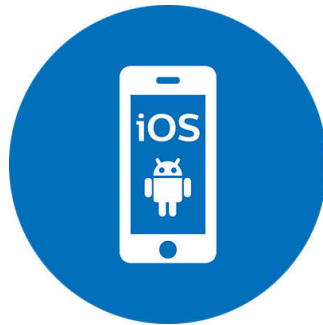

Philips BlueTouch styrs med vår särskilt utformade app för att göra det enkelt att välja och styra smärtlindringen. Behandlingsappen finns för smartphone och surfplatta och är kompatibel med iOS 7 till iOS 10 och med Android 4.4 Kitkat till Android 7.

PR3743/00


Översikt över behandling i dagbok

I behandlingsappen finns en behandlingsdagbok. Med ett tryck på en knapp får du en omfattande översikt över din personliga behandlingshistorik. Du kan använda den här översikten för att optimera smärtbehandlingen för ryggen.

Rekommenderad användning

Rekommenderad användning är två gånger om dagen i upp till 30 min. Känn resultat inom en till två veckor.

Behandlingens varaktighet

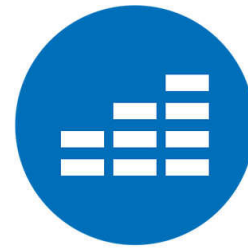

3x

Philips BlueTouch kan användas upp till två gånger om dagen. Längden på varje behandling beror på vilken intensitetsnivå som är vald. I läge 1 (skonsam) ska enheten användas i högst 30 minuter, i läge 2 (medel) i 20 minuter och i läge 3 (intensivt) i 15 minuter per behandling. Intensitetsnivåer kan väljas för att passa dina önskemål. De skiljer sig åt i ljusintensitet och temperatur. Tack vare verkningssättet för blått LED-ljus, kan BlueTouch bidra till effektiv smärtlindring i ryggen när de används varje dag.

Återköpsgaranti inom 30 dagar

Se själv hur det fungerar och testa Philips BlueTouch! Testa den i minst två veckor för optimal effekt. Om du inte är nöjd kan du få tillbaka pengarna inom 30 dagar efter inköpsdatum.

Appkontrollerad smärtlindringsplatta

Innovativ blå LED-teknik Mot ryggont samt muskelvärk i ryggen, Kompatibel med iOS och Android, Innehåller rem för nedre delen av ryggen

Specifikationer

Programvara

- iPhone®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10, iPhone® 4S och senare
- Kompatibilitet med Android: Android 4.4 KitKat till Android 7
- iPad®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10, iPad® 3:e generationen, iPad Air™, iPad mini™ och senare
- iPod®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10, iPod touch® 5:e generationen och senare

Vikt och mått

- BlueTouch vikt: 0,168 kg
- Plattans mått (B x H x D): 280 x 155 x 12,5 mm

Vad medföljer?

- BlueTouch-smärtlindringsplatta
- Adapter
- Rem för nedre delen av ryggen

Användningsområden

- Nedre delen av ryggen
- Mot ryggont samt muskelvärk i ryggen

Specifikationer

- Märkspänning: 100–240 V
- Märkfrekvens: 50–60 Hz
- Nominell ineffekt: 15 W
- Class: Medicinsk enhet klass IIa
- Klassificering: Skyddsklass 1
- Vattenintrång: IP22
- Maximal daglig dos: < 108,5 J/cm²
- Batterityp: Litiumjon
- Våglängd för blått LED-ljus: 453 nm

Användning

- Läge 1 (låg): Två gånger om dagen i 30 min
- Läge 2 (medel): Två gånger om dagen i 20 min
- Upp till två gånger om dagen
- Läge 3 (hög): Två gånger om dagen i 15 min



Publiceringsdatum
2023-03-29

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 73510 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (universitetskliniken i Heidelberg i Tyskland), 24th Interdisciplinary Congress on Pain Therapy and Palliative Care, Frankfurt/Main, Tyskland, föreläsning den 7 mars 2013 om användningen av BlueTouch för kronisk ryggsmärta i muskulatur/skelett.